



ACCESSOIRES DE BLOC OPÉRATOIRE

L'expertise du positionnement au service des patients
et des équipes médicales



MEDICAL SYSTEM Spécialiste du positionnement du patient

Depuis 1989, MEDICAL SYSTEM accompagne les établissements de santé dans la fourniture, la maintenance et le service après-vente d'équipements médicaux.

En plus de 20 ans, nous avons développé une expertise reconnue dans le positionnement chirurgical, avec un objectif : **améliorer l'ergonomie du poste de travail tout en contribuant au confort et à la sécurité du patient.**

Nous sélectionnons auprès de marques leaders internationales une large gamme de solutions compatibles avec tous types de tables d'opération et adaptées aux différentes spécialités chirurgicales.

- ✦ Expertise spécialisée en positionnement
- ✦ Solutions sélectionnées parmi les références du marché
- ✦ Accompagnement de proximité, du conseil à la maintenance

Il n'existe pas de support universel :
le positionnement doit être adapté à la chirurgie,
à sa durée et au patient.



MEDICAL SYSTEM
117 rue Robert Bunsen
ZAC Technopôle Forbach Sud
F-57460 BEHREN LES FORBACH

Tél : +33 (0)3 87 85 71 04
commercial@medical-system.com
www.medical-system.com

Icônes

D'un simple coup d'œil, repérez un ensemble d'informations sur nos produits :

Type de positionnement

- LIT** Lithotomie
- DOR** Dorsal
- LAT** Latéral
- VEN** Ventral



Diamètre
de la tige



Poids du
produit



Charge totale
acceptable



Ajustement
à une main



Antistatique



Antibactérien



Imperméable



Radiotransparent

KYRA®



Lithotomie	p. 4 - 9
Orthopédie	p. 10
Supports de bras	p. 10
Sangles	p. 11
Stabilisation et positionnement latéral	p. 11
Clameaux	p. 12
Urologie et gynécologie	p. 13
KYRA® Curve™	p. 15 - 16
KYRA® Connect™ Spine	p. 17 - 21
Supports de tête	p. 21 - 22

PEDISTIRRUP



Bottes de maintien pédiatrique	p. 23
--------------------------------	-------

OPITEK



HIP FIX®	p. 24
----------	-------

CARE SURGICAL



Décubitus ventral	p. 26 - 28
Supports compatibles Allen®, Osi®, Jackson®	p. 29 - 30
Protection et maintien de la tête	p. 30 - 32
Consommables	p. 33
Supports de bras	p. 33 - 34
Coussins de positionnement	p. 34

BIOMATRIX



Matelas anti-glisse Bi-Pad DUOFIT	p. 35 - 37
Positionneurs à usage unique	p. 37

REISON



Clameaux	p. 38 - 39
Extensions de rails	p. 39
Supports de bras et coussins	p. 40 - 43
Accessoires de positionnement	p. 44 - 46
Maintien et sécurisation	p. 46 - 47
Supports de tête	p. 47 - 49
Chirurgie de la main	p. 50 - 51
Gynécologie et proctologie	p. 52
Arceaux d'anesthésie	p. 53
Perfusion et gestion des tubulures	p. 54 - 56
Tables à instruments	p. 56 - 57
Adaptation de la table d'opération	p. 57 - 59
Maintien du patient	p. 59 - 61

BONEFOAM



NEXTEND - positionnement des cervicales	p. 62 - 63
SIDELINE - positionnement latéral	p. 64
SHARK - stabilisateur bras et torse	p. 65
Positionneurs complémentaires	p. 65 - 66
Protections à usage unique	p. 66

FISSO



Supports de bras	p. 67
------------------	-------

KLINIGEL



Tête et cou	p. 69 - 74
Bras et coudes	p. 74 - 76
Epaule et corps	p. 77 - 81
Pieds, chevilles et talons	p. 82 - 85
Gels de table	p. 85 - 86
Mousses de positionnement Mooba	p. 87 - 88

CLEANPATCH



Patchs réparateurs de surfaces médicales	p. 89
--	-------

SCANGLISS



Planches de transfert	p. 90 - 91
Draps de transfert	p. 91
Matelas de transfert	p. 92
Accessoires	p. 92

REMEDA



Table de Mayo	p. 93
Table à double plateaux	p. 93
Table à instruments déportée	p. 94
Table pont renforcée	p. 94
Table à instruments à plateaux rabattables	p. 94

AKRUS



Fauteuil opératoire électrique	p. 95 - 96
Fauteuil de chirurgien	p. 96

PROMEGA



Vêtements et accessoires de radioprotection	p. 95
---	-------



SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE CONFORT DU PATIENT

KYRA® Medical conçoit des **solutions de positionnement patient innovantes et ergonomiques** pour la chirurgie, alliant **accès chirurgical optimisé, confort maximum et sécurité accrue**.
La gamme KYRA® se distingue par des designs robustes, des réglages précis et une hygiène facilitée, adaptés aux besoins des blocs opératoires modernes.



Accès chirurgical amélioré



Hygiène renforcée et réduction des risques infectieux



Innovations ergonomiques centrées sur le patient




Produits robustes et adaptés aux contraintes du bloc

LE POSITIONNEMENT EN LITHOTOMIE



La position de lithotomie impose une élévation et un maintien prolongé des membres inférieurs, avec des exigences variables selon :

- + la morphologie du patient
- + la durée de l'intervention
- + le type de chirurgie
- + les exigences d'hygiène et la fréquence d'utilisation

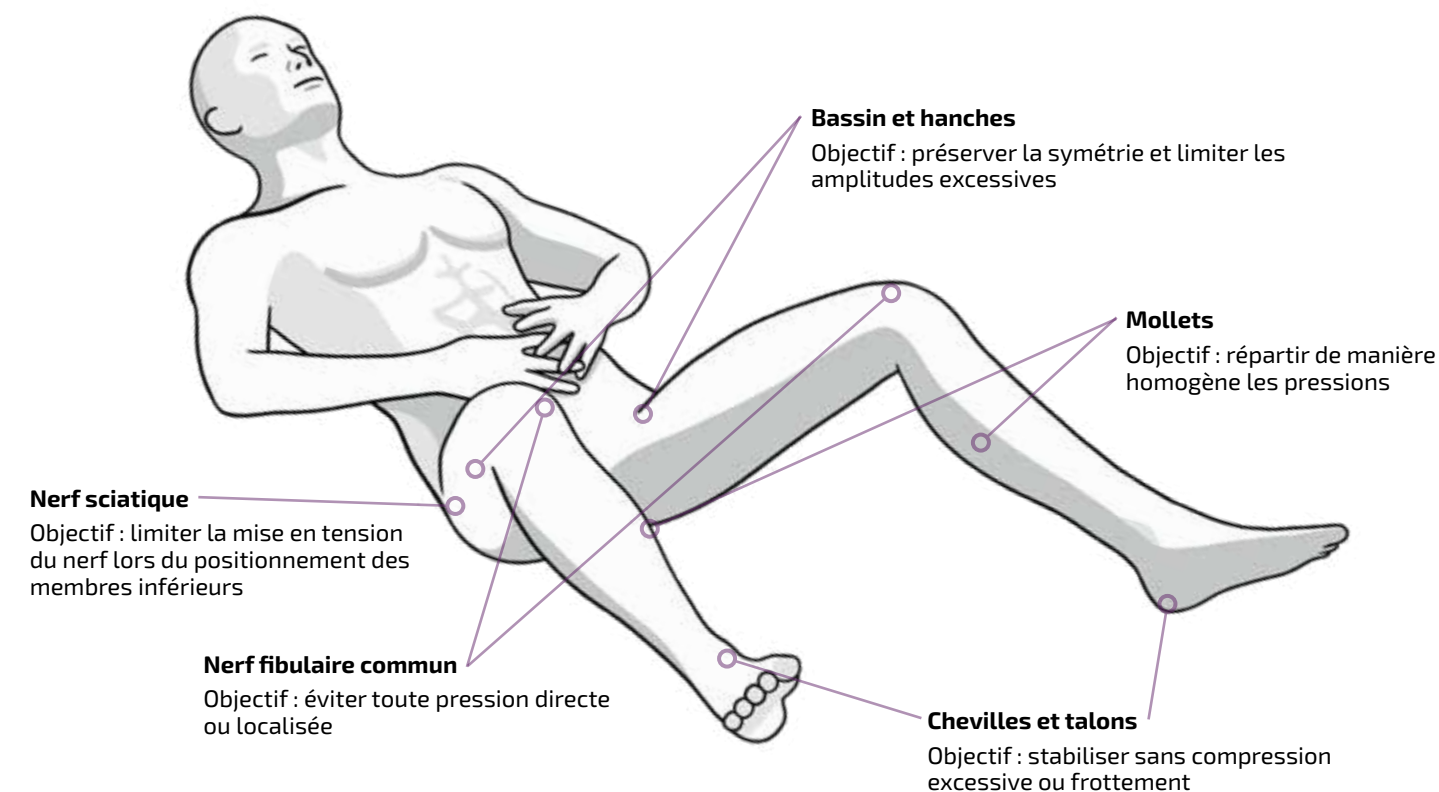


Comment choisir son porte-jambes ?

La gamme KYRA® propose trois approches complémentaires du positionnement en lithotomie :

KYRA® CLASSIC™

Pour qui ?

- + Chirurgie standard
- + Utilisation quotidienne
- + Blocs polyvalents

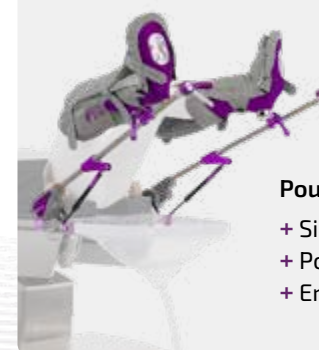


Pourquoi ?

- + Simplicité
- + Polyvalence
- + Ergonomie

KYRA® COMFORT™

Pour qui ?

- + Robotique
- + Lithotomie basse
- + Chirurgies complexes
- + Patients à forte corpulence

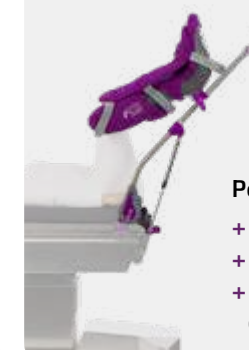


Pourquoi ?

- + Amplitude étendue
- + Tige courbée
- + Accès chirurgical optimisé

KYRA® CLEAN™

Pour qui ?

- + Protocoles d'hygiène renforcés
- + Forte fréquence d'utilisation
- + Robotique
- + Chirurgie complexe

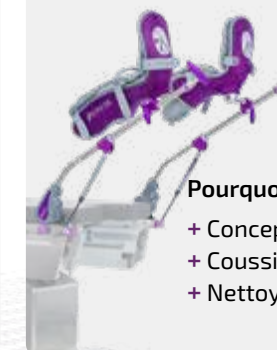

Pourquoi ?

- + Conception sans textile
- + Coussins antimicrobiens
- + Nettoyage facilité



Constitue une solution fiable et intuitive pour la majorité des procédures réalisées en position de lithotomie.

- + Tige longue : s'adapte à toutes les tailles de patients
- + Rembourrage haute densité : meilleure répartition des pressions
- + Poignée ergonomique : facilite les manipulations
- + Sangles en silicone Secure-Lok™ : faciles à nettoyer
- + Maintenance simplifiée



Applications recommandées

- Interventions courtes à moyennes
- Chirurgies réalisées en lithotomie standard
- Procédures ambulatoires
- Gynécologie, urologie, digestif et colorectal



Poignée Easy-Squeeze : réduction de 33 % de l'effort




Tige longue : s'adapte à une large diversité de morphologies



Sangles en silicone Secure-Lok™



Tige droite : réglage simple de la botte

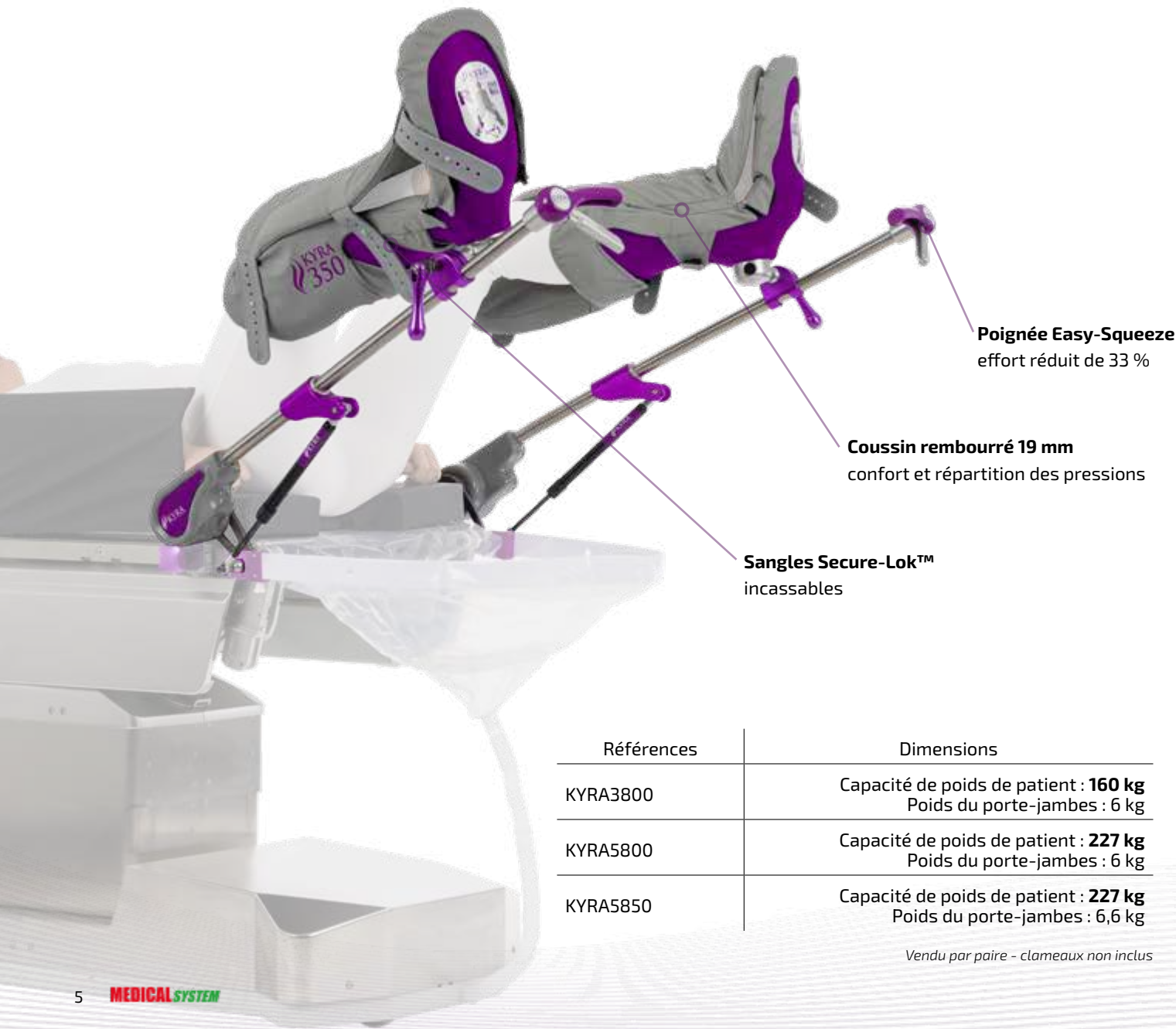

Références	Dimensions
KYRA3800	Capacité de poids de patient : 160 kg Poids du porte-jambes : 6 kg
KYRA5800	Capacité de poids de patient : 227 kg Poids du porte-jambes : 6 kg
KYRA5850	Capacité de poids de patient : 227 kg Poids du porte-jambes : 6,6 kg

Vendu par paire - clameaux non inclus



Conçu pour les procédures complexes, la chirurgie robot-assistée et les patients à forte corpulence, il optimise le positionnement des patients lors d'interventions nécessitant un accès chirurgical maximal.

- + Accès chirurgical optimisé
- + Grande amplitude de positionnement
- + Protection renforcée des zones à risque
- + Adapté aux patients à forte corpulence
- + Confort et sécurité lors des interventions prolongées



Applications recommandées

- Robotique
- Urologie complexe
- Chirurgie pelvienne
- Patients à IMC élevé
- Interventions longues



Tige courbée : facilite l'accès au site opératoire




Mousse épaisse : protection renforcée du nerf fibulaire



Amplitude de mouvement étendue : +85° / - 55°



Botte ajustable : favorise l'adaptation à la morphologie du patient

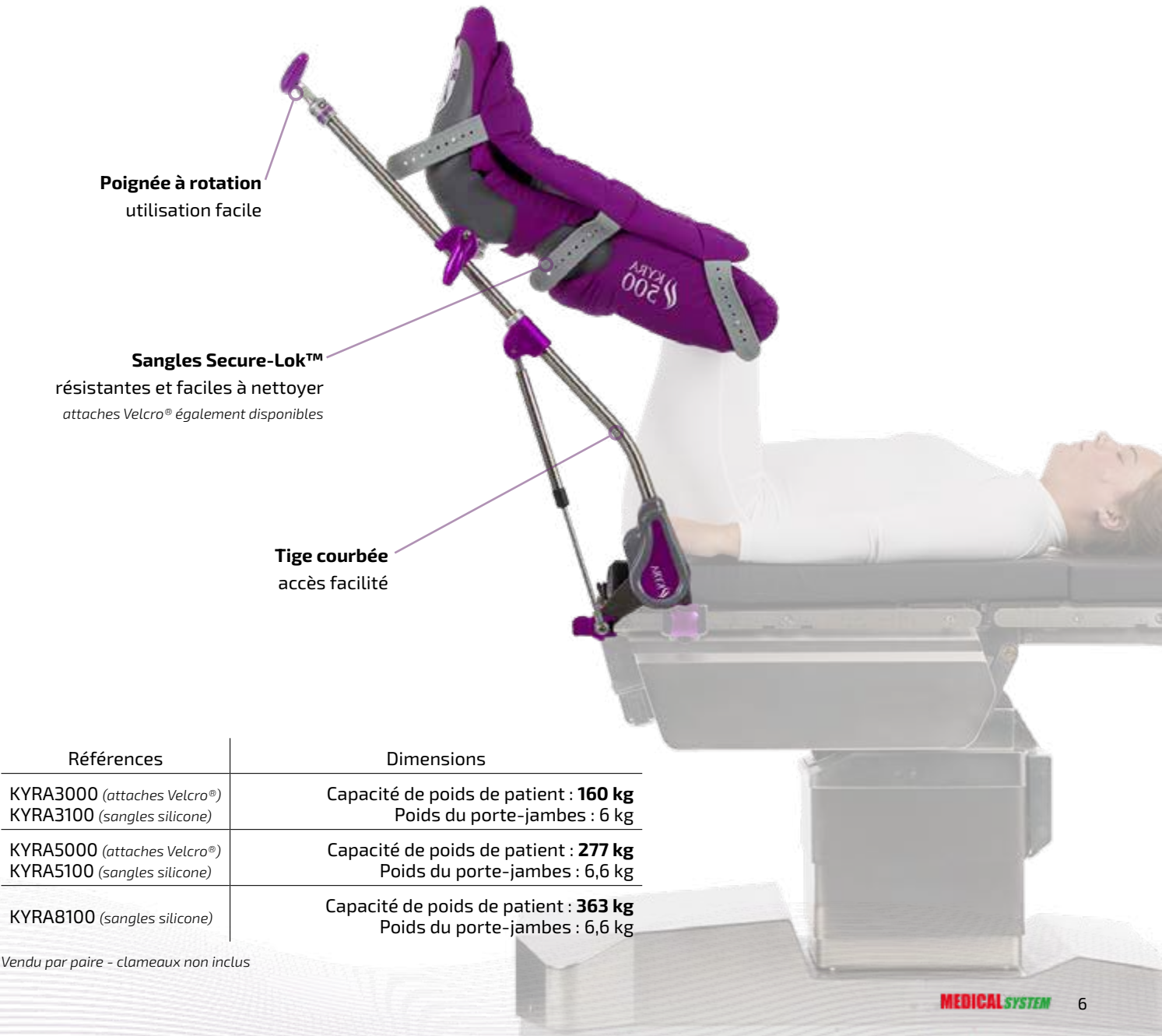

Références	Dimensions
KYRA3000 (attaches Velcro®) KYRA3100 (sangles silicone)	Capacité de poids de patient : 160 kg Poids du porte-jambes : 6 kg
KYRA5000 (attaches Velcro®) KYRA5100 (sangles silicone)	Capacité de poids de patient : 277 kg Poids du porte-jambes : 6,6 kg
KYRA8100 (sangles silicone)	Capacité de poids de patient : 363 kg Poids du porte-jambes : 6,6 kg

Vendu par paire - clameaux non inclus



Conçu pour les environnements exigeants, il associe les performances de positionnement de la gamme COMFORT™ à une conception optimisée pour l'hygiène et un nettoyage facilité.

- + Coussins antimicrobiens décontaminables
- + Surfaces lisses et étanches
- + Grande amplitude de mouvement
- + Protection renforcée du nerf fibulaire
- + Accès facilité en lithotomie basse

Applications recommandées

- Urologie
- Gynécologie
- Robotique
- Environnements à forte rotation
- Protocoles d'hygiène renforcés



Surfaces lisses : nettoyage facilité




Botte ajustable ; diminution des contraintes articulaires



Tige courbée pour un accès chirurgical optimisé



Sangles en silicone faciles à nettoyer

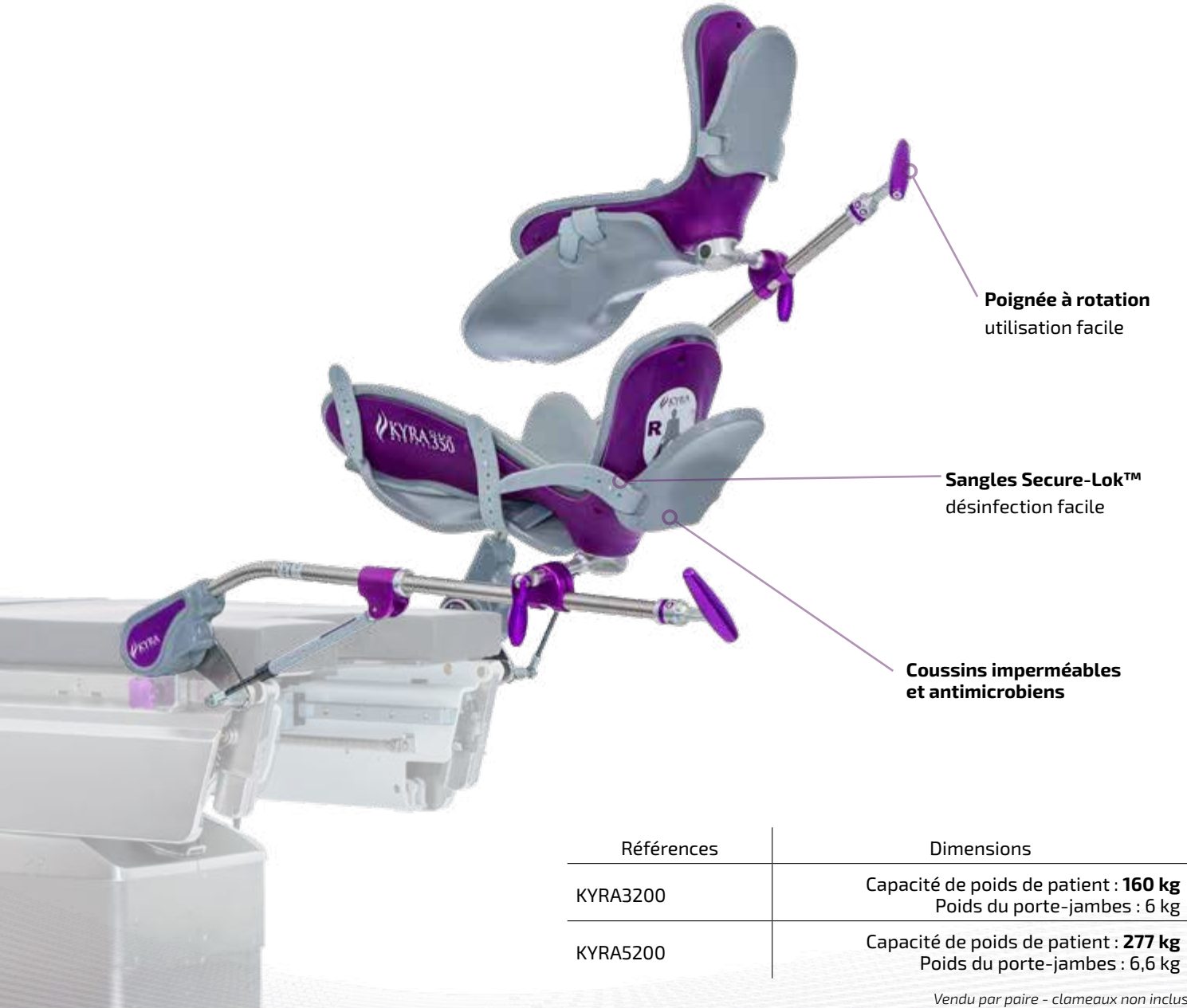

Références	Dimensions
KYRA3200	Capacité de poids de patient : 160 kg Poids du porte-jambes : 6 kg
KYRA5200	Capacité de poids de patient : 277 kg Poids du porte-jambes : 6,6 kg

Vendu par paire - clameaux non inclus



PORTE-JAMBES - JUNIOR

Conçu sans ailettes pour s'adapter aux petites morphologies : patients à partir de 6 ans ou adultes de petite taille. Sangles en silicone résistantes et faciles à nettoyer.

Vendu par paire - clameaux non inclus

Référence	Dimensions
KYRA7810	Cap. de poids de patient : 110 kg Poids du porte-jambes : 4,6 kg



PORTE-JAMBES "KYRA BLUE"

Solution sans ailettes latérales destinée aux procédures spécifiques où une botte complète n'est pas nécessaire, ou pour les chirurgies robotiques.

Vendu par paire - clameaux non inclus

Référence	Dimensions
KYRA7100	Cap. de poids de patient : 181 kg Poids du porte-jambes : 5,5 kg

	KYRA® COMFORT	KYRA® CLEAN	KYRA® CLASSIC	KYRA® BLUE	KYRA® JUNIOR
Tige	Courbée	Courbée	Droite	Courbée	Droite
Accès robotique	Optimisé	Optimisé	Possible	Optimisé	Possible
Amplitude lithotomie	+85° / -55°	+85° / -55°	+87° / -35°	+90° / -55°	+85° / -33°
Botte ajustable	Oui	Oui	Non	Non	Non
Protection du nerf fibulaire	Renforcée	Renforcée	Renforcée	Standard	Standard
Rotation botte	+/- 25°	+/- 25°	+/- 25°	+/- 25°	+/- 25°
Hygiène	Standard	Renforcée	Standard	Standard	Standard
Confort patient	Renforcé	Standard	Renforcé	Standard	Standard

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

Solutions complémentaires de positionnement en lithotomie



PORTE-JAMBES SIMPLE

Solution simple et fiable pour la majorité des procédures courtes à moyennes réalisées en gynécologie, urologie ou chirurgie générale. Conception sans ailettes latérales et mécanisme de réglage simplifié.

Vendu par paire - 2 clameaux KYRA4860 recommandés

Référence	Dimensions
KYRA7860	Cap. de poids de patient : 272 kg Poids du porte-jambes : 3,18 kg



PORTE-JAMBES TRADITIONNEL GOEPEL

Soutient le membre inférieur principalement au niveau du mollet/genou.

Vendu par paire - Sangles et coussins inclus
2 clameaux KYRA4860 recommandés

Référence	Dimensions
KYRA7300	Cap. de poids de patient : 227 kg Long. 762 - Larg. 356 Epaisseur 152 mm




PORTE-JAMBES DE GOEPEL ASSISTÉ

Version compacte des porte-jambes, indiquée pour les patients présentant des contraintes ou pathologies au niveau du genou. Conçu avec un vérin à gaz pour faciliter le système de levage et le positionnement en lithotomie.

Vendu par paire - Coussins inclus
2 clameaux KYRA4200 ou KYRA4710 recommandés

Référence	Dimensions
KYRA7305	Cap. de poids de patient : 227 kg Long. 762 - Larg. 356 Epaisseur 152 mm

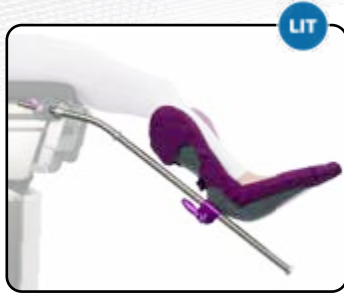

ORTEPEE

Conçu pour maintenir la jambe non opérée de manière stable et sécurisée lors des interventions. Son articulation permet de dégager le membre du champ opératoire tout en garantissant un positionnement précis et confortable. Compatible avec la jambe droite ou gauche.

1 clameau KYRA4860 recommandé

Référence	Dimensions
KYRA9205	Cap. de poids de patient : 272 kg Poids du porte-jambes : 3,1 kg



ORTEPEE

Réf : KYRA8198 (porte-jambes Allen® et Amatech) - KYRA8149 (porte-jambes KYRA®)

Imperméable et résistante, elle réduit le risque de contamination croisée.

Vendues par pack de 10



ORTEPEE

Réf : CSM2734 (porte-jambes Yellofins®) - CSM2741 (porte-jambes Ultrafins®) - CSM2750 (porte-jambes Amatech)

Souples et confortables, ils sont moulés de manière optimale et confortable pour envelopper la jambe du patient.



ORTEPEE

Protège les porte-jambes tout en facilitant la mobilité en bloc opératoire ou en zone de rangement.

- + Soulage l'équipe soignante
- + Nettoyage facilité
- + Compartiment de rangement pour clameaux
- + Roulettes verrouillables

Références	Dimensions
KYRA1000 Pour KYRA® Classic™, KYRA® Comfort™, KYRA® CLEAN™, KYRA® Blue, KYRA® Junior	Hauteur : 1 035 mm - Largeur base : 550 x 550 mm Poids à vide : 16,1 kg
KYRA1010 Pour KYRA7810, KYRA7305, KYRA7860 et KYRA9205	Hauteur : 1 035 mm - Largeur base : 550 x 550 mm Poids à vide : 16,1 kg



MEDICALSYSTEM

CENTRE DE RÉPARATION EUROPÉEN
AGRÉÉ KYRA® MEDICAL

Nos techniciens formés par KYRA® assurent la maintenance et la réparation de toutes les gammes, selon les procédures du fabricant et avec des pièces d'origine.

Un interlocuteur unique en Europe pour prolonger la durée de vie de vos équipements KYRA®.



ORTHOPÉDIE



ORTEPEE

Conçu pour stabiliser efficacement la cuisse lors des interventions sur le genou, il maintient le membre opéré tout en laissant au chirurgien la liberté nécessaire pour mobiliser et positionner l'articulation pendant la procédure.

Clameau KYRA4860 recommandé

Références	Dimensions
KYRA9200	Jusqu'à 890 mm de circonférence
KYRA8501	Pack de 12 coussins à usage unique

SUPPORTS DE BRAS



ORTEPEE

Support radiotransparent conçu pour maintenir confortablement le membre supérieur tout en préservant l'accès à l'imagerie. Fixation rapide sur le rail

Référence	Dimensions
KYRA2005	660 x 140 mm Capacité de poids de patient : 230 kg

Coussin non inclus



ORTEPEE

Assurent un appui rembourré du membre supérieur. Revêtement lisse et non poreux pour faciliter le nettoyage et la désinfection entre les interventions.

Disponible avec une sangle de sécurité intégrée.

Références	Dimensions
KYRA2009 (simple) KYRA2050 (avec sangle)	Long. 660 mm - Larg. 140 mm Epaisseur : 25 mm
KYRA2010 (simple) KYRA2051 (avec sangle)	Long. 660 mm - Larg. 140 mm Epaisseur : 50 mm
KYRA2015 (simple) KYRA2052 (avec sangle)	Long. 660 mm - Larg. 140 mm Epaisseur : 76 mm



ORTEPEE

Destiné aux situations où le bras doit pouvoir être orienté et repositionné avec davantage de liberté qu'avec un support fixe. Son système pivotant permet d'adapter l'orientation du membre supérieur aux besoins de l'installation et de l'accès chirurgical. Coussin à sangle inclus pour le confort et la protection du bras.

Clameau KYRA4860 recommandé

Références	Dimensions
KYRA2300	Coussin : 406 x 152 mm Larg. tige : 165 mm
KYRA2304	Coussin : 406 x 152 mm Larg. tige : 317 mm




ORTEPEE

Conçu pour optimiser le positionnement des membres supérieurs en décubitus ventral, tout en préservant l'accès du C-arm. Son profil bas limite l'encombrement autour du patient. Coussin à sangle inclus pour le confort et la protection du bras.

Clameau inclus

Référence	Dimensions
KYRA2302	Larg. 406 - Long. 191 Ep. 117 mm

SANGLES

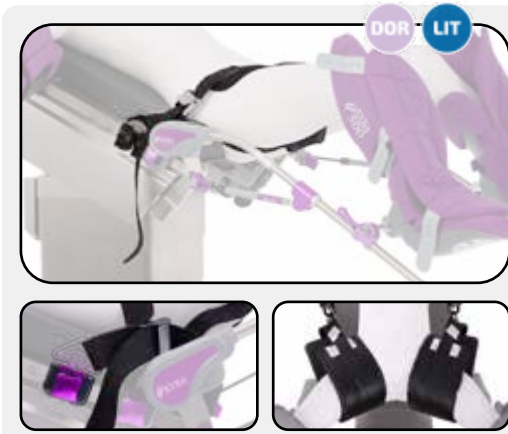

SANGLES DE NISSEN

Conçues pour limiter le glissement du patient lors d'un positionnement en Trendelenburg inversé prononcé. Elles se fixent sur les rails latéraux de la table afin d'assurer un maintien complémentaire du patient pendant l'inclinaison.

Références	Dimensions
KYRA2603	Long. 2 430 - Larg. 127 - Haut. 12 mm Capacité de poids du patient : 227 kg <i>2 clameaux KYRA4200 recommandés</i>
KYRA2602	Long. 2 430 - Larg. 127 - Haut. 12 mm Capacité de poids du patient : 363 kg <i>4 clameaux KYRA4200 recommandés</i>



SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE

Conçue pour maintenir le torse ou les membres inférieurs du patient sur la table d'opération. Son rembourrage en gel améliore le confort au niveau de la zone de contact, tandis que les sangles réglables permettent de l'adapter au positionnement. Conception sans Velcro®.

Référence	Dimensions
KYRA2601	Ajustables de 450 à 1140 mm Coussin de rembourrage : 130 x 127 x 460 mm

STABILISATION COMPLÉMENTAIRE




PAIRE DE SUPPORTS D'ÉPAULE SECONDAIRES

Conçue pour apporter un maintien complémentaire sans contact direct avec les épaules lors des positions de Trendelenburg prononcé. Leur réglage pivotant permet d'adapter précisément leur position à la morphologie du patient.

Vendu par paire - Coussin inclus
2 clameaux KYRA4860 recommandés

Référence	Dimensions
KYRA2340	Long. 230 - Larg. 180 Haut. 350 mm

POSITIONNEMENT LATÉRAL

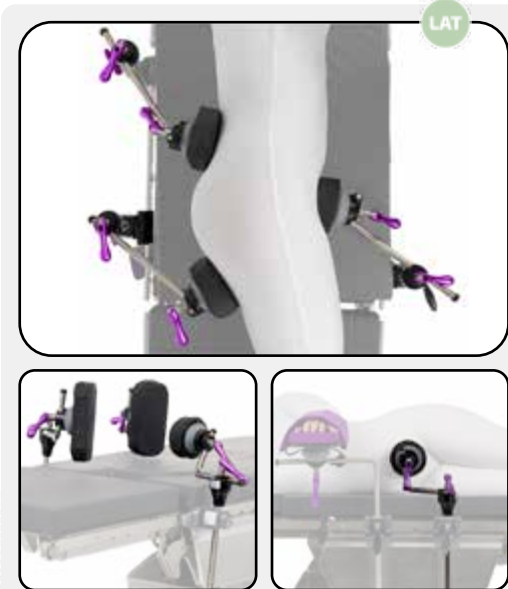

KIT DE POSITIONNEURS LATÉRAUX

Conçu pour assurer un maintien stable et personnalisable du patient en position latérale. Ses trois appuis indépendants peuvent être orientés et verrouillés afin d'épouser la morphologie du patient.

- + Appuis localisés et réglables individuellement
- + Liberté d'accès au champ opératoire
- + Assure une stabilité du patient
- + Couvre une large diversité de morphologies

2 positionneurs rectangulaires et 1 positionneur circulaire inclus

Références	Dimensions
KYRA9100K - Pack complet	
KYRA9120 <i>Positionneur rectangulaire</i>	Long. 200 - Larg. 100 mm
KYRA9110 <i>Positionneur circulaire</i>	Ø 100 mm

CLAMEAUX



CLAMEAU AUTOCLAVABLE KYRA® SECURE-RELEASE™

Réf : KYRA4200

- Insert à lame
- Accroche au rail facile et rapide
- Empêche les faux engagements de rail
- Libération du clameau par gâchette, pour un maximum de sécurité
- Poids maximum supporté : 363 kg



CLAMEAU À FIXATION RAPIDE

Réf : KYRA4660

- Accroche au rail facile et rapide
- Se fixe n'importe où sur le rail
- Conçu pour les accessoires à lame plate 25 x 6 mm
- Poids maximum supporté : 363 kg



CLAMEAU SIMPLE

Réf : KYRA4710

- Solide et léger
- Se fixe aux extrémités du rail ou au niveau des encoches
- Conçu pour les accessoires à lame plate 25 x 6 mm
- Poids maximum supporté : 363 kg




CLAMEAU À MÉCANISME DE SERRAGE RAPIDE

Réf : KYRA4860

- Conçu pour fixer des accessoires tubulaires à rails ronds standards (ø < 18 mm)
- Installation rapide grâce au bouton de verrouillage central
- Entretien simple et sans compromis sur la robustesse
- Se fixe n'importe où sur le rail
- Poids maximum supporté : 363 kg

	KYRA4200	KYRA4660	KYRA4710	KYRA4860
Type d'accessoire	Lame plate	Lame plate	Lame plate	Tige ronde
Dimensions	25 x 6 mm	25 x 6 mm	25 x 6 mm	Ø ≤ 18 mm
Insertion n'importe où sur le rail	Oui	Oui	Non	Oui
Fixation rapide	++	++	+	++
Sécurisation	+++	++	+	+++
Manipulations fréquentes	Excellent	Excellent	Standard	Excellent
Atout principal	Sécurité	Rapidité	Simplicité	Tiges rondes
Charge maximale indiquée	363 kg	363 kg	363 kg	363 kg

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

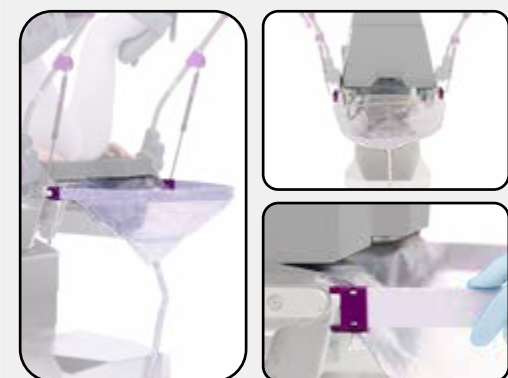

SYSTÈME DE DRAINAGE KYRA® CLEAN™ CATCHER

Système à usage unique conçu pour collecter et évacuer efficacement les fluides lors des procédures en lithotomie. Sa conception stable limite l'affaissement de la poche et permet une installation sur la table.

Références	Dimensions
KYRA8451	Pack de 10 systèmes non stériles Capacité maximale : 8 L
KYRA8452	Pack de 10 systèmes stériles Capacité maximale : 8 L



Option : SUPPORT DE FIXATION AUX PORTE-JAMBES

Permettent de fixer directement le CLEAN™ CATCHER aux porte-jambes, pour une installation compacte et rapide. Disponibles en plusieurs versions pour s'adapter aux différents modèles de porte-jambes KYRA®.

Références	Dimensions
KYRA8460	Selon le modèle du porte-jambe. Rapprochez-vous de votre commercial pour plus d'informations.
KYRA8461	
KYRA8462	



ANNEAU DE SOUTIEN POUR POCHE DE DRAINAGE

Conçu pour supporter les poches de drainage urologique au niveau de l'extrémité de la table. Flexible, il crée un support pour positionner la poche de récupération sous la zone opératoire.

A utiliser en combinaison avec les poches KYRA8410 ou KYRA8411

Référence	Dimensions
KYRA8400	Larg. 462 - Long. 317 Ep. 160 mm



SACS DE DRAINAGE UROLOGIQUE

Conçus pour récupérer les liquides chirurgicaux. Le large bassin de collecte et le rabat intégré sous les fesses du patient permettent de guider les fluides vers la poche.

A utiliser en combinaison avec l'anneau KYRA8400

Références	Dimensions
KYRA8410	Pack de 10 sacs non stériles
KYRA8411	Pack de 10 sacs stériles



BAC DE GYNÉCOLOGIE 6L

Bac rond en acier inoxydable, facile à déplacer grâce au mécanisme de pivot. Amovible pour faciliter le nettoyage.


Clameau CL1010 inclus

Référence	Dimensions
OA4110	Ø 315 mm



Les 4 objectifs d'une bonne installation :

- + Libérer l'abdomen : les appuis doivent soutenir le thorax et le bassin sans comprimer excessivement l'abdomen
- + Préserver la ventilation : le positionnement du thorax doit permettre son expansion
- + Maîtriser l'alignement du rachis : la position du bassin, des hanches et des appuis influence la courbure rachidienne
- + Créer une plateforme stable : le patient doit rester correctement soutenu pendant l'intervention

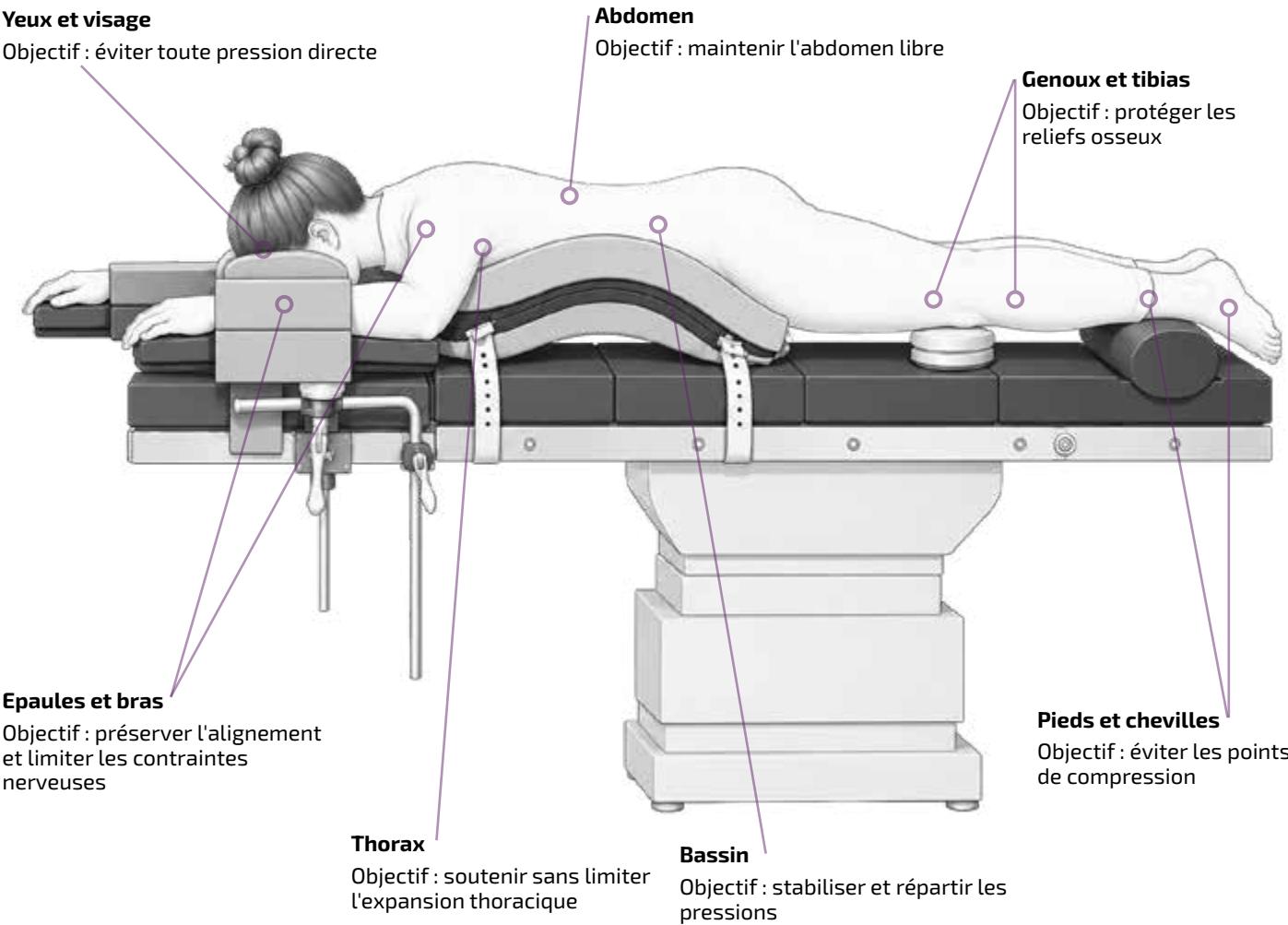

Comment choisir son support ?

KYRA® CURVE™

Pour qui ?

- + Chirurgie du rachis
- + Procédures thoraciques et lombaires
- + Blocs cherchant une solution dédiée et simple

Pourquoi ?

- + Courbure ajustable
- + Abdomen dégagé
- + Installation sur table existante

KYRA® CONNECT™ SPINE

Pour qui ?

- + Activité rachis régulière ou spécialisée
- + Imagerie peropératoire C-arm / O-arm
- + Blocs recherchant une plateforme évolutive

Pourquoi ?

- + Modularité
- + Multi-positionnement
- + Accès optimisé à l'imagerie




Cadre de positionnement conçu pour les chirurgies du rachis. Fournit une plateforme stable et modulable permettant d'obtenir une lordose contrôlée du patient afin d'optimiser l'accès chirurgical à la colonne vertébrale.

- + Lordose réglable pendant l'intervention
- + Distribution homogène des pressions et libération abdominale
- + Compatible avec l'imagerie peropératoire
- + Plateforme adaptable à différentes morphologies
- + Sangles en silicone pour une meilleure hygiène



Applications recommandées
Chirurgies postérieures thoraciques et lombaires nécessitant une exposition et un contrôle adapté de la courbure rachidienne

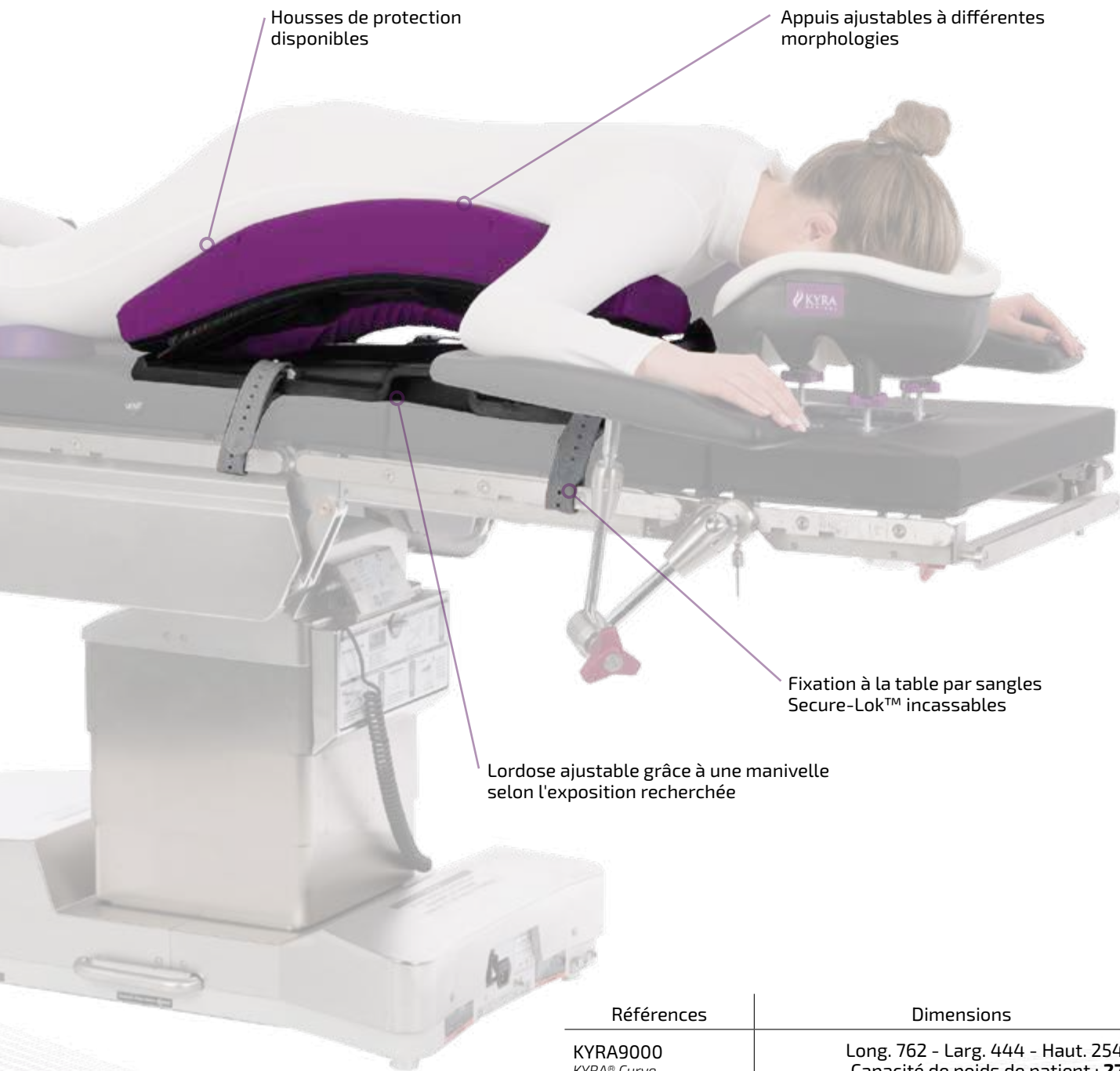

Housses de protection disponibles

Appuis ajustables à différentes morphologies


Fixation à la table par sangles Secure-Lok™ incassables

Lordose ajustable grâce à une manivelle selon l'exposition recherchée

Références	Dimensions
KYRA9000 KYRA® Curve	Long. 762 - Larg. 444 - Haut. 254 mm Capacité de poids de patient : 272 kg
KYRA9005 KYRA® Mini Curve	Long. 610 - Larg. 510 - Haut. 197 mm Capacité de poids de patient : 227 kg

Adapter le positionnement du patient

Réglage latéral pour adapter les appuis à la morphologie du patient et favoriser le dégagement abdominal

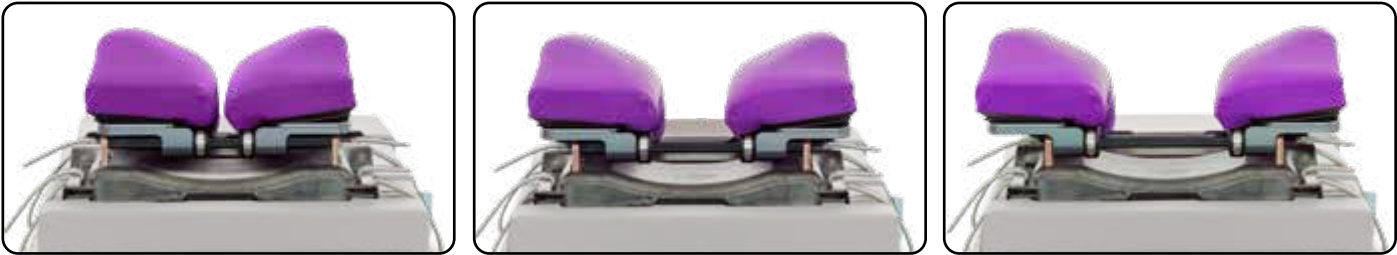

Réglage de la courbure rachidienne par manivelle pour adapter l'exposition chirurgicale



ACCESSOIRES



KIT KYRA® CURVE™
Ref : KYRA9000K (Kyra® Curve™) ou KYRA9005K (Kyra® Mini-Curve™)

Le kit KYRA® CURVE™ fournit un ensemble de matériel idéal pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

1x cadre dorsal
KYRA9000 (Curve™) OU
KYRA9005 (Mini-Curve™)

1x poignée
rotative
KYRA9010

1x chariot de transport
KYRA1100 (Curve™)
KYRA1110 (Mini-Curve™)

2x connecteurs
Secure-Lok™
KYRA9030



CHARIOT DE TRANSPORT

Permet de déplacer facilement le cadre entre les salles tout en limitant les manipulations et les risques de détérioration.


Références	Dimensions
KYRA1100 Pour Kyra® Curve™	Hauteur : 1 035 mm Larg. base : 560 x 560 mm
KYRA1110 Pour Kyra® Mini-Curve™	Hauteur : 1 035 mm Larg. base : 560 x 560 mm



PACK DE HOUSSES STANDARDS À USAGE UNIQUE

Ensemble de protections à usage unique destiné à recouvrir les coussins et appuis du KYRA® Curve™ pendant l'intervention.

Référence	Dimensions
KYRA9021 Pour Kyra® Curve™	• 6 paires de housses standards pour cadre • 6 supports de tête en mousse • 6 paires de supports de bras

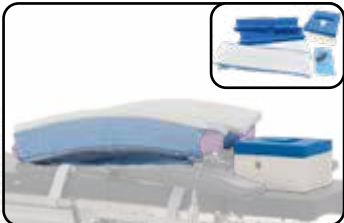

PACK DE HOUSSES CONFORT À USAGE UNIQUE

Housses rembourrées conçues pour offrir une protection supplémentaire au niveau des appuis thoraciques et pelviens du KYRA® Curve™ et KYRA® mini-Curve™.

Références	Dimensions
KYRA9020 Pour Kyra® Curve™	• 6 paires de housses confort pour cadre • 6 supports de tête en mousse
KYRA9020S Pour Kyra® mini-Curve™	• 6 paires de supports de bras en mousse



Se connecte à la table d'opération existante pour la transformer en plateforme modulaire dédiée à la chirurgie du rachis, compatible avec différentes configurations en décubitus ventral, dorsal ou latéral. Une fois l'intervention terminée, le Connect™ est retiré et la table retrouve son utilisation habituelle.

Pourquoi utiliser un cadre d'extension rachidienne ?

Conserver votre table d'opération :
ajoute à vos équipements les fonctionnalités d'une plateforme rachis spécialisée, et peut être retiré après l'intervention

Adapter la plateforme à l'intervention :
peut recevoir différentes configurations de support pour répondre aux besoins du positionnement ventral, dorsal ou latéral

Faciliter l'accès à l'imagerie :
la configuration du système préserve l'accès nécessaire à l'utilisation du C-arm et de l'O-arm

Faire évoluer les installations :
la logique modulaire permet d'ajouter les supports et accessoires nécessaires en fonction des procédures et de l'évolution de l'activité du bloc



Référence	Dimensions
KYRA9500	En utilisation : Long. 1765 - Larg. 622 - Haut. 889 mm
	Rangé : Long. 739 - Larg. 622 - Haut. 1575 mm
	Capacité de poids de patient : 272 kg Livré avec 2 clameaux de connexion à la table KYRA9512 et 1 câble d'alimentation KYRA9541



Comment utiliser le Connect™ Spine ?

Se connecter au rail de la table
Le Connect™ Spine est relié à la table existante via deux clameaux dédiés.

Une articulation brevetée à 5 axes
Accompagner les mouvements de la table et préserver sa mobilité lorsque le Connect™ Spine est installé.

Ajuster la hauteur
La colonne motorisée supporte le double rail et permet d'en ajuster électriquement la hauteur.

Configurer le positionnement
Permet d'installer différents supports selon le positionnement et l'intervention.

Fonctionne sur batterie
La batterie intégrée alimente le système motorisé sans nécessiter de câble d'alimentation pendant son utilisation.

De la table standard à la plateforme du rachis



Construisez la configuration adaptée à votre intervention

Ventral
Curve™

- Pour qui ?
- + Chirurgie thoraco-lombaire
 - + Lordose à ajuster
 - + Imagerie peropératoire
- Pourquoi ?
- + Courbure ajustable
 - + Abdomen dégagé
 - + Radiotransparence



Ventral
Supports thoraciques

- Pour qui ?
- + Chirurgie du rachis en décubitus ventral
 - + Besoin d'appuis modulables
- Pourquoi ?
- + Appuis indépendants
 - + Abdomen dégagé
 - + Réglages personnalisables



Dorsal - Latéral
Supports plats

- Pour qui ?
- + Chirurgie en décubitus dorsal
 - + Chirurgie en décubitus latéral
 - + Besoin d'une surface plane
- Pourquoi ?
- + Plateforme stable
 - + Configuration modulable
 - + Accès à l'imagerie peropératoire




en combinaison avec les **SUPPORTS THORACIQUES**
soutien thoracique et stabilité ventrale

Conçu pour offrir un soutien thoracique optimal, une libération efficace de l'abdomen et une répartition homogène des pressions, tout en conservant la flexibilité de réglage et la mobilité propres au système Connect.

- + Appuis réglables indépendamment
- + Adaptation aux différentes morphologies
- + Répartition des pressions
- + Ajustements rapides

Références	Descriptions
KYRA9052K <i>Kit complet</i>	1 support thoracique KYRA9051 1 support de hanche KYA9052 2 supports de cuisse KYRA9054 (gauche) et KYRA9055 (droite)
KYRA9053K <i>Kit complet</i>	1 support thoracique KYRA9051 1 support de hanche KYA9053 2 supports de cuisse KYRA9054 (gauche) et KYRA9055 (droite)
KYRA9063	Housses à usage unique pour KYRA9052K Livrées par pack de 6 kits
KYRA9064	Housses à usage unique pour KYRA9053K Livrées par pack de 6 kits

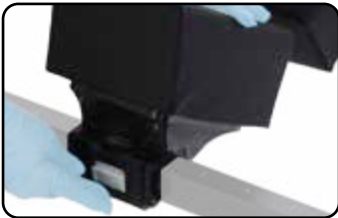

en combinaison avec **KYRA® CURVE™**
lordose contrôlée et ajustable

Destiné aux procédures postérieures nécessitant un positionnement ventral avec ajustement de la courbure du rachis.

- + Lordose ajustable
- + Abdomen dégagé
- + Radiotransparent
- + Accès à l'imagerie

Références	Dimensions
KYRA9000 <i>KYRA® Curve</i>	Long. 762 - Larg. 444 Haut. 254 mm
KYRA9005 <i>KYRA® Mini Curve</i>	Long. 610 - Larg. 510 Haut. 197 mm



en combinaison avec des **SUPPORTS PLATS AVEC MATELAS**
pour créer une plateforme plane


Constitue une solution avancée de positionnement en décubitus dorsal ou latéral, en créant une surface de support patient modulaire.

- + Plateforme plane
- + Positionnement dorsal ou latéral
- + Accès imagerie peropératoire
- + Un même système pour plusieurs approches

Références	Dimensions
KYRA9056 <i>A l'unité</i>	Long. 305 - Larg. 483 Haut. 102 mm
KYRA9056K <i>Kit de 4 matelas</i>	Long. 305 - Larg. 483 Haut. 102 mm




ACCESSOIRES

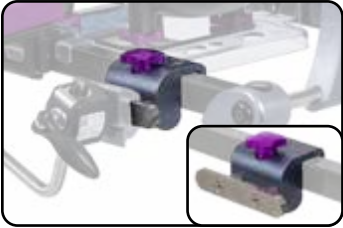


RAIL DE FIXATION CONNECT™ SPINE

- Réf : KYRA9027
- Insert à lame
 - Solide et léger
 - Longueur rail : 150 mm

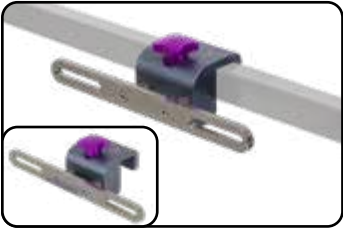

RAIL ALLONGÉ DE FIXATION CONNECT™ SPINE

- Réf : KYRA9028
- Insert à lame
 - Solide et léger
 - Longueur rail : 300 mm

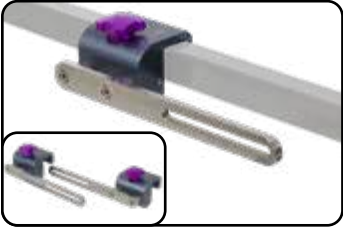

RAIL DE FIXATION DÉPORTÉ CONNECT™ SPINE

Réf : KYRA9031 (gauche) - KYRA9032 (droite)

Permet de fixer les accessoires standards de table à distance du double rail, pour optimiser l'espace disponible autour du patient et faciliter leur installation.

SUPPORTS DE TÊTE

Les supports de tête peuvent être utilisés à la fois sur une table d'opération et sur le cadre d'extension rachidienne, en combinaison avec la plaque transparente KYRA9050.



SYSTÈME DE PLAQUE DE SUPPORT DE TÊTE ET MIROIR

La plaque transparente reçoit le dispositif de soutien de tête choisi, tandis que le miroir pivotant permet à l'équipe de surveiller le visage, les yeux et les voies aériennes pendant l'intervention.

Références	Dimensions
KYRA9050K - kit composé de :	
KYRA9050 <i>Plaque</i>	Long. 483 - Larg. 320 Haut. 64 mm
KYRA9067 <i>Miroir pivotant</i>	Long. 178 - Larg. 150 mm



BLOC DE TÊTE EN MOUSSE À USAGE UNIQUE

Constitué de deux couches de mousse, il assure un maintien fiable de la tête et du cou. Fentes d'intubation à droite et à gauche.

Livré par pack de 6 unités

Référence	Dimensions
KYRA9022	Long. 254 - Larg. 291 Haut. 152 mm



KIT COMPLET DE SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE CS PRONE

Conçu pour optimiser la redistribution de la pression durant les interventions afin d'éviter tout risque d'incidents.

- + Maintient un axe cervical neutre grâce à la hauteur réglable
- + Répartit les pressions sur le front et les joues
- + Ouverture au menton permettant la rotation du patient sans retirer le tube d'intubation
- + Sécurise l'accès anesthésique pendant toute la durée opératoire



SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE AVEC OUVERTURE AU MENTON KYRA9072K



Kit à utiliser avec COUSSIN À USAGE UNIQUE KYRA9081

SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE SANS OUVERTURE AU MENTON KYRA9071K



Kit à utiliser avec COUSSIN À USAGE UNIQUE KYRA9080 ou KYRA9083 (pédiatrique)

Références	Dimensions
KYRA9072K - kit avec ouverture au menton	
KYRA9072 - Casque	Long. 292 - Larg. 324 - Haut. 152 mm
KYRA9070 - Miroir ajustable	Long. 216 - Larg. 216 - Haut. 57 mm
KYRA9071K - kit sans ouverture au menton	
KYRA9071 - Casque	Long. 292 - Larg. 241 - Haut. 152 mm
KYRA9070 - Miroir ajustable	Long. 216 - Larg. 216 - Haut. 57 mm
Coussins à usage unique	
KYRA9081	Pour KYRA9072K - Livré par pack de 10 unités
KYRA9080	Pour KYRA9071K - Livré par pack de 10 unités
KYRA9083 	Pour KYRA9071K - Livré par pack de 10 unités

PORTE-JAMBES SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LA CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Une **solution unique** dédiée aux patients de la naissance à 1,40 m



Adaptés à la morphologie pédiatrique




Repositionnement peropératoire facilité



Protection des tissus et des nerfs



Installation sécurisée et reproductible

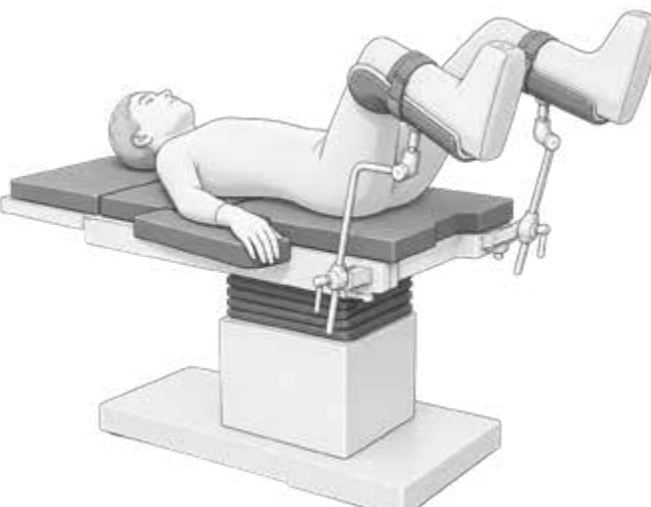

Pourquoi utiliser un dispositif spécifiquement pédiatrique ?

- + Bassin plus étroit
- + Membres inférieurs plus courts
- + Articulations en développement
- + Structures nerveuses plus vulnérables aux compressions
- + Tissus plus sensibles aux points de pression

produit pédiatrique  produit préféré du bloc 



SUPPORTS DE JAMBE PÉDIATRIQUE

Conçus spécifiquement pour l'anatomie pédiatrique, les PediStirrup® assurent un maintien précis des membres inférieurs, facilitent les ajustements per-opératoires et contribuent à limiter les pressions localisées et les contraintes articulaires.

- + 100 % pédiatrique
- + 5 tailles codées par couleur : de la naissance à 1m40
- + Maintien homogène
- + Montage rapide
- + Repositionnement sécurisé
- + Alignement précis par laser

Références	Informations
1111247	Supports de jambes pédiatrique gauche et droit Comprend les tailles 1, 2, 3, 4 et 5 Deux clameaux 25 x 10 mm inclus
1141000	Chariot de stockage et de transport


LE MAINTIEN IDÉAL EN DÉCUBITUS LATÉRAL





Le principe de la fixation en 3 points :

Le bassin est maintenu selon un principe de trépied : trois appuis positionnés sur des zones osseuses stabilisent le patient et limitent les mouvements de rotation ou de basculement pendant l'intervention.

- + Le bassin reste aligné pendant toute l'intervention
- + Les repères anatomiques sont conservés
- + L'abdomen reste libre
- + Le patient reste stable durant toute la durée de l'intervention

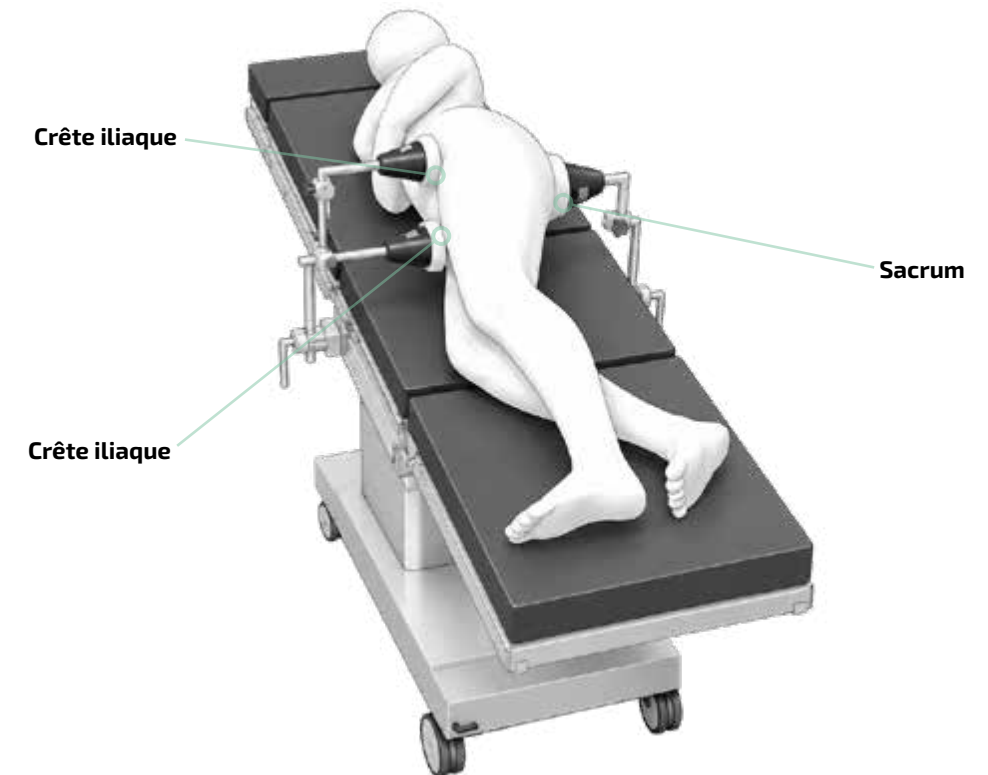

produit préféré du bloc 

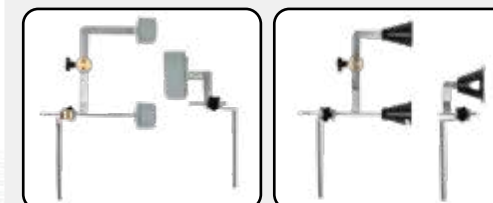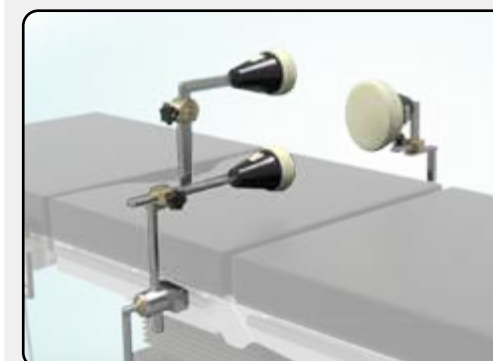

HIP FIX 2000-182

HIP FIX 2015-100

HIP FIX®

Système de maintien conçu pour assurer un positionnement latéral stable, précis et reproductible lors des interventions de chirurgie de la hanche.

Son principe de fixation en trois points immobilise efficacement le bassin tout en préservant l'abdomen de toute compression.

- + Stabilisation fiable du bassin
- + Positionnement reproductible
- + Accès optimal au champ opératoire
- + Adaptation aux différentes morphologies
- + Installation simple sur table d'opération

Références	Informations
HIP FIX 2000-182	Coussins fixes en mousse intégrés aux supports
HIP FIX 2015-100	Support à compléter avec des coussins à usage unique
HIP FIX 2015-50	3 coussins à usage unique pour HIP FIX 2015-100 Livrés par pack de 25 kits

2 clameaux 10-305 recommandés



L'EXPERTISE DU POSITIONNEMENT EN DÉCUBITUS VENTRAL

Care Surgical conçoit des solutions de positionnement dédiées au décubitus ventral, développées en collaboration avec les équipes chirurgicales. Compatibles avec la majorité des tables d'opération, elles assurent une installation stable, reproductible et sécurisée.



Conçu avec les équipes chirurgicales



Protection des zones anatomiques



Installation rapide et reproductible



Hygiène maîtrisée



Pourquoi le décubitus ventral nécessite-t-il une attention particulière ?

- + Protéger les structures oculaires et les voies aériennes
- + Limiter les compressions thoraciques et abdominales
- + Protéger les reliefs osseux et les structures nerveuses
- + Optimiser la ventilation
- + Améliorer la stabilité du patient tout au long de l'intervention

INSTALLER UN PATIENT EN DÉCUBITUS VENTRAL



Les 5 vérifications avant incision :

- + Absence de pression sur les yeux
- + Abdomen libre de toute compression
- + Membres supérieurs correctement alignés
- + Aucun point d'appui excessif sur les reliefs osseux
- + Tous les dispositifs de positionnement correctement verrouillés

Tête et visage

Objectif : préserver les yeux, le front et les pommettes

Bras et épaules

Objectif : limiter les tensions du plexus brachial et maintenir les membres supérieurs dans une position sécurisée

Abdomen

Objectif : favoriser une décompression abdominale afin de réduire la pression veineuse

Thorax


Objectif : répartir les pressions tout en maintenant une ventilation efficace

Genoux

Objectif : protéger les rotules et répartir les points de pression

Tibias et pieds

Objectif : prévenir les compressions prolongées et limiter le risque de lésions nerveuses

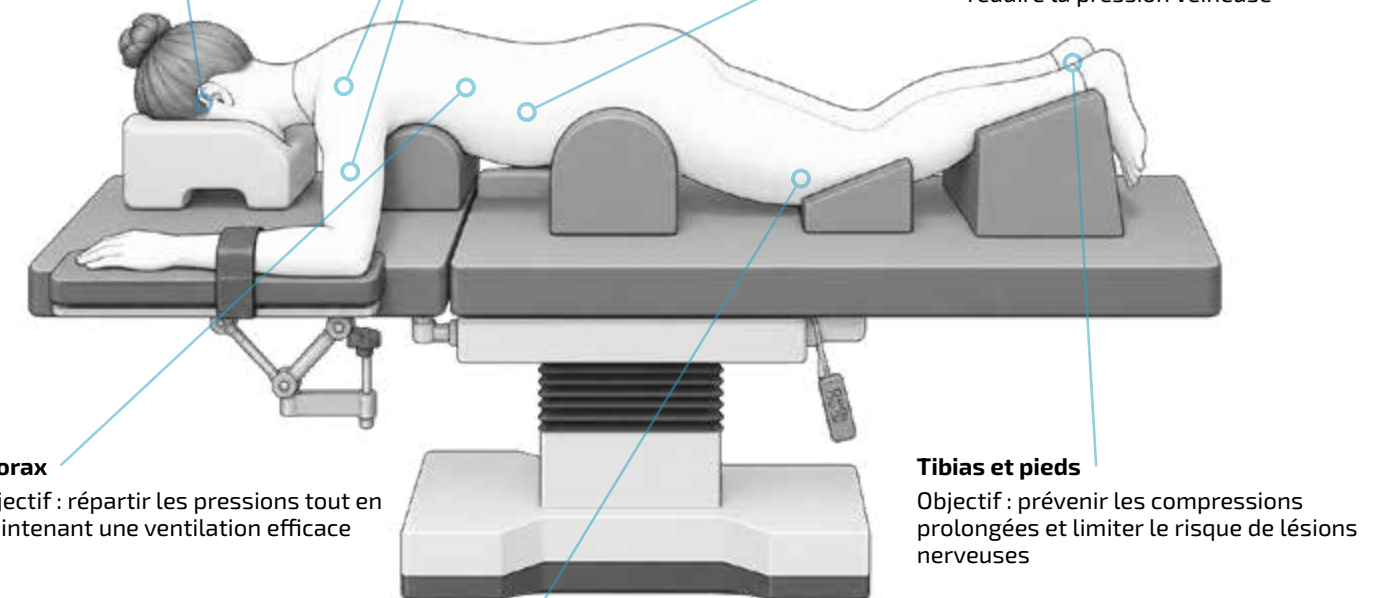

Comment choisir son support ?

Positionneur polyvalent CS Tony Prone™

Pour qui ?

- + Douleur chronique / radiologie interventionnelle
- + Chirurgie générale et dermatologie

Pourquoi ?

- + Solution simple et polyvalente
- + Abdomen dégagé
- + Léger et facile à manipuler
- + Radiotransparent



Positionneur ajustable CS Easy Prone™

Pour qui ?

- + Morphologies variées
- + Besoin d'un positionnement personnalisé

Pourquoi ?

- + Appuis thoracique et bassin indépendants
- + Abdomen totalement dégagé
- + 3 hauteurs disponibles
- + Radiotransparent



Cadre rachis CS Spine Frame™

Pour qui ?

- + Chirurgie du rachis
- + Interventions nécessitant imagerie
- + Besoin d'un abdomen totalement libre

Pourquoi ?

- + Appuis thoracique et bassin réglables
- + Entièrement radiotransparent
- + Compatible avec les tables opératoires standard



CS TONY PRONE


Conçu pour installer confortablement et en toute sécurité le patient en décubitus ventral, qu'il soit conscient ou sous anesthésie. Sa conception monobloc permet une mise en place rapide tout en offrant un soutien du thorax et du bassin.

- + Support monobloc, installation simplifiée
- + Positionnement stable
- + Excellente décompression abdominale
- + Radiotransparent



- Indications cliniques :
- Procédures courtes à modérées
 - Chirurgie fonctionnelle, douleur, actes ciblés
 - Patient sans facteur de risque particulier

Référence	Dimensions
CSM2906	Larg. 450 - Long. 720 - Haut. 200 mm

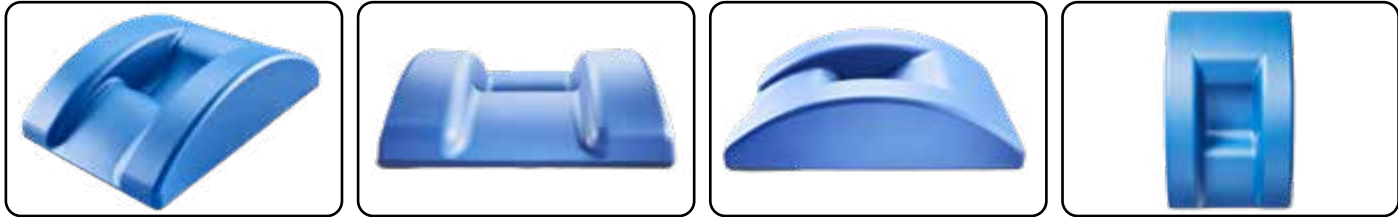

CS EASY PRONE

Système en deux éléments indépendants, conçu pour soutenir séparément le thorax et le bassin lors des interventions en décubitus ventral. Cette conception permet d'adapter précisément l'écartement et la hauteur des appuis à la morphologie du patient


- + Coussins indépendants : positionnement personnalisable
- + S'adapte à de nombreuses morphologies
- + Bonne décompression abdominale
- + Radiotransparent



- Indications cliniques :
- Procédures courtes à modérées
 - Chirurgie générale

Références	Dimensions
CSM2699	Larg. 500 - Long. 250 - Haut. 150 mm
CSM2918	Larg. 500 - Long. 270 - Haut. 170 mm
CSM2919	Larg. 500 - Long. 290 - Haut. 200 mm

Coussins vendus par set de 2 - Housses à usage unique disponibles page 28

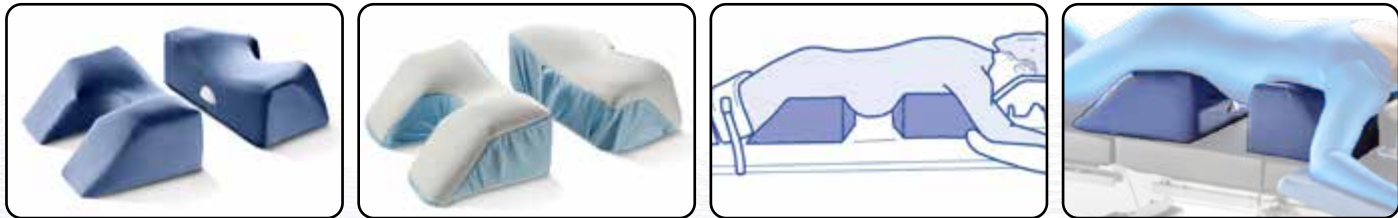

CADRE ABDOMINAL

Transformer une table standard en configuration rachis


Transforme une table standard en plateau de type table rachidienne spécialisée. Assure un soutien stable du thorax et du bassin tout en maintenant l'abdomen libre de toute compression.

- + Configuration dédiée à la chirurgie du rachis, sans changer de table opératoire
- + Abdomen totalement libre
- + S'adapte à de nombreuses morphologies
- + Radiotransparent



- Indications cliniques :
- Procédures longues > 2 heures
 - Chirurgie rachidienne longue et complexe
 - Patient à risque : IMC élevé, comorbidités respiratoires

Référence	Dimensions
CSM2715	Long. 650 - Larg. 510 - Haut. 210 mm Cap. de poids de patient : 250 kg

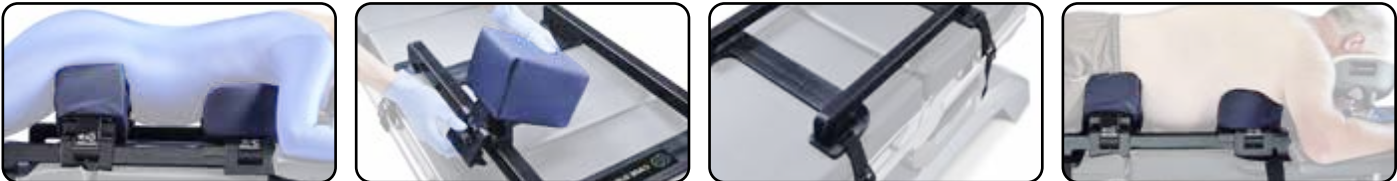


- Décompression abdominale optimisée
- Supports ajustables selon la taille et la stature du patient
- Compatibilité universelle
- Capacité de poids de patient élevée

ACCESSOIRES INCLUS :



- Support de poitrine
Réf : CSM2709
- Support de hanche
Réf : CSM2717
Version bariatrique disponible
- Cadre pour accessoires
Réf : CSM2712
- 4 sangles de cadre
Réf : CSM2712-4
- Housse CS Comfort
Réf : CSM2606-1 (6 unités)

Complétez votre installation

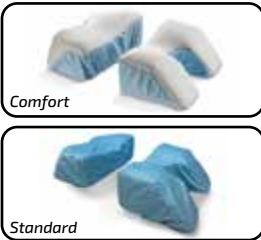

HOUSSES À USAGE UNIQUE POUR CS EASY PRONE

- + Barrière de protection entre le patient et le positionneur
- + Facilitent l'hygiène et limitent les contaminations
- + Protègent les supports contre l'usure et la détérioration
- + Version "Comfort" avec mousse pour plus de confort et de protection des zones d'appui



HOUSSES À USAGE UNIQUE POUR CADRE ABDOMINAL

- + Surface en mousse souple
- + Absorbe l'humidité
- + Prolonge la durée de vie des supports
- + Réduit le risque de blessure par cisaillement

Livrées compactées sous vide par pack de 6 kits

Références	Dimensions
CSM2926	Housses comforts livrées par pack de 6 kits
CSM2929	Housses standards livrées par pack de 6 kits

Référence	Dimensions
CSM2606-1	Support de poitrine : Long. 480 - Larg. 275 - Haut. 10 mm Support de hanches : Long. 207 - Larg. 162 - Haut. 10 mm



VEN

SUPPORTS THORACIQUES POUR DÉCUBITUS VENTRAL

Assurent une répartition homogène des pressions et une excellente stabilité du patient en décubitus ventral. Leur conception favorise la décompression abdominale tout en améliorant le confort lors des interventions prolongées.

Références	Dimensions
CSM2716 - Pack complet :	
CSM2709 Support thoracique	Long. 480 - Larg. 208 - Haut. 175 mm
CSM2717 Paire de supports de hanches	Long. 230 - Larg. 136 - Haut. 242 mm
CSM2718 Paire de supports de cuisses	Long. 232 - Larg. 158 - Haut. 240 mm
Variantes	
CSM2723 Paire de supports de hanches	Long. 240 - Larg. 136 - Haut. 220 mm
CSM2719 Paire de supports de hanches	Long. 200 - Larg. 136 - Haut. 265 mm


Capacité de poids de patient : 250 kg



Paire de supports de cuisse - CSM2718



Paire de supports de hanche - CSM2717

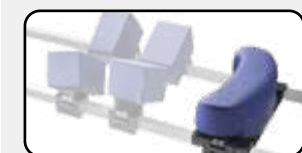

Support thoracique - CSM2709



Housses à usage unique Comfort - CSM2600



HOUSSES À USAGE UNIQUE SUPPORTS THORACIQUES

Améliorent la protection des zones d'appui en décubitus ventral. Leur mousse souple favorise la répartition des pressions, absorbe l'humidité et limite le cisaillement, tout en protégeant les supports.

Livrées compactées sous vide par pack de 6 kits

Références	Dimensions
CSM2600	Pour ensemble CSM2716
CSM2603	Pour ensemble CSM2709, CSM2717 et CSM2719



VEN

SET DE SUPPORTS DE JACKSON® ET ALLEN®

Composé de supports thoraciques et bassin en mousse multicouche, le set assure une installation stable, confortable et compatible avec les principaux systèmes de chirurgie du rachis.

Références	Dimensions
CSM2735 - Pack complet :	
CSM2725 Support de poitrine	Long. 430 - Larg. 155 Ep. 150 mm
CSM2727 Support de hanches	Long. 230 - Larg. 136 Ep. 242 mm
CSM2729 Support de cuisses	Long. 232 - Larg. 158 Ep. 240 mm




SET DE HOUSSES À USAGE UNIQUE POUR SUPPORTS DE JACKSON® ET ALLEN®

Comprend une housse rembourrée pour l'appui thoracique et quatre housses pour les appuis des hanches et des cuisses. Leur doublure imperméable contribue à protéger les coussins de la table contre les contaminations et l'usure.

Livrés compactés sous vide par pack de 6 kits

Référence	Dimensions
CSM2602	Pour ensemble CSM2735

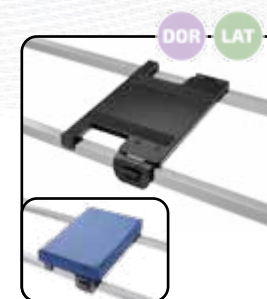

BASE CS SUPINE TOP

Compatible avec les tables Allen® et Jackson®, elle constitue une base polyvalente pour le positionnement du patient en décubitus dorsal ou ventral. Coussin en mousse haute résilience destiné à la gestion des points de pression.


Références	Dimensions
CSM2722-7 Base	Long. 500 - Larg. 305- Ep. 75 mm
CSM2722-2 Coussin	Long. 460 - Larg. 305 Ep. 60 mm
CSM2722-3 Coussin épais	Long. 460 - Larg. 305 Ep. 85 mm



SUPPORT DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE "WINGSET"

Assure le maintien du thorax et du bassin tout en garantissant un excellent alignement du patient. Grâce à ses éléments réglables, il s'adapte facilement aux différentes morphologies et aux exigences de nombreuses procédures chirurgicales.

Référence	Dimensions
CSM2781	Long. 416 - Larg. 200 Ep. 265 mm

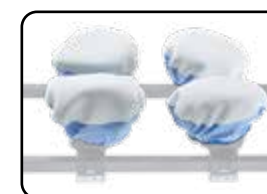

HOUSSES À USAGE UNIQUE POUR ALLEN® WINGSET

Conçues en mousse souple pour mieux répartir les pressions. Elles absorbent l'humidité, limitent le cisaillement et protègent les supports.

Livrées compactées sous vide par pack de 5 kits


Référence	Dimensions
CSM2605	Long. 234,5 - Larg. 165 Haut. 10 mm

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA TÊTE




Les 3 points de contrôle en décubitus ventral :

- + Alignement : tête, nuque et rachis cervical dans une position neutre
- + Décompression : absence d'appui sur les yeux, le nez et les oreilles
- + Stabilité : maintien sécurisé de la tête sans point de pression excessif

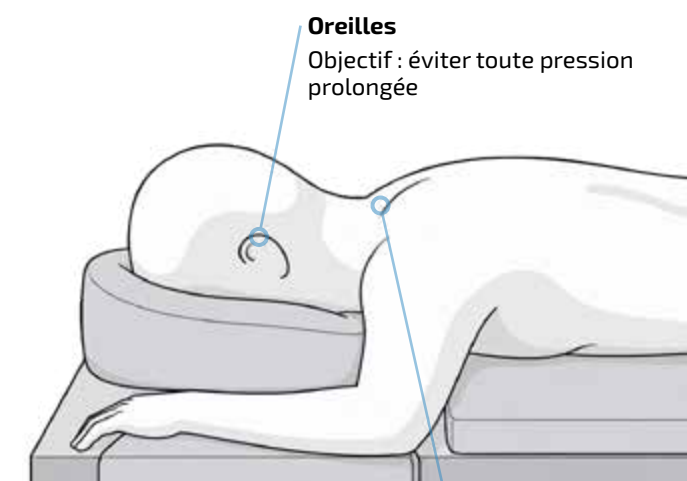

Oreilles
Objectif : éviter toute pression prolongée

Nuque et rachis cervical
Objectif : maintenir un alignement cervical neutre

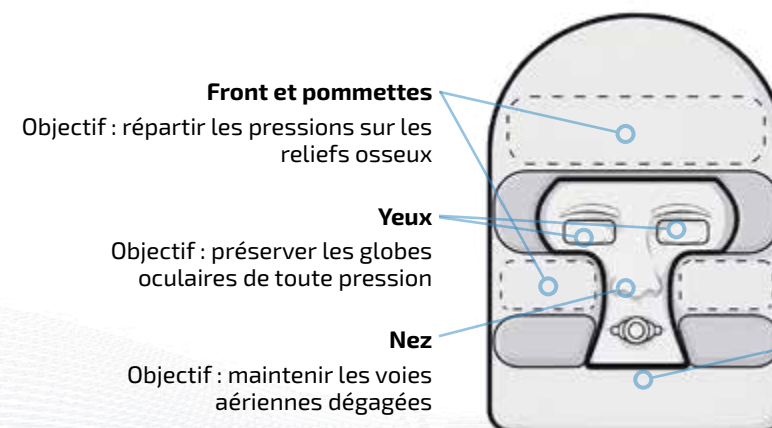

Front et pommettes
Objectif : répartir les pressions sur les reliefs osseux

Yeux
Objectif : préserver les globes oculaires de toute pression

Nez
Objectif : maintenir les voies aériennes dégagées

Menton
Objectif : éviter tout point d'appui excessif



VEN

KIT COMPLET DE SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE CS PRONE

Conçu pour optimiser la redistribution des pressions et contribuer à réduire les risques liés au positionnement.

- + Maintient un axe cervical neutre grâce à la hauteur réglable
- + Répartit les pressions sur le front et les joues
- + Ouverture au menton permettant la rotation du patient sans retirer le tube d'intubation
- + Absorbe l'humidité et la transpiration pour maintenir une interface plus sèche et confortable
- + Facilite l'accès et la surveillance anesthésiques

SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE CS PRONE

CSM2560



Kit à utiliser avec COUSSIN FACIAL POUR CS PRONE CSM2510

SYSTÈME DE SOUTIEN DE LA TÊTE CS PRONE PLUS

CSM2565



Kit à utiliser avec COUSSIN FACIAL POUR CS PRONE PLUS CSM2512 ou CSM2516 (pédiatrique)

Références	Dimensions
CSM2560 - kit avec ouverture au menton	
CSM2564 - Casque	Long. 317 - Larg. 233 - Haut. 171 mm
CSM2566 - Miroir ajustable	Long. 220 - Larg. 220 - Haut. 4 mm
CSM2565 - kit sans ouverture au menton	
CSM2561-1 - Casque	Long. 317 - Larg. 233 - Haut. 171 mm
CSM2567 - Miroir ajustable	Long. 220 - Larg. 220 - Haut. 4 mm
Coussins à usage unique	
CSM2510	Pour CSM2560 - Livré par pack de 10 unités
CSM2512	Pour CSM2565 - Livré par pack de 10 unités
CSM2514	Pour CSM2565 - Livré par pack de 10 unités



COUSSIN FACIAL POUR SYSTÈME CS PRONE

Répartit les pressions principalement au niveau du front et des pommettes, tout en laissant l'espace nécessaire au passage du circuit d'intubation.

Livré par pack de 10 unités - À utiliser en combinaison avec le système de soutien de la tête CS Prone CSM2560

Référence	Dimensions
CSM2510	Long. 312 - Larg. 224 Haut. 146 mm



COUSSIN FACIAL POUR SYSTÈME CS PLUS

Sa mousse souple soutient le visage en répartissant les pressions principalement sur le front et les pommettes.

Livré par pack de 10 unités - À utiliser en combinaison avec le système de soutien de la tête CS Prone CSM2565

Références	Dimensions
CSM2512	Long. 312 - Larg. 224 Haut. 146 mm
CSM2514	Long. 305 - Larg. 216 Haut. 129 mm



VEN

COUSSIN FACIAL PRONE ONE

Coussin facial à usage unique pour positionnement en décubitus dorsal et ventral. Un miroir est inclus pour aider à la surveillance des yeux du patient ainsi que des tubes.

Références	Dimensions
CSM2520	Long. 282 - Larg. 239 Haut. 138 mm Livré par pack de 8 unités
CSM2519	Long. 210 - Larg. 200 Haut. 140 mm Livré par pack de 10 unités

Support pour position latérale



LAT

SUPPORT DE TÊTE LATÉRAL

Sa forme permet de répartir les pressions exercées sur la tête afin de contribuer à limiter les marques et lésions liées à l'appui prolongé.

Livré par pack de 20 unités

Référence	Dimensions
CSM2410	Long. 200 - Larg. 200 Haut. 70 mm



VEN

200 kg

SUPPORT DE TÊTE CS PRONE

Constitué de couches de mousse à mémoire de forme douce offrant confort, soutien et stabilité aux patients en position de décubitus ventral. Fente d'intubation pour fixer le tube à l'écart du visage du patient.

- + Mousse mémoire multicouche
- + Base ferme stabilisatrice
- + Passage dédié au circuit d'intubation
- + Absorbe l'humidité et la transpiration
- + Plusieurs configurations disponibles

Références	Dimensions
CSM2536V Fente d'intubation à droite et gauche	Long. 270 - Larg. 246 Haut. 178 mm Livré par pack de 10 unités
CSM2535V Fente d'intubation à droite	Long. 270 - Larg. 246 Haut. 178 mm Livré par pack de 10 unités
CSM2550V Fente d'intubation à droite	Long. 270 - Larg. 246 Haut. 127 mm Livré par pack de 14 unités

Supports compatibles C-Flex® / C-Prone®



VEN

MASQUE FACIAL CS

Soutient le visage en décubitus ventral et répartit les pressions entre les joues, le front et le menton, afin de contribuer à limiter les marquages et lésions liés à la pression.

Référence	Dimensions
CSM2530	Long. 330 - Larg. 280 - Haut. 50 mm

Livré compacté par pack de 5 unités



SUPPORT DE TÊTE COMPATIBLE C-FLEX® C-PRONE®

Sa surface de contact est conçue pour répartir les pressions sur le front et les joues tout en laissant le menton libre de pression.

Livré par pack de 10 unités

Références	Dimensions
CSM2515	Long. 280 - Larg. 235 Haut. 124 mm
CSM2516	Long. 290 - Larg. 240 Haut. 125 mm

Référence	Morphologie	Durée opératoire	Gestion du circuit d'intubation	Surveillance visage	Niveau de protection
CSM2410	Standard	Courte à moyenne	Repositionnement sans déconnexion	Limitée	Standard
CSM2515	Enfant, petit adulte	Moyenne à longue	Selon système C-Flex®	Selon système	Standard
CSM2516	Large	Moyenne à longue	Selon système C-Flex® C-Prone®	Selon système	Renforcé
CSM2519	Petit	Courte à moyenne	Passage dédié	Miroir inclus	Renforcé
CSM2520	Standard	Courte à moyenne	Passage dédié	Miroir inclus	Renforcé
CSM2530	Selon système	Moyenne à longue	Selon système C-Prone®	Selon système	Standard
CSM2535V	Standard	Moyenne à longue	Passage à droite	Limitée	Renforcé
CSM2536V	Standard	Moyenne à longue	Passage à droite et à gauche	Limitée	Renforcé
CSM2550V	Standard	Moyenne à longue	Passage à droite	Limité	Renforcé
CSM2560 CSM2510	Standard	Longue / complexe	Repositionnement sans déconnexion	Excellente - miroir inclus	Excellent
CSM2565 CSM2512 - CSM2514	Standard et pédiatrique	Longue / complexe	Repositionnement sans déconnexion	Excellente - miroir inclus	Excellent

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

Pourquoi intégrer des consommables au positionnement du patient ?

- + Hygiène maîtrisée : un support propre pour chaque patient
- + Gain de temps : moins de nettoyage, plus de disponibilité
- + Protection constante : le même niveau de protection, patient après patient
- + Prêt à l'emploi : installer, utiliser, remplacer



LIT



SANGLES DE MAINTIEN DE LA TÊTE

Particulièrement adaptées aux interventions en position Beach Chair, ces sangles larges et souples assurent le maintien sécurisé de la tête tout au long de l'intervention.

- + Maintien stable de la tête
- + Répartition des pressions pour plus de confort
- + Ajustement rapide par Velcro®

Référence	Dimensions
CSM2667	Long. 870 - Larg. 120 - Haut. 20 mm


Livrées par pack de 10 unités



PROTECTEUR OCULAIRE

Positionné autour des yeux, il protège cette zone particulièrement sensible contre les pressions, les lésions cutanées et le dessèchement oculaire.

Référence	Dimensions
CSM2790	Livré par pack de 25 unités

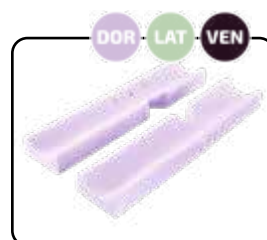

PAIRE DE COUSSINS D'ACCOUDOIR STANDARD

Coussins en mousse de polyuréthane souple conçus pour protéger les bras du patient sur les accoudoirs de la table opératoire. Ils apportent une interface confortable et contribuent à répartir les pressions sur les zones d'appui.

Livrées compactées sous vide par pack de 10 paires

Référence	Dimensions
CSM2575	Larg. 126 - Long. 600 Haut. 65 mm



COUSSINS POUR SUPPORT DE JAMBE

Conçu pour sécuriser et stabiliser la jambe sur son support. Sa fixation Velcro® permet de le maintenir efficacement en place tout en apportant une interface souple et protectrice entre le patient et le dispositif.

Livrés compactés sous vide par pack de 12 unités
Compatible avec le support de jambe arthroscopique KYRA9200

Référence	Dimensions
CSM2738	Long. 960 - Larg. 90 Haut. 10 mm

SUPPORTS DE BRAS



SUPPORT DE BRAS UNIVERSEL

Ses 3 articulations rotatives offrent une grande liberté de positionnement et permettent d'adapter précisément l'orientation du bras aux besoins de l'intervention.

- + Réglage à une main grâce à la poignée centrale
- + Coussin avec sangle inclus
- + 3 articulations rotatives pour une grande liberté de positionnement

Référence	Dimensions
CSM2646	Long. 460 - Larg. 150 Haut. 550 mm



SUPPORT DE BRAS ARTICULÉ AVEC COUSSIN MOULÉ

Doté d'une surface moulée qui épouse la forme du bras, offrant un maintien plus enveloppant et confortable. Ses 3 articulations rotatives et sa poignée centrale permettent un positionnement précis et rapide d'une seule main.

- + Forme moulée et enveloppante pour davantage de confort
- + 3 articulations rotatives pour un positionnement précis
- + Réglage central d'une seule main
- + Mouvements fluides grâce aux articulations sphériques

Référence	Dimensions
CSM2647	Long. 460 - Larg. 150 - Haut. 550 mm


COUSSINS DE POSITIONNEMENT



SUPPORT POUR DÉCUBITUS DORSAL

Ensemble de deux coussins en forme de cale destinés à surélever la tête et le thorax du patient. Contribuent à réduire les pressions et à faciliter l'intubation.

Références	Dimensions
CSM2648 - Pack complet :	
CSM2915 Base	Long. 717 - Larg. 515 Ep. 150 mm
CSM2914 Partie supérieure	Long. 785 - Larg. 151 Ep. 80 mm

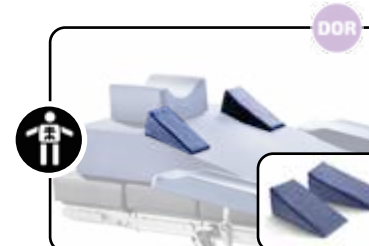

PAIRE DE SUPPORTS D'ÉPAULES

Destinée à être placée sous les omoplates du patient en position décubitus dorsal. Elle vise à réduire la pression exercée sur le plexus brachial et améliorer le confort pendant une intervention.

Référence	Dimensions
CSM2908	Larg. 195 - Long. 95 Haut. 10 - 70 mm



DEMI-CYLINDRE POLYVALENT

Peut notamment être positionné au-dessus du creux poplité en décubitus dorsal. Il soutient les jambes, répartit les pressions et contribue à éviter une hyperextension du genou.

Référence	Dimensions
CSM2907	Larg. 500 - Long. 150 Haut. 75 mm



PAIRE D'ANNEAUX DE GENOUX

Soutient les genoux et répartit les pressions afin de contribuer à réduire le risque de lésions liées aux appuis prolongés.

Référence	Dimensions
CSM2821	Diamètre : 230 mm Hauteur : 60 mm



PROTECTION DES TIBIAS

Soutient les tibias du patient tout en permettant aux chevilles et aux pieds de trouver naturellement leur position.

- + Répartit les pressions sur toute la longueur des tibias
- + Maintient les pieds hors de la table, évitant les appuis directs
- + Favorise une position naturelle des chevilles et des pieds
- + Installation rapide grâce à sa conception monobloc

Référence	Dimensions
CSM3020	Larg. 220 - Long. 500 - Haut. 240 mm

SÉCURISER LE PATIENT EN TREDELENBURG


En Trendelenburg, l'inclinaison augmente le risque de glissement et de concentration des pressions. Le BI-Pad DUOFIT stabilise le patient tout en répartissant les charges sur une large surface.

Bi-Pad DUOFIT

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR STABILISER LE PATIENT EN TREDELENBURG

Ce matelas viscoélastique à mémoire de forme associe adhérence et répartition des charges pour stabiliser le patient.

- + Limite le glissement : forte adhérence lors de l'inclinaison
- + Répartit les pressions : s'adapte à la morphologie du patient
- + Améliore le confort : épouse les contours du corps
- + Simplifie la préparation du bloc : usage unique, prêt à l'emploi

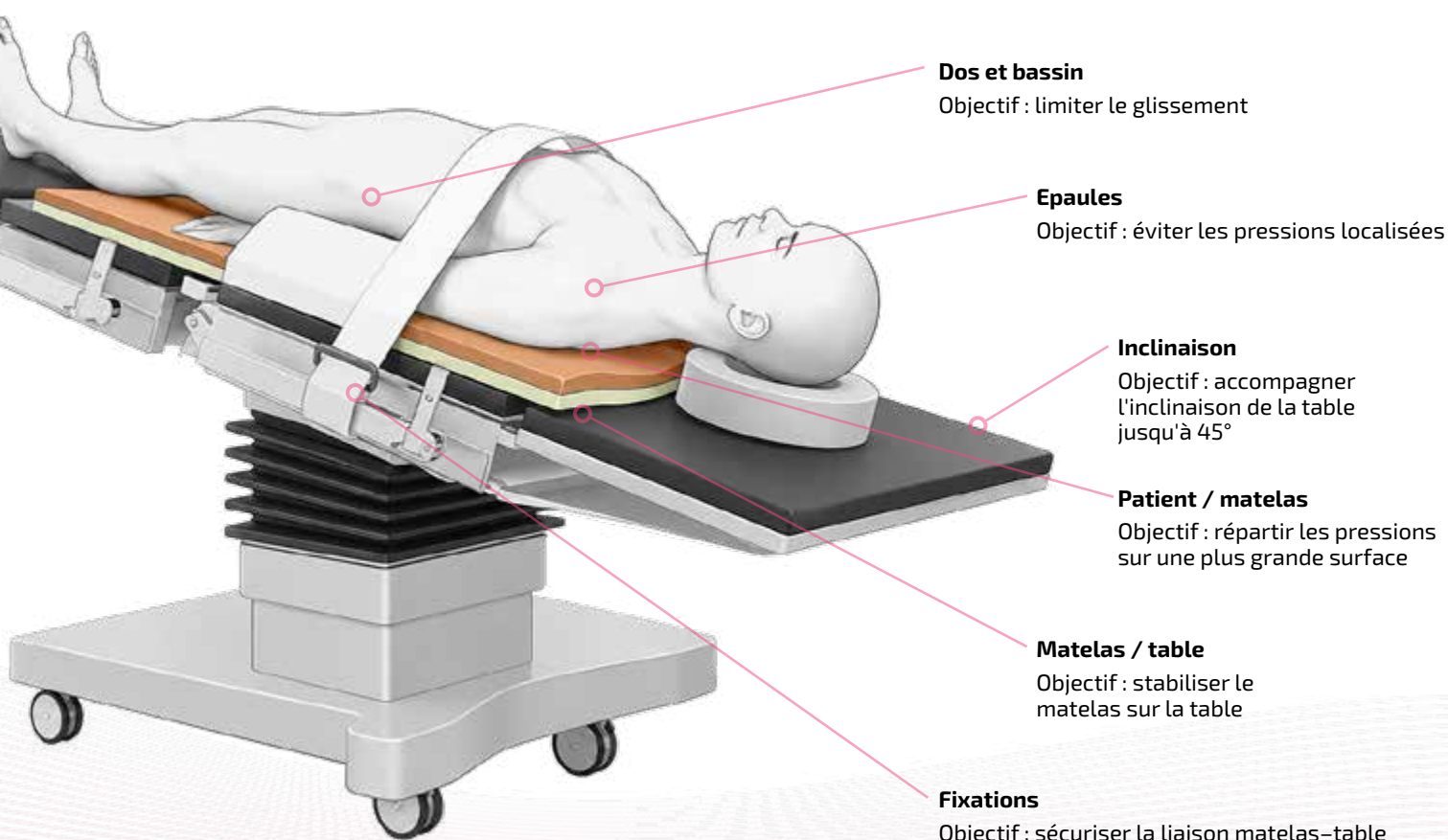

Pourquoi utiliser le matelas anti-glisse BI-Pad DUOFIT ?

Contrairement aux cales d'épaules qui concentrent les appuis, le BI-Pad DUOFIT stabilise le patient sur une large surface de contact, favorisant la répartition des pressions et le confort.

Deux couches, deux fonctions complémentaires


Côté patient

Adhérence • Adaptation • Confort

Mousse viscoélastique à mémoire de forme qui s'adapte progressivement pour épouser la morphologie du patient.

Objectifs :

- + Augmenter la surface de contact
- + Favoriser le maintien du patient
- + Répartir les pressions
- + Améliorer le confort thermique
- + Absorber la transpiration et l'humidité

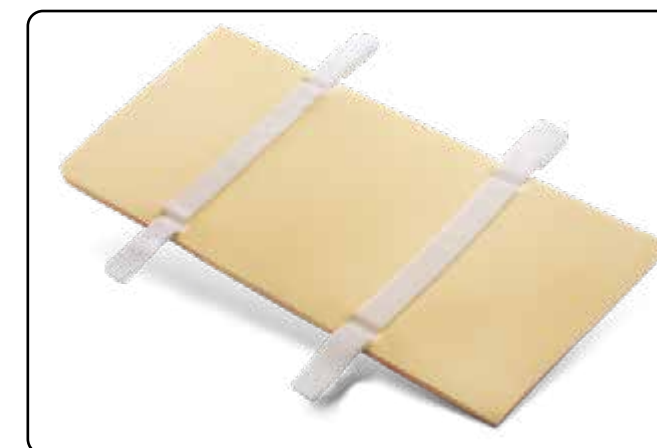

Côté table

Portance • Répartition des charges • Stabilité

Mousse à forte portance conçue pour supporter et répartir le poids du patient tout en stabilisant le DUOFIT sur la table.

Objectifs :

- + Assurer la portance
- + Répartir le poids du patient
- + Stabiliser le matelas DUOFIT sur la table

Le DUOFIT s'adapte à la table

Quelle que soit l'inclinaison nécessaire à l'intervention, le BI-Pad accompagne les mouvements de la table jusqu'à 45°.



Particulièrement adaptée à la chirurgie robotique

Le BI-Pad DUOFIT favorise le maintien du patient lors des inclinaisons nécessaires aux procédures robot-assistées.



ACCESSOIRES POUR TABLES
D'OPÉRATION

Depuis plus de 50 ans, Reison Medical accompagne les équipes chirurgicales avec une gamme complète d'accessoires de positionnement pour tables d'opération. Développées avec les professionnels de santé, ses solutions associent ergonomie, sécurité et durabilité afin de répondre aux exigences des blocs opératoires modernes. Leur compatibilité étendue et leur conception robuste en font une référence internationale du positionnement chirurgical.



50 ans d'expertise au bloc opératoire



Ergonomie pensée pour les équipes soignantes



Développé avec les professionnels de santé



Conçu pour un usage intensif au bloc opératoire

CLAMEAUX

Standards



10-301



10-302

CLAMEAU SIMPLE

Solution simple et robuste pour la fixation d'accessoires ne nécessitant pas d'orientation particulière.

Références	Dimensions
10-301	Ø tige : 20 mm Long. 80 - Larg. 50 - Haut. 60 mm
10-302	Ø tige : 16 - 20 mm Long. 55 - Larg. 55 - Haut. 115 mm

Rotatifs



CLAMEAU ROTATIF

Pour rail standard 25 x 10 mm, fixation au rail par bague crantée avec levier de verrouillage séparé.

Références	Dimensions
10-304 <i>Compatible tables EU uniquement</i>	Ø tige : 16 - 20 mm Long. 120 - Larg. 55 Haut. 160 mm
10-308 <i>Compatible tables EU, US et UK</i>	Ø tige : 16 - 20 mm Long. 120 - Larg. 55 Haut. 160 mm



CLAMEAU ROTATIF

Clameau rotatif à bague crantée avec levier de verrouillage rapide. Doit être utilisé avec des accessoires légers et courts dont la contrainte porte vers l'extérieur de la table.

Référence	Dimensions
10-307	Long. 125 - Larg. 65 - Haut. 160 mm



produit préféré du bloc

Bi-Pad V - Repositionnement et maintien des membres supérieurs

Ref : S002825V

Facilite le repositionnement du patient et contribue au maintien des membres supérieurs dans la position souhaitée.

Vendu par kit de 10 matelas et 10 draps de glisse

Bi-Pad VKIT - Sécurisation complémentaire du patient

Ref : S002825VKIT

Complète l'installation avec des éléments de maintien permettant d'apporter une sécurité supplémentaire lorsque les conditions opératoires le nécessitent. La configuration peut être adaptée à l'inclinaison de la table, au type d'intervention et à la morphologie du patient.

Vendu par kit de 10 matelas, 10 draps de glisse et 2*10 sangles thoraciques

VACC - Fixation renforcée à la table

Lorsque les rails ou les accessoires présents sur la table ne permettent pas d'utiliser les fixations habituelles du BI-Pad, le VACC apporte une liaison supplémentaire entre le matelas et la table.

Vendu par kit de 10 matelas, 10 draps de glisse, 2*10 sangles thoraciques et 2*10 sangles Velcro pour fixation à la table

POSITIONNEURS ANATOMIQUES A USAGE UNIQUE

APPUI-TÊTE ANNEAU

Constitué de plusieurs anneaux de mousse prédécoupés lui permettant de s'adapter à différentes morphologies.

Vendu par pack de 100 unités

Référence	Dimensions
S002800	Ø 230 x 50 mm

PROTECTION DE BRAS

Conçu pour soutenir et protéger le bras lors du positionnement du patient, notamment pendant les procédures de laminectomie. Sa mousse élastique apporte un support simple tout en protégeant la zone de contact.

Vendu par paire par pack de 100 unités

Référence	Dimensions
S002805	135 x 610 x 70 mm

PROTECTION ANATOMIQUE DE LA JAMBE

Conçu pour soutenir et protéger la jambe pendant l'intervention. Sa forme favorise une faible pression au niveau des zones d'appui, afin d'améliorer la protection du membre pendant son positionnement.

Vendu par pack de 100 unités

Référence	Dimensions
S002807	420 x 265 x 140 mm

PROTECTIONS DE TALONS ALVÉOLÉES

Destinées au support et au positionnement des talons pendant les procédures médicales. Leur forme enveloppante permet de protéger cette zone d'appui tout en maintenant le talon positionné sur le support.

Vendu par paire par pack de 100 unités

Référence	Dimensions
S002808	170 x 180 x 35 mm



CLAMEAU ROTATIF RAPIDE

Montage rapide sur rail, sans vis de serrage.

Référence	Dimensions
10-305	Long. 60 - Larg. 45 - Haut. 115 mm

Clameaux à blocage rapide - accélérer l'installation et les réglages



10018

10019



10019-S30

CLAMEAU POUR SUPPORT DE BRAS

Assure une fixation fiable et un montage en quelques secondes. Compatible avec les anciennes générations de supports Reison.

Références	Dimensions
10018	Sans entretoise ø tige : 20 mm Long. 125 - Larg. 65 - Haut. 160 mm
10019	Entretoise 10 mm ø tige : 16 - 20 mm Long. 145 - Larg. 125 - Haut. 160 mm
10019-S30	Entretoise 30 mm ø tige : 16 - 20 mm Long. 145 - Larg. 65 - Haut. 160 mm

Réf.	Type de clameau	Rotation	Poids max. supporté	Points forts
10018	Clameau pour support de bras	Non	Intérieur : 10 kg - Extérieur : 20 kg	Pour supports de bras sans entretoises
10019	Clameau avec écart 10 mm	Non	Intérieur : 10 kg - Extérieur : 20 kg	Distance table : 10 mm
10019-S30	Clameau avec écart 30 mm	Non	Intérieur : 10 kg - Extérieur : 20 kg	Distance table : 30 mm
10-301	Clameau standard	Non	20 kg	Fixation compacte et légère
10-302	Clameau simple	Non	50 kg	Simple et solide
10-304	Clameau rotatif	Oui	25 kg	Rotation contrôlée des accessoires
10-305	Clameau rotatif simple	Oui	25 kg	Montage rapide
10-307	Clameau rotatif	Oui	Intérieur : 20 kg - Extérieur : 10 kg	Utilisation facile et intuitive Rotation contrôlée des accessoires
10-308	Clameau rotatif universel	Oui	25 kg	Compatible avec tableau EU, US et UK

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

EXTENSIONS DE RAILS



RAIL ANGULAIRE BAS

Permet de prolonger le rail normal sur une table d'opération. Réglable en hauteur et pivotable sur lui-même, se verrouille tous les 15°.

Clameau 10019-RH inclus

Référence	Dimensions
10-359	Long. 300 - Larg. 65 Haut. 330 mm



PAIRE DE RALLONGE DE RAIL

Permet de prolonger le rail normal sur une table d'opération.

Vendue par paire - Clameau inclus

Références	Dimensions
10-491	Long. 280 - Larg. 40 Haut. 90 mm
10-491-L	Long. 500 - Larg. 40 Haut. 90 mm

SUPPORTS DE BRAS

Permettent un positionnement stable et sécurisé du bras, tout en facilitant l'accès au patient pour l'équipe chirurgicale

- + Mécanisme de réglage à une main
- + Adaptable aux différentes épaisseurs de matelas
- + Compatible avec plusieurs types de coussins

Epaule / plexus brachial

Objectif : limiter l'abduction et les tractions excessives

Coude / nerf ulnaire

Objectif : éviter toute compression du nerf ulnaire

Avant-bras

Objectif : répartir uniformément les pressions

Poignet / main

Objectif : maintenir le poignet en position neutre



SUPPORT DE BRAS STANDARD INCURVÉ

Répond à la majorité des besoins du bloc opératoire. Son réglage à une main et son articulation sur rotule permettent un positionnement rapide et précis du membre supérieur.

Référence	Dimensions
10-380	Long. 640 - Larg. 160 - Haut. tige 230 mm Entretoise : 10 mm

Coussins recommandés : 10-381, 10-382, 10-382-H - Clameau 10019 inclus



SUPPORT DE BRAS INCURVÉ COURT

Version compacte pour les patients à plus petit gabarit.

Coussin recommandé : 10-382-K - Clameau 10019 inclus

Référence	Dimensions
10-380-K	Long. 490 - Larg. 160 Haut. tige 230 mm Entretoise : 10 mm




SUPPORT DE BRAS ROTATIF POUR POSITION ASSISE

Réglage à une main, pivotement sur rotule.

Clameaux recommandés : 10-302 (clameau fixe) ou 10-304, 10-305, 10-308 (clameaux rotatifs)
Coussin recommandé : 10-382-K

Référence	Dimensions
10-380-KL	Long. 540 - Larg. 165 Haut. tige 460 mm Entretoise : 10 mm

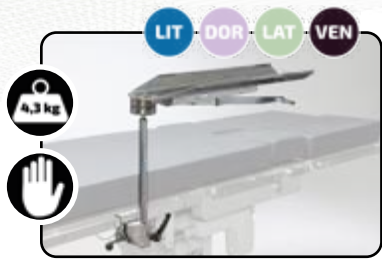

SUPPORT DE BRAS INCURVÉ AVEC TIGE LONGUE

Augmente la hauteur de travail afin de s'adapter aux matelas épais ou aux configurations particulières.

Clameau standard 10019 inclus - Coussins recommandés : 10-381, 10-382, 10-382-H, 10-382-HT

Référence	Dimensions
10-380-L	Long. 640 - Larg. 160 Haut. tige 400 mm Entretoise : 10 mm




SUPPORT DE BRAS PLAT

Surface de support plane offrant une excellente stabilité. Réglage à une main.

Clameau 10019 inclus - Coussins recommandés : 10-181, 10-182

Références	Dimensions
10-380-M-10	Long. 610 mm Hauteur tige : 220 mm Support : 175 x 70 mm Entretoise : 10 mm
10-380-M	Long. 610 mm Hauteur tige : 220 mm Support : 175 x 70 mm Entretoise : 30 mm

Supports de bras spécifiques - répondre aux configurations particulières

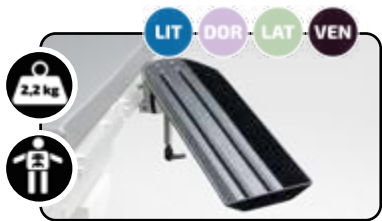

SUPPORT DE BRAS RADIOTRANSSPARENT

Idéal lors de fluoroscopie du bras d'un patient.

Clameau 10019 inclus - Coussins recommandés : 10-381, 10-382, 10-382-H, 10-382-HT

Référence	Dimensions
10-385	Long. 605 - Larg. 170 Haut. tige 320 mm



SUPPORT DE BRAS STANDARD INCURVÉ ROTATIF

Assure un maintien stable du membre supérieur. Installation et repositionnement d'une seule main, idéal pour les repositionnements fréquents.

- Indications cliniques :
- Chirurgie de l'épaule (beach chair)
 - Procédures avec ajustements réguliers
 - Plastique mammaire

Référence	Dimensions
10-387	Long. 640 - Larg. 160 - Haut. tige 240 mm

Clameau 10-307 inclus - Coussins recommandés : 10-381, 10-382, 10-382-H

Option : SANGLE FIXE POUR POIGNET

Maintient le poignet ou l'avant-bras sur le support tout en limitant les mouvements involontaires pendant l'intervention.

Références	Dimensions
10-383	Long. 580 mm - Larg. 50 mm
10-383-L	Long. 700 mm - Larg. 50 mm



SUPPORT DE BRAS FLEXIBLE

Offre une grande liberté de réglage grâce à sa double articulation : hauteur, inclinaison et orientation du support afin de maintenir le bras dans une position stable tout au long de l'intervention.

Coussin 11551 et clameau inclus

Références	Dimensions
20-300	Long. 410 - Larg. 130 470 - Haut. 160 mm
20-300-10 avec plaque de réglage horizontale	Long. 410 - Larg. 150 500 - Haut. 160 mm



SUPPORT DE BRAS LATÉRAL

Réglage multi-axes ; rotation horizontale, inclinaison verticale jusqu'à 30°, hauteur ajustable.

Coussin et sangles inclus - Clameaux recommandés : 10-302 (clameau fixe) ou 10-304 et 10-305 (clameaux rotatifs)

Référence	Dimensions
10-389	Long. 460 - Larg. 160 Haut. 630 mm

Réf.	Type	Clameau	Plaque	Avantages cliniques	Coussin associés
10-380	Standard	10019 inclus	Incurvée	Polyvalent, ajustements faciles	10-381 / 10-382 / 10-382-H / 10-382-HT
10-380-K	Court	10019 inclus	Incurvée	Petits gabarits	10-382-K
10-380-L	Tige longue	10019 inclus	Incurvée	Matelas épais, besoin de hauteur	10-381 / 10-382 / 10-382-H / 10-382-HT
10-380-M-10	Plat	10019 inclus	Plat	Large appui, stable	10-181 / 10-182
10-380-M	Plat	10019 inclus	Plat	Large appui, stable, grande entretoise	10-181 / 10-182
10-380-KL	Avec entretoise longue	10-302, 10-304, 10-305 ou 10-308 recommandés	Incurvée	Position assise	10-382-K
10-385	Radiotransparent	10019 inclus	Incurvée	Compatible imagerie	10-381 / 10-382 / 10-382-H / 10-382-HT
10-387	Standard rotatif	10-307 inclus	Incurvée	Repositionnements fréquents	10-381 / 10-382 / 10-382-H / 10-382-HT
10-389	Latéral	10-302, 10-304 ou 10-305 recommandés	Incurvée	Inclinaison multi-axes	coussin inclus
20-300	Flexible	clameau inclus	Plat	Positionnement flexible	11551

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

COUSSINS POUR SUPPORTS DE BRAS

Coussins confort en mousse viscoélastique - meilleure répartition des pressions



COUSSIN CONCAVE RENFORCÉ

Épaisseur renforcée destinée aux interventions longues nécessitant une protection accrue des tissus.

Convient aux appuis-bras 10-380, 10-380-L et 10-387

Référence	Dimensions
10-382-HT	Long. 610 - Larg. 180 Ep. 80 mm



COUSSIN CONCAVE COMPACT

Version compacte spécialement développée pour les patients de petit gabarit.

Convient à l'appui-bras 10-380-K

Référence	Dimensions
10-382-K	Long. 450 - Larg. 160 Ep. 65 mm



COUSSIN CONFORT

Mousse à récupération lente pour accompagner la forme du membre et favoriser le maintien de l'avant-bras.

Convient aux appuis-bras 10-389, 20-300 et 20-300-10

Référence	Dimensions
11551	Long. 455 - Larg. 155 Ep. 70 mm



COUSSIN CONFORT PLAT

Fixation par Velcro®.
Convient à l'appui-bras 10-380-M

Référence	Dimensions
10-181	Long. 610 - Larg. 180 Ep. 45 mm



COUSSIN CONFORT CONCAVE

Surface concave assurant un meilleur maintien du membre supérieur tout en améliorant le confort du patient.
Fixation par Velcro®.
Convient aux appuis-bras 10-380, 10-385 et 10-387

Référence	Dimensions
10-182	Long. 610 - Larg. 180 Ep. 40/65 mm



COUSSIN CONFORT ANATOMIQUE

Offre un excellent compromis entre maintien et répartition des pressions.
Adapté aux interventions de durée moyenne à longue.

Référence	Dimensions
10-382-H	Long. 610 - Larg. 160 - Epaisseur 40 mm

Convient aux appuis-bras 10-380, 10-385 et 10-387



Coussins moulés - répartition homogène des pressions et maintien stable



COUSSIN MOULÉ PLAT

Assure une répartition homogène des pressions et un maintien stable du membre supérieur.
Convient aux appuis-bras 10-380, 10-385 et 10-387

Référence	Dimensions
10-381	Long. 610 - Larg. 165 Epaisseur 35 mm



COUSSIN MOULÉ CONCAVE

Surface anatomique concave permettant un meilleur centrage de l'avant-bras tout en répartissant les points d'appui.
Convient aux appuis-bras 10-380, 10-385 et 10-387

Référence	Dimensions
10-382	Long. 610 - Larg. 180 Epaisseur 25 mm

Référence	Type	Forme	Maintien	Répartition des pressions	À privilégier pour
10-181	Confort plat	Plat	Standard	Elevé	Confort amélioré, usage polyvalent
10-182	Confort concave	Concave	Optimal	Optimal	Maintien concave, interventions prolongées
10-381	Moulé plat	Plat	Standard	Standard	Usage quotidien, interventions courtes
10-382	Moulé concave	Concave	Renforcé	Standard	Maintien renforcé de l'avant-bras
10-382-H	Confort anatomique	Concave	Optimal	Très élevé	Maintien anatomique et confort accru
10-382-HT	Concave renforcé	Concave	Maximum	Maximum	Interventions prolongées, protection accrue
10-382-K	Concave compact	Concave	Optimal	Maximum	Petits gabarits
11-511	Mousse à récupération lente	Concave	Enveloppant	Maximum	Supports 10-389, 20-300 et 20-300-10

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEMENT DU PATIENT

Appuis latéraux - stabiliser le thorax et le bassin



APPUI LATÉRAL À DOUBLE ARTICULATION

Permet un réglage précis en hauteur, profondeur et orientation afin d'épouser la morphologie du patient. Les deux coussins assurent une adaptation optimale selon la zone d'appui.

Références	Dimensions
10-560	Larg. : 80 - Long. 320 - Haut. : 570 mm Réglage latéral : 150 mm Coussin : 175 x 70 mm Cap de poids de patient : 200 kg
10-561	Larg. : 210 - Long. 360 - Haut. : 570 mm Réglage latéral : 150 mm Coussin : 165 x 165 mm Cap de poids de patient : 200 kg

Livré avec 2 coussins : 1 plat et 1 incurvé - Clameau 10-301 recommandé




APPUI LATÉRAL

Solution simple destinée au maintien latéral du patient lorsque peu de réglages sont nécessaires.

Livré avec 2 coussins : 1 plat et 1 incurvé
Clameau 10-301 recommandé

Références	Dimensions
10-565	Larg. : 215 - Long. 220 - Haut. : 550 mm Réglage latéral : 120 mm Coussin : 200 x 200 mm Cap. de poids de patient : 175 kg
10-566	Larg. : 80 - Long. 270 - Haut. : 530 mm Réglage latéral : 120 mm Coussin : 175 x 70 mm Cap. de poids de patient : 175 kg

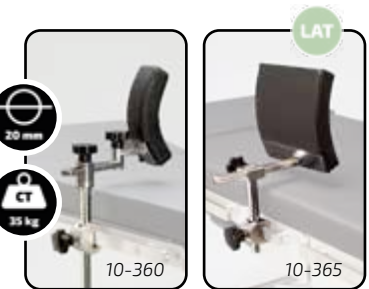


SUPPORT LATÉRAL INCURVÉ

Maintien localisé grâce à un coussin intégré. Réglable en hauteur, profondeur et orientation afin d'assurer un appui précis sur des zones anatomiques ciblées.

Coussin inclus - Clameau 10-301 recommandé

Références	Dimensions
10-360	Long. tige : 325 mm Platine : 180 x 85 mm Cap. de poids de patient : 200 kg
10-365	Long. tige : 350 mm Platine : 165 x 165 mm Cap. de poids de patient : 175 kg

Maintien du bassin - sécuriser le patient lors des inclinaisons de table

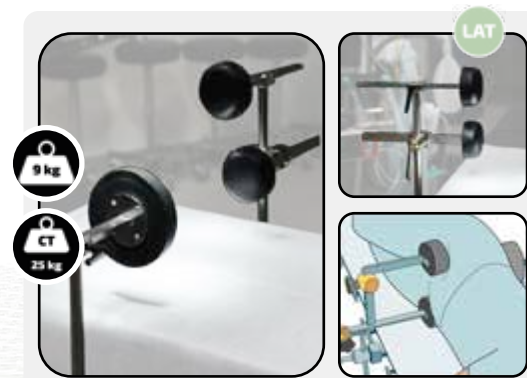


SUPPORT DE HANCHE LATÉRAL

Maintient efficacement le bassin lors des positions latérales ou inclinées. Réglable en hauteur, largeur et orientation afin de s'adapter à la morphologie du patient.

Référence	Dimensions
10-475	Long. 140 - Larg. 600 - 1200 - Haut. 700 mm

Clameau 10-305 inclus

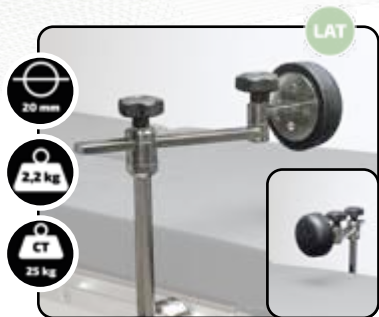

APPUI PUBIEN ARTICULÉ

Assure un maintien antérieur stable du bassin tout en limitant les points de pression grâce à son coussin en polyuréthane souple.
Coussin inclus - Clameau 10-301 recommandé

Référence	Dimensions
10-567	Long. 320 - Larg. 105 Haut. 455 mm

Maintien des épaules - limiter le glissement en Trendelenburg



ÉPAULIÈRES

Conçues pour limiter le glissement du patient lorsque la table d'opération est placée en position de Trendelenburg, elles assurent un maintien stable des épaules tout en préservant le confort grâce à leurs coussins interchangeables.
Vendues par paire - Coussins inclus
2 clameaux 10-301 recommandés

Références	Dimensions
10-350 Coussins plats et incurvés	Haut. 385 mm Larg. 230 mm
10-350-BER Coussins plats	Haut. 385 mm Larg. 230 mm

Positionnement des membres inférieurs - stabiliser les jambes pendant l'intervention




BARRE À GENOU

Maintient le genou ou le pied dans une position stable pendant l'intervention. Les différentes longueurs de tige permettent de s'adapter aux configurations de table et aux besoins chirurgicaux.

Références	Dimensions
10-367	Ø coussin : 135 mm - Larg. 270 mm Long. tige : 770 mm - Poids max : 25 kg
10-367-K	Ø coussin : 135 mm - Larg. 270 mm Long. tige : 400 mm - Poids max : 40 kg
10-367-10	Ø coussin : 100 mm - Larg. 300 mm Long. tige : 820 mm - Poids max : 40 kg

Clameaux recommandés : 10-304 ou 10-305 (pour 10-367 et 10-367-K) ou 10-304, 10-302, 10-308 (pour 10-367-10)

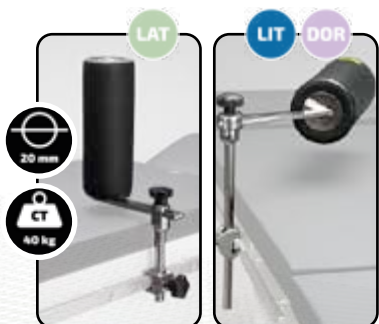

SUPPORT CYLINDRIQUE

Destiné au soutien du genou, de la jambe ou du pied afin de maintenir une position anatomique stable tout en limitant les points de pression.
Clameau 10-301 recommandé

Références	Dimensions
10-368	Vertical : Ø coussin : 135 mm Long. 250 mm Long. tige : 500 mm
10-369	Horizontal : Ø coussin : 135 mm Long. 270 mm Long. tige : 350 mm



PLAQUES DE PIEDS

Assurent l'appui des pieds lors du positionnement en proclive afin de contribuer au maintien du patient et de limiter son glissement. Réglables en hauteur et en longueur pour s'adapter à la morphologie du patient.
Vendues par paire - Clameau et coussins intégrés

Référence	Dimensions
10-296	Long. 330 - Larg. 290 Haut. 320 - 440 mm



FIXE-CUISSE

Stabilise la cuisse grâce à un coussin orientable permettant un ajustement précis de la position.
Vendu à l'unité - Coussin inclus - Clameau 10-301 recommandé

Référence	Dimensions
10-448	Long. 375 Haut. max. 550 mm



SUPPORT MERLE D'AUBIGNÉ

Conçu pour le maintien simultané de la cuisse ou du mollet. Son coussin orientable assure un positionnement stable des membres inférieurs lors des procédures orthopédiques ou traumatologiques.
Vendu à l'unité - Coussin inclus
Clameau 10-301 recommandé

Référence	Dimensions
10-448R	Long. 330 - Larg. 290 Haut. 320 - 440 mm




SUPPORT DE GENOU POUR ARTHROSCOPIE

Conçu pour maintenir le genou en flexion pendant les procédures arthroscopiques, il assure une stabilisation fiable du membre inférieur tout en facilitant l'accès chirurgical. Son système de serrage par manivelle permet un ajustement précis selon la morphologie du patient.

Références	Dimensions
10-353	Haut. 262 - Larg. 130 - Long. 465 mm Capacité de poids du patient : 215 kg
10-353-XL	Haut. 340 - Larg. 130 - Long. 465 mm Capacité de poids du patient : 215 kg

Clameaux recommandés : 10-304, 10-305 ou 10-308 (clameaux rotatifs) - 3 coussins inclus.

Maintien et sécurisation du patient - prévenir les chutes et maintenir les membres

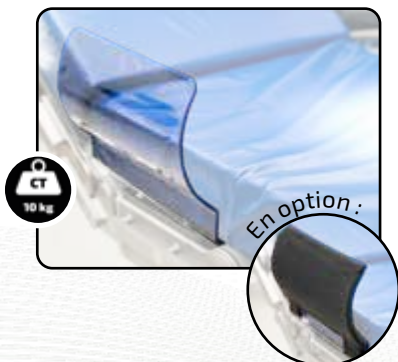


GOUTTIÈRE DE QUENU INCURVÉE

Grâce à sa forme incurvée, elle assure un maintien stable du bras ou de la jambe pendant l'intervention ou lors des transferts du patient.
Se glisse sous le matelas.

Option : **HOUSSE DE PROTECTION**
Réf. : 10-557 (pour 10-556) ou 10-553 (pour 10-552)

Références	Dimensions
10-556	Long. 300 - Haut. 230 Larg. 230 mm
10-557	Housse de protection pour 10-556
10-552	Long. 565 - Haut. 230 Larg. 230 mm
10-553	Housse de protection pour 10-552

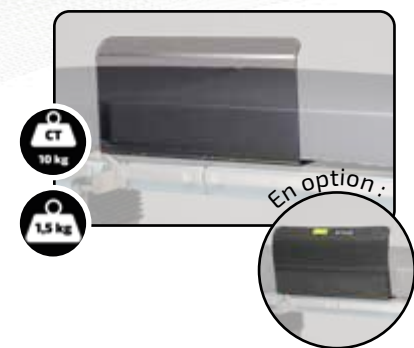


GOUTTIÈRE DE QUENU DROITE

Constitue une solution simple pour le maintien du bras ou de la jambe lorsque la configuration opératoire ne nécessite pas de guidage anatomique spécifique. Se glisse sous le matelas.

Option : **HOUSSE DE PROTECTION**

Réf. : 10-555

Références	Dimensions
10-554	Long. 400 - Haut. 210 - Larg. 230 mm
10-555	Housse de protection pour 10-554

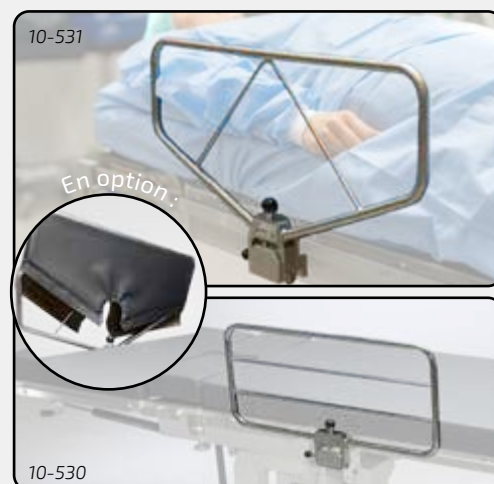

BARRIÈRES LATÉRALES DE SÉCURITÉ

Conçues pour limiter le risque de chute du patient sur la table ou le brancard. Leur verrouillage en position relevée permet une sécurisation rapide, tandis que leur conception rabattable facilite l'accès au patient lorsque nécessaire.

Références	Dimensions
10-530	Long. 610 - Larg. 60 - Haut. 360 mm
10-530-H	Housse de protection pour 10-530
10-531	Long. 620 - Larg. 60 - Haut. 360 mm
10-531-H	Housse de protection pour 10-531

Clameau inclus - Vendues par paire

SUPPORTS DE TÊTE

Type de support

+


Niveau de réglage

+

Fixation à la table

=

Solution efficace et compatible avec la majorité des tables d'opération

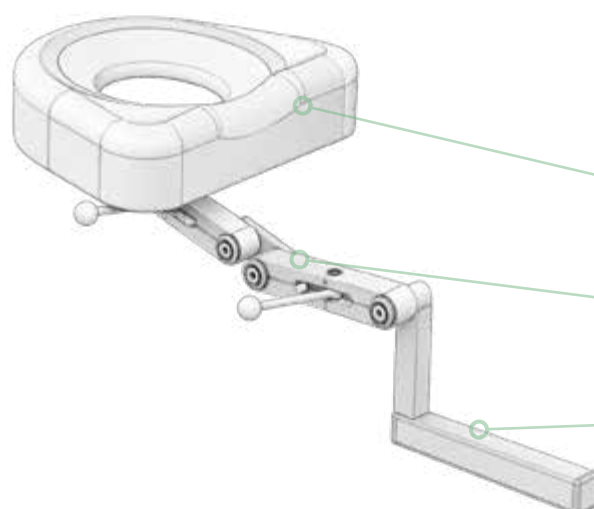

Choisissez votre support selon le positionnement recherché, puis sélectionnez le niveau de réglage et la fixation adaptés à votre table d'opération.

Type de support

Selon le positionnement et l'intervention

Niveau de réglage

Double ou triple articulation

Fixation à la table

En fonction de votre modèle de table

Besoin d'aide pour choisir votre fixation ?

Contactez notre équipe commerciale pour identifier la fixation adaptée à votre table d'opération et vous accompagner dans le choix de votre support de tête.



SUPPORT DE TÊTE FLEXIBLE

Support multi-réglable permettant d'ajuster rapidement la hauteur et l'inclinaison de la tête. Son système de verrouillage par leviers facilite les changements de position tout en maintenant le réglage sélectionné.

- + Réglage rapide par levier unique
- + Inclinaison 50° vers le haut, 110° vers le bas

Coussin inclus



Indications cliniques :

- Chirurgies ORL, ophtalmologiques, plastiques, oculaires
- Situations où l'accès visage/front/oreilles doit être précis


Référence	Dimensions
10-230	Double articulation Long. 420 - Larg. 290 - Haut. 90 - 220 mm
10-230-(X)DBL	Triple articulation Long. 580 - Larg. 290 - Haut. 95 - 390 mm



SUPPORT DE TÊTE COMPACT

Conçu pour maintenir la tête tout en limitant l'encombrement autour du champ opératoire.

Référence	Dimensions
10-231	Long. 495 - Larg. 260 Haut. 35 - 170 mm

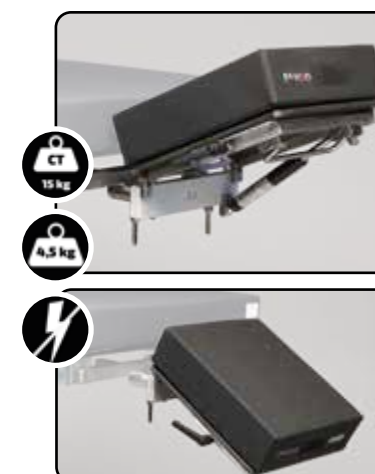

SUPPORT DE TÊTE PLAT À DOUBLE ARTICULATIONS

Assure un maintien stable de la tête tout en offrant un réglage précis grâce à son système à double articulation assisté par vérin à gaz. Facilite l'alignement de la tête et du rachis cervical tout en garantissant un accès optimal au champ opératoire.

- + Réglage assisté par vérin à gaz
- + Inclinaison 20° vers le haut, 32° vers le bas

Coussin inclus

Référence	Dimensions
10-234	Long. 590 - Larg. 325 Haut. 850 mm



SUPPORT DE TÊTE PLAT

Surface d'appui plane destinée aux procédures nécessitant une stabilité maximale tout en conservant un accès dégagé autour de la tête.

- + Orientation au-dessus et en dessous de l'horizontale
- + Grande liberté de positionnement

Coussin inclus

Référence	Dimensions
10-237	Long. 570 - Larg. 250 Haut. 90 - 350 mm

Découvrez le produit

en vidéo

15 kg

3,7 kg

DOR

SUPPORT DE TÊTE RÉGLABLE POUR NEUROCHIRURGIE

Permet un positionnement précis de la tête tout en offrant un accès dégagé au cuir chevelu et aux régions temporales et cervicales. Ses nombreux réglages permettent une adaptation fine à chaque patient et à chaque voie d'abord chirurgicale.

+ Réglages multidirectionnels

+ Excellente stabilité

+ Accès périphérique optimisé

+ Plusieurs interfaces de fixation disponibles

Indications cliniques :

• Chirurgie du crâne

• Neurochirurgie, chirurgie cervico-faciale, chirurgie ophtalmologique et orbitaire, chirurgie rachidienne cervicale

Référence	Dimensions
10-238	Long. 315-580 - Larg. 290 - Haut. 95 - 390 mm

Niveau de réglage






Double articulation
Permet d'ajuster la position du support tout en conservant une configuration relativement simple.



Triple articulation
Offre davantage de possibilités pour ajuster la position du support par rapport à la table et au patient.

Adapter la fixation à la table

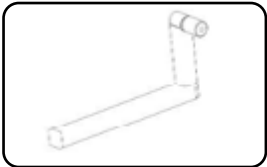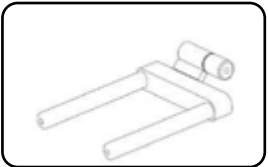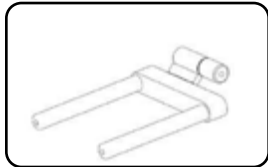

Besoin d'aide pour choisir votre fixation ?

Contactez notre équipe commerciale pour identifier la fixation adaptée à votre table d'opération et vous accompagner dans le choix de votre support de tête.

Référence	Type de support	Réglage	Atout principal	Indications
10-230	Flexible	Articulation double, réglage par levier unique	Grande amplitude de positionnement	Grande amplitude de positionnement
10-230-(X)DBL	Flexible	Articulation triple, réglage par deux leviers	Amplitude de réglage étendue et positionnement précis	Grande amplitude de positionnement
10-231	Compact	Réglage angulaire	Stabilité avec faible encombrement	ORL, chirurgie esthétique
10-234	Plat articulé	Double articulation assistée par vérin à gaz	Réglage simple et polyvalent de l'inclinaison	Positionnement polyvalent de la tête
10-237	Plat réglable	Orientation au-dessus et sous l'horizontale	Accès dégagé et liberté de positionnement	ORL
10-238	Multi-articulé	Triple articulation	Réglages étendus et accès autour de la tête	Neurochirurgie

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Tablettes de chirurgie

DOR LAT VEN

15 kg

TABLETTE DE CHIRURGIE EN FIBRE DE CARBONE

Radiotransparente, elle offre une grande liberté d'accès au membre supérieur. Son pied amovible permet une installation à droite ou à gauche selon l'organisation du bloc opératoire.


+ Fibre de carbone : légèreté et résistance

+ Large surface opératoire

+ Compatible scopie

Référence	Dimensions
10-396	Long. 820 - Larg. 525 mm - Haut. 720 - 1150 mm

*1 coussin antistatique, 1 pied de table et 2 clameaux à serrage rapide inclus
Peut être complété par le dispositif d'étirement 10-392-10*

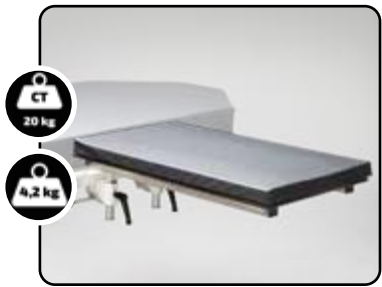

TABLETTE COMPACTE CARBONE
Version compacte destinée aux interventions nécessitant un faible encombrement, tout en conservant les avantages de la fibre de carbone et de la radiotransparence.
*1 coussin antistatique et 2 clameaux 10018 inclus
Peut être complétée par le dispositif d'étirement 10-392-10*

Référence	Dimensions
10-396-K	Long. 625 - Larg. 340 Haut. 220 mm



TABLETTE HPL
Solution robuste avec plateau HPL et hauteur réglable, adaptée aux interventions de routine lorsque la radiotransparence n'est pas une priorité.
*1 coussin antistatique, 1 pied de table et 2 clameaux 10018 inclus
Peut être complétée par le dispositif d'étirement 10-392*

Référence	Dimensions
10-390	Long. 840 - Larg. 520 Haut. 670 - 1160 mm



TABLETTE COMPACTE HPL
Version compacte de la tablette HPL, idéale lorsque l'espace autour de la table est limité.
1 coussin antistatique et 2 clameaux 10018 inclus

Référence	Dimensions
10-390-K	Long. 600 - Larg. 340 Haut. 700 - 1150 mm

Fibre de carbone

+ Plus grande plage de radiotransparence + Plus léger

815 mm

250 mm

Réf. : 10-396
Poids : 5,6 kg

625 mm

340 mm

Réf. : 10-396-K
Poids : 4,2 kg

Tablette HPL

815 mm

Réf. : 10-390
Poids : 13 kg

600 mm

Réf. : 10-390-K
Poids : 6,7 kg



TABLETTE LONGUE

Grande surface de travail en fibre de carbone permettant un soutien complet du membre supérieur tout en préservant l'accès à l'imagerie peropératoire.

Référence	Dimensions
10-398	Long. 1 370 - Larg. 520 Haut. 140 mm

Traction et positionnement




DISPOSITIF D'ÉTIREMENT

Permet d'appliquer une traction contrôlée du poignet ou de l'avant-bras lors des interventions de chirurgie de la main. À utiliser avec le fixe-doigt Weinberger pour garantir un positionnement stable pendant toute la procédure.

A compléter avec le fixe-doigt Weinberger 10-394

Références	Dimensions
10-392-10 <i>A utiliser avec table 10-396 ou 10-396-K</i>	Haut. 310 - Larg. 215 Long. 470 - 670 mm
10-392 <i>A utiliser avec table 10-390</i>	Haut. 310 - Larg. 215 Long. 470 - 670 mm

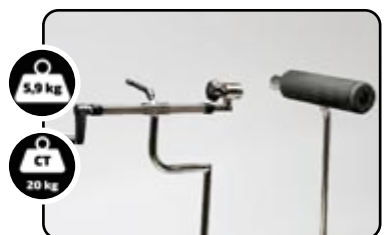

KIT HUMÉRUS

Permet le soutien, l'étirement et la fixation de l'avant-bras du patient. Dispose d'ajustements fins (réglage de 200 mm, rotation 360°) pour le traitement des fractures ou du réaligement osseux.

A compléter avec le fixe-doigt Weinberger 10-394
Clameau 10-304 ou 10-308 recommandé

Référence	Dimensions
10-399	Haut. 820 - Larg. 680 Long. 150 mm



FIXE-DOIGT WEINBERGER

Maintient fermement les doigts pendant les procédures nécessitant une traction de la main ou de l'avant-bras. Composants réglables pour adapter la fixation aux différentes tailles et formes de la main, assurant un appui ferme et gradué.

A compléter avec les dispositifs d'étirement 10-392, 10-392-10 ou 10-399

Référence	Dimensions
10-394	Long. 220 mm Larg. 190 mm



10-392 + 10-394




10-392 + 10-394



10-392 + 10-394

POSITION GYNÉCOLOGIQUE

- Bassin et hanches**
Objectif : élever simultanément et de manière symétrique les deux jambes
- Mollets**
Objectif : répartir de manière homogène les pressions
- Nerf fibulaire commun**
Objectif : éviter toute pression directe ou localisée
- Chevilles et talons**
Objectif : stabiliser sans compression excessive ou frottement

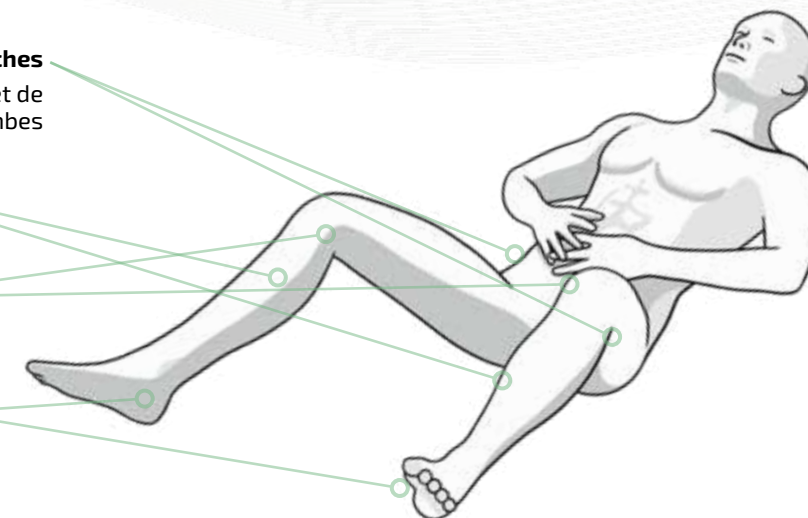


Conçus pour maintenir les membres inférieurs tout en limitant les risques de compression nerveuse et de points de pression

- + Garantissent la stabilité du patient
- + Préservent l'alignement des hanches
- + Limitent les contraintes exercées sur les articulations

Indications cliniques :

- Actes courts à très longs
- Gynécologie
- Urologie
- Chirurgie colorectale
- Robotique pelvienne

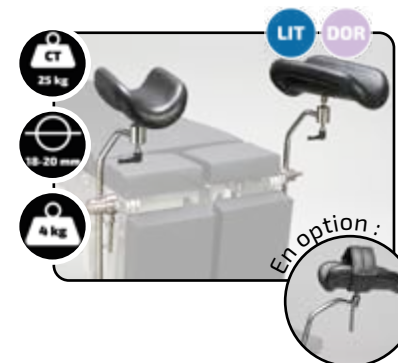

PORTE-JAMBES TYPE GOEPEL

Grâce à son appui anatomique en mousse thermoformée, il assure un maintien stable du membre inférieur tout en facilitant le nettoyage et la désinfection entre deux interventions.

Vendu par paire - Coussins inclus
Clameaux recommandés : 10-304 ou 10-305

Option : SANGLE REMBOURRÉE

Réf. : 10-452 - vendue à l'unité

Fermeture Velcro®, rembourrage souple pour le confort du patient.

Références	Dimensions
10-450	Ø tige : 20 mm Long. 350 - Larg. 195 Haut. 760 mm
10-450-18	Ø tige : 18 mm Long. 350 - Larg. 195 Haut. 760 mm



PORTE-JAMBES XL

Conçu pour les patients de forte corpulence, avec rembourrage Medisoft pour améliorer la répartition des appuis.

Vendu par paire - Coussins et sangles inclus
Clameaux recommandés : 10-304, 10-305 ou 10-308 (clameaux rotatifs)

Références	Dimensions
10-449	Ø tige : 20 mm Coussin : 300 x 300 x 140 mm Sangle : 1 300 x 85 mm Cap. de poids de patient : 270 kg
10-449-18	Ø tige : 18 mm Coussin : 300 x 300 x 140 mm Sangle : 1 300 x 85 mm Cap. de poids de patient : 270 kg

SUPPORT DE PROCTOLOGIE



SUPPORT DE PROCTOLOGIE

Conçu pour les interventions de proctologie et de chirurgie colorectale réalisées en position genu-pectorale, il assure un maintien stable des genoux et du thorax tout en libérant l'abdomen. Cette configuration favorise un accès optimal au site opératoire et contribue au confort du patient pendant toute la durée de l'intervention.

Références	Dimensions
11233	Long. 370 - Larg. 500 - Haut. 490 - 690 mm Coussin 500 x 300 mm
11233-1	Long. 370 - Larg. 500 - Haut. 490 - 690 mm Coussin 500 x 500 mm


ARCEAUX D'ANESTHÉSIE



ARCEAU FLEXIBLE

S'adapte facilement à la configuration de la table et au positionnement du patient, tout en maintenant efficacement les champs opératoires.

Références	Dimensions
10-311	Long. 1 800 mm 2 clameaux 10018 inclus
10-311-16	Long. 1 400 mm (sans clameaux) - 2 000 mm (avec clameaux) 2 clameaux 10-301 recommandés

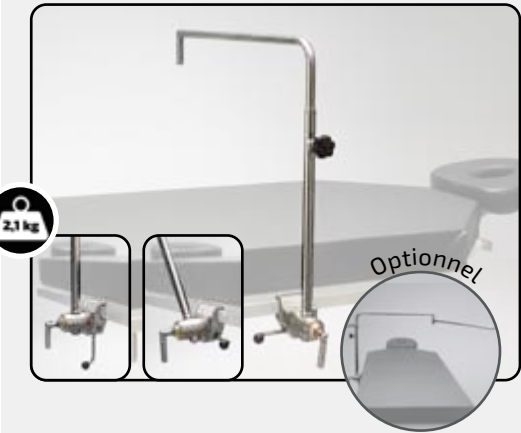

CADRE D'ANESTHÉSIE

Réglable en hauteur, il permet de maintenir efficacement les champs opératoires au-dessus du visage tout en conservant un accès optimal aux dispositifs d'anesthésie.

Référence	Dimensions
10-310	Long. 600 mm - Larg. 55 mm Haut. 530 - 780 mm

Clameau à blocage rapide 10-307 inclus

Option : BRAS D'EXTENSION

Réf. : 10-315

Longueur ouverte : 530 mm

CADRE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE DE CARBONE

Conçu pour réduire le poids de l'équipement tout en conservant une excellente rigidité, il facilite les manipulations quotidiennes et améliore le confort d'utilisation de l'équipe soignante.

Bras d'extension et clameau 10-307 inclus

Référence	Dimensions
10-313	Long. 1 600 Hauteur : 520 - 870 mm

CADRE POUR AMYGDALES

Développé pour les interventions ORL, il permet le maintien contrôlé de la bouche ouverte grâce à un crochet réglable fixé à la mâchoire inférieure, offrant un accès optimal à la cavité buccale.

Clameau 10-307 inclus

Référence	Dimensions
10-314	Long. 565 Hauteur : 560 mm

CADRE DE CHIRURGIE

Destiné au maintien des écarteurs chirurgicaux afin de stabiliser le champ opératoire et de faciliter le travail du chirurgien pendant l'intervention.

Clameau 10-304 inclus

Référence	Dimensions
10-410	Long. 600 mm Haut. 570 - 850 mm

PERFUSION ET GESTION DES TUBULURES - organiser et sécuriser le champ opératoire

Tiges à perfusion



TIGE À PERFUSION DROITE

Dotée d'un mécanisme de déverrouillage à une main, cette tige facilite les réglages de hauteur tout en permettant de suspendre jusqu'à trois poches de perfusion.

Référence	Dimensions
10-402	Larg. 650 mm Haut. 945 - 1 490 mm

Clameau 10-307 inclus



TIGE À PERFUSION ORIENTABLE

Support de perfusion avec clameau rotatif inclus, verrouillage facile. 3 crochets.

Clameau 10-307 inclus

Référence	Dimensions
10-400	Larg. 240 mm Haut. 1 050 - 1 550 mm



TIGE À PERFUSION DROITE

Idéale pour des installations standards nécessitant une solution simple et robuste.

Clameau 10-401 inclus

Référence	Dimensions
10-401	Larg. 240 mm Haut. 1 050 - 1 550 mm

Porte-tubes - organiser les circuits d'anesthésie et les tubulures



PORTE-TUBE

Conçu pour maintenir simultanément plusieurs tubulures et câbles de différents diamètres, il améliore l'organisation du champ opératoire tout en limitant les risques d'emmêlement et de traction accidentelle.

Références	Dimensions
10-613-EU	610 x 110 x 120 mm
10-613-10	910 x 110 x 120 mm

Clameau 10018RH inclus - Pour tubes Ø 3, 4,5, 6, 17, 19, 22, 24 et 31 mm




PORTE-TUBE SOUS MATELAS

Plaque glissée sous le matelas permettant de guider plusieurs tubulures tout en conservant un encombrement minimal autour de la table.

Pour tubes Ø 3, 4,5, 6, 17, 18, 19, 22, 24 et 31 mm

Référence	Dimensions
10-611	5 x 150 x 380 mm Long. bras : 430 mm

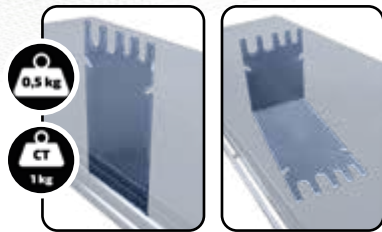


PORTE-TUBE COMPACT

Version simplifiée destinée au maintien d'un nombre limité de câbles ou de tubulures à proximité immédiate du patient.

Pour tubes Ø 8, 20 et 30 mm

Référence	Dimensions
10-612	370 x 185 x 250 mm

Bras porte-tubes articulés

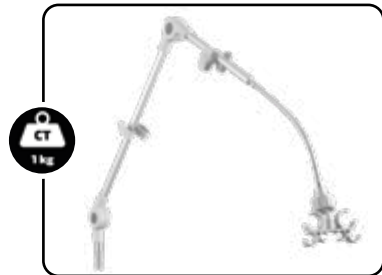


PORTE-TUBE 2 ARTICULATIONS

Ses deux articulations permettent un positionnement rapide et précis des tuyaux, tout en limitant leur encombrement autour de la table.

2 clameaux 2250504E recommandés

Référence	Dimensions
2312590E	Long. 1260 à 1450 mm Flexible de 200 mm

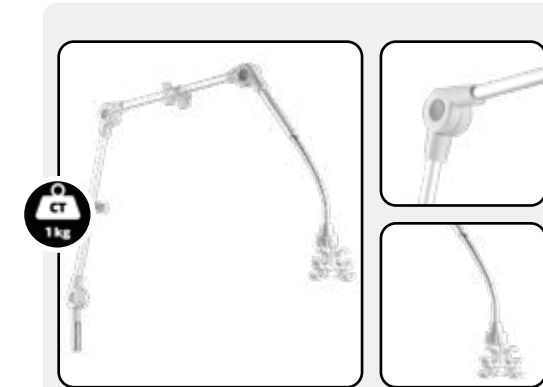

PORTE-TUBE 3 ARTICULATIONS

Ses trois articulations offrent une grande amplitude de réglage pour positionner précisément les circuits respiratoires et les maintenir stables pendant l'intervention.

- + Grande amplitude de mouvement
- + Positionnement précis
- + Maintien stable des circuits
- + Compatible avec de nombreuses configurations de table

Référence	Dimensions
2312522E	1260 à 1450 mm, flexible de 200 mm

2 clameaux 2250504E recommandés



Bras porte-tubes articulés renforcés



PORTE-TUBE RENFORCÉ 2 ARTICULATIONS

Conçu pour les charges plus importantes, il assure un maintien stable des circuits respiratoires, même lors des interventions prolongées.

2 clameaux 2250504E recommandés

Référence	Dimensions
3240200E	Long. 800 à 1300 mm Flexible de 200 mm



PORTE-TUBE RENFORCÉ 3 ARTICULATIONS

Sa conception allongée permet d'atteindre les zones éloignées de la table tout en assurant un maintien stable des circuits.

2 clameaux 2250504E recommandés

Référence	Dimensions
3240300E	Long. 1350 mm Flexible de 200 mm

Supports de câbles - organiser l'environnement autour de la table




SUPPORT FLEXIBLE 2 ARTICULATIONS

Maintient et guide les câbles médicaux afin de limiter l'encombrement et faciliter leur organisation autour de la table.

2 clameaux 2250504E recommandés

Référence	Dimensions
2310001E	Long. 950 mm Flexible de 450 mm

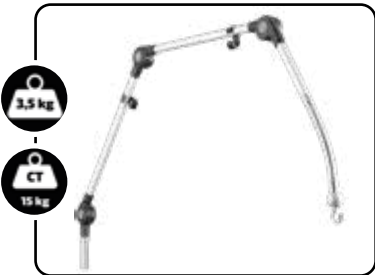

SUPPORT FLEXIBLE 3 ARTICULATIONS

Offre une plus grande liberté de positionnement pour organiser et maintenir plusieurs câbles autour de la table d'opération.

2 clameaux 2250504E recommandés

Référence	Dimensions
2306983E	Long. 850 mm Flexible de 200 mm



SUPPORT VELCRO POUR TUBULURES

Ref. : 300.113

Conçu pour maintenir les tubulures, drains et cathéters au plus près du patient, il limite les tractions accidentelles tout en permettant un ajustement rapide à différents diamètres de tubes.

Tables à instruments - garder l'instrumentation à portée de main



TABLE À INSTRUMENTS DOUBLE ARTICULATION

Offre une surface de travail stable permettant de garder les instruments chirurgicaux immédiatement accessibles. Son plateau à rebords limite le risque de chute des instruments. Support double articulation pour compenser l'horizontalité.

Clameaux recommandés : 10-301 (non rotatif), 10-304 et 10-305

Référence	Dimensions
10-065	Plateau : 540 x 400 mm Tige : 730 mm



TABLE À INSTRUMENTS

Version compacte destinée aux installations où l'espace disponible autour de la table d'opération est limité.

Référence	Dimensions
10-060	Plateau : 500 x 400 mm - Tige : 470 mm

Clameaux recommandés : 10-301 (non rotatif), 10-304 et 10-305





TABLE À INSTRUMENTS ROTATIVE

Grâce à son plateau orientable, elle conserve une surface de travail horizontale lorsque la table d'opération est inclinée. Constitue une solution idéale pour les procédures nécessitant des positions proclives ou déclives du patient.

Clameaux recommandés : 10-301 (non rotatif), 10-304 et 10-305 (rotatifs)

Référence	Dimensions
10-061	Plateau : 540 x 400 mm Tige : 730 mm



TABLE À INSTRUMENTS ARTICULÉE

Accompagne les mouvements de la table opératoire et assure un accès fluide aux instruments tout au long de l'intervention.

Clameaux recommandés : 10-301 (non rotatif), 10-304 et 10-305 (rotatifs)

Référence	Dimensions
10-066	Plateau : 540 x 400 mm Tige : 730 mm

Référence	Format	Mobilité	Point fort	Recommandé pour
10-060	Standard	Fixe	Simplicité	Disposer d'une surface de travail stable à proximité du champ opératoire
10-061	Standard	Rotative	Rotation	Faciliter l'orientation et l'accès aux instruments pendant l'intervention
10-065	Compact	Réglable et articulée	Compacité	Travailler dans un environnement où l'espace autour de la table est limité
10-066	Standard	Articulée	Flexibilité	Adapter précisément la position du plateau aux besoins de l'équipe

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

ADAPTATION DE LA TABLE D'OPÉRATION

Ergonomie du chirurgien - améliorer le confort pendant les interventions longues



SUPPORT DE COUDE

Conçu pour soutenir les avant-bras et les coudes du chirurgien pendant les interventions de longue durée, il contribue à réduire la fatigue musculaire et améliore la stabilité des gestes opératoires. Réglable en hauteur, peut être installé à droite ou à gauche de la table.

Clameau inclus

Référence	Dimensions
10-366	Long. 640 - Larg. 200 Haut. 300 mm

Protection des équipements robotisés - sécuriser l'environnement opératoire



BOUCLIER DE ROBOT


Constitue une barrière physique entre les bras robotisés et le patient. Sa structure robuste contribue à limiter les risques de contact accidentel tout en restant facile à nettoyer et à désinfecter entre deux interventions.

Clameau 10-304-P inclus

Référence	Dimensions
10-316	Long. 350 - Larg. 65 Haut. 660 mm



Adaptation du plateau opératoire - accueillir toutes les morphologies

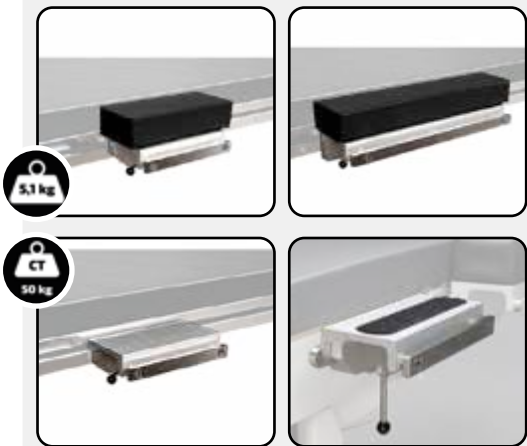

PAIRE D'ÉLARGISSEURS DE PLATEAU

Permet d'augmenter la largeur utile de la table d'opération afin d'améliorer le soutien du patient. Particulièrement adapté aux patients de forte corpulence ou lorsque la surface de la table doit être augmentée pour renforcer la stabilité du positionnement.

Références	Dimensions
10-421	Long. 240 - Larg. 125 - Haut. 85 mm
10-425	Long. 300 - Larg. 125 - Haut. 85 mm
10-422	Long. 455 - Larg. 125 - Haut. 85 mm
10-423	Long. 500 - Larg. 125 - Haut. 85 mm

Coussin inclus - Vendue par paire

Manipulation de la table - faciliter les déplacements et réglages de la table d'opération



POIGNÉES DE POUSSÉE

Orientées vers le bas, elles offrent une prise en main confortable et permettent de déplacer facilement la table d'opération tout en limitant les efforts du personnel.

Clameaux soudés inclus - Vendues par paire

Référence	Dimensions
10-455	Long. 270- Larg. 750 Haut. 140 mm



POIGNÉES DE POUSSÉE

Leur forme relevée offre une position de préhension plus haute, particulièrement adaptée lorsque plusieurs équipements entourent la table d'opération.

Clameaux soudés inclus - Vendues par paire

Référence	Dimensions
10-456	Long. 160- Larg. 80 Haut. 220 mm



POIGNÉES DE POUSSÉE

Compactes et peu encombrantes, elles permettent une manipulation précise de la table dans les espaces restreints.

Clameaux soudés inclus - Vendues par paire

Référence	Dimensions
10-457	Long. 110- Larg. 50 Haut. 270 mm



POIGNÉES DE POUSSÉE

Prolongent le rail porte-accessoires au niveau de la tête afin d'offrir un point de préhension supplémentaire ou de faciliter l'installation d'accessoires complémentaires.

Clameaux soudés inclus - Vendues par paire

Référence	Dimensions
10-458	Long. 400- Larg. 40 Haut. 150 mm




CHARIOT PORTE-ACCESSOIRES

Conçu pour stocker et transporter les accessoires entre les interventions, ce chariot facilite l'organisation du bloc opératoire tout en protégeant le matériel. Permet un stockage optimisé et un accès rapide aux équipements.


- + Centralise les accessoires de positionnement sur un même chariot
- + Facilite le transport du matériel entre les interventions
- + Accès rapide aux équipements grâce aux différents niveaux de rangement

Référence	Dimensions
OA3010	Haut. 1 451 - Long. max : 741- Larg. max. 516 mm <i>Se compose de 2 paniers, 2 850 mm de rail porte-accessoires, porte-jambes et extensions</i>

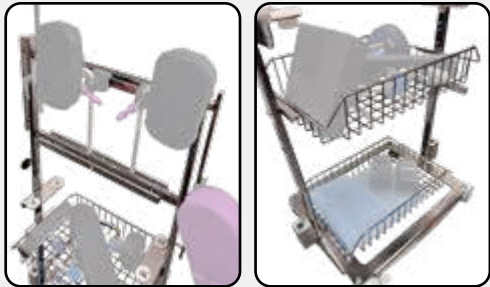

MAINTIEN DU PATIENT

Maintien du corps

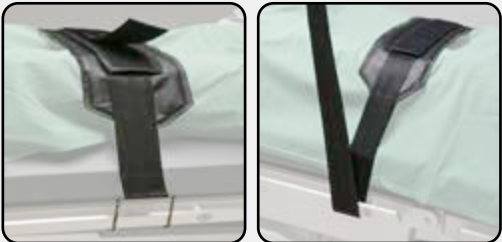

SANGLE LARGE POUR JAMBES ET CORPS

Conçue pour maintenir efficacement le patient pendant les interventions nécessitant une inclinaison de la table d'opération, elle répartit les pressions grâce à son rembourrage intégré et limite les risques de glissement sans compromettre le confort.

Références	Dimensions
10-464-M	Long. 2 410 mm - Larg. 125 mm <i>Rembourrage, fermeture Velcro®</i>
10-464	Long. 1 670 mm - Larg. 125 mm <i>Rembourrage, crochet, fermeture Velcro®</i>




SANGLE POUR JAMBES ET CORPS A BLOCAGE RAPIDE

Permet une installation efficace du patient tout en conservant un excellent maintien pendant l'intervention. Rembourrage intégré.

Clameau à blocage rapide inclus

Référence	Dimensions
10-373	Long. 1 700 mm Larg. 540 mm Rembourrage : 120 mm

Maintien des membres inférieurs

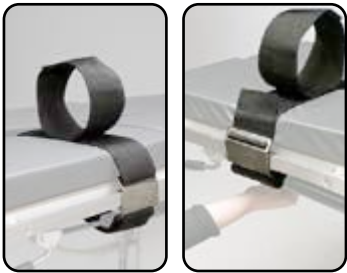

SANGLE FIXE JAMBES ET CORPS

Sangle réglable pour s'adapter aux différentes épaisseurs de matelas. Fermeture velcro, montage sur rail.

Vendue par paire

Références	Dimensions
10-468	Long. 1 050 mm Larg. 90 mm Tour de cuisse jusqu'à 550 mm
10-468-L	Long. 1 050 mm Larg. 90 mm Tour de cuisse jusqu'à 700 mm



SANGLE DE JAMBES ET CORPS AVEC CROCHET

Sangle rembourrée destinée aux installations nécessitant une fixation rapide sur le rail de la table tout en assurant une bonne répartition des pressions.

Références	Dimensions
SS5050	Longueur : 2 200 mm Rembourrage : 110 x 550 mm
SS5055	Longueur : 2 200 mm Rembourrage : 140 x 650 mm



SANGLE FIXE JAMBES ET CORPS

Sangle avec fermeture velcro. Peut être utilisée en complément d'autres types de supports si la table d'opération est inclinée latéralement.

Référence	Dimensions
10-465	Long. 2 100 mm Larg. 850 mm



SANGLE POUR JAMBES

Conçue pour maintenir les membres inférieurs pendant l'intervention, cette sangle en deux parties assure une immobilisation stable tout en s'adaptant à la morphologie du patient grâce à sa fermeture Velcro®.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
10-466	Long. 850 mm, dont Velcro® : 450 mm Larg. 85 mm



SANGLE POUR JAMBES

Version légèrement rembourrée destinée aux interventions prolongées afin d'améliorer le confort du patient. Fermeture Velcro®.

Référence	Dimensions
10-467	Long. 1 100 mm Larg. 90 mm



DU POSITIONNEMENT IMPROVISÉ AU
POSITIONNEMENT STANDARDISÉ

Dans de nombreuses interventions, le positionnement du patient repose encore sur l'association de coussins, serviettes, cales et bandes adhésives adaptées par l'équipe au moment de l'installation. BoneFoam® développe une autre approche : des dispositifs conçus spécifiquement pour une position et une indication chirurgicale, afin de rendre l'installation plus stable, reproductible et simple à mettre en œuvre.

Pourquoi BoneFoam® ?



Une solution dédiée plutôt qu'un montage improvisé



Une installation reproductible d'une intervention à l'autre



Des formes anatomiques pensées avec des chirurgiens



Des dispositifs réutilisables conçus pour le bloc opératoire

NEXTEND

DE LA TRACTION À L'ELASTOPLAST À
UNE TRACTION CONTRÔLÉE



Lors des chirurgies cervicales antérieures, les épaules sont abaissées pour améliorer la visualisation du rachis cervical inférieur. Cette traction, encore souvent réalisée avec des bandes adhésives, reste dépendante de la technique, de la tension appliquée et de la morphologie du patient.

Aujourd'hui : bande adhésive et traction manuelle

- Préparation dépendante de l'équipe
- Tension difficile à reproduire
- Contraintes cutanées
- Ajustement limité
- Détérioration du matériel et supports de positionnement



NEXTEND : système de traction dédié

- Traction symétrique
- Réglable pendant l'intervention
- Reproductible
- Sangles rembourrées

SANGLE FIXE POUR POIGNET



Conçue pour maintenir la main et l'avant-bras sur le support de bras pendant l'intervention. Elle contribue à stabiliser le membre supérieur et à limiter les mouvements involontaires.

Références	Dimensions
10-383	Long. 580 mm Larg. : 50 mm
10-383-L	Long. 700 mm Larg. : 50 mm

Convient aux appuis-bras 10-380 et 10-387



SANGLE FIXE POUR POIGNET

Permet de maintenir la main et l'avant-bras pendant les interventions chirurgicales nécessitant une immobilisation du membre supérieur.

Référence	Dimensions
10-370	Long. 60 - Larg. 55 Haut. 70 mm



SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE


Conçue pour maintenir solidement le torse ou les jambes du patient. Se fixe rapidement et en toute sécurité au rail latéral. Compatible avec toutes les tables chirurgicales et rallonges de table avec barrières latérales. Sans velcro.

Référence	Dimensions
KYRA2601	Ajustable de 450 à 1140 mm Coussin de rembourrage : 130 x 127 x 460 mm

Référence	Zone maintenue	Type de fixation	Rembourrage	Morphologie
10-370	Main, poignet, avant-bras	Inclus	Non	Standard
10-373	Jambes et corps	Clameau inclus	Oui	Standard
10-383	Poignet, avant-bras	Clameau "Hook-on" inclus	Non	Standard
10-383-L	Poignet, avant-bras	Clameau "Hook-on" inclus	Non	Bariatrique
10-464	Tronc, corps	Crochet et Velcro	Oui	Très élevé
10-464-M	Tronc, corps	Velcro	Oui	Bariatrique
10-465	Jambes, corps	Velcro	Oui	Standard
10-466	Jambes	Velcro	Non	Standard
10-467	Jambes	Velcro	Oui	Standard
10-468	Jambes, cuisses	Velcro	Non	Standard
10-468-L	Jambes, cuisses	Velcro	Non	Bariatrique
SS5050	Jambes, corps	Crochet	Oui	Standard
SS5055	Jambes, corps	Crochet	Oui	Standard
KYRA2601	Jambes, corps	Fixation au rail	Oui	Standard

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

Une traction contrôlée et reproductible

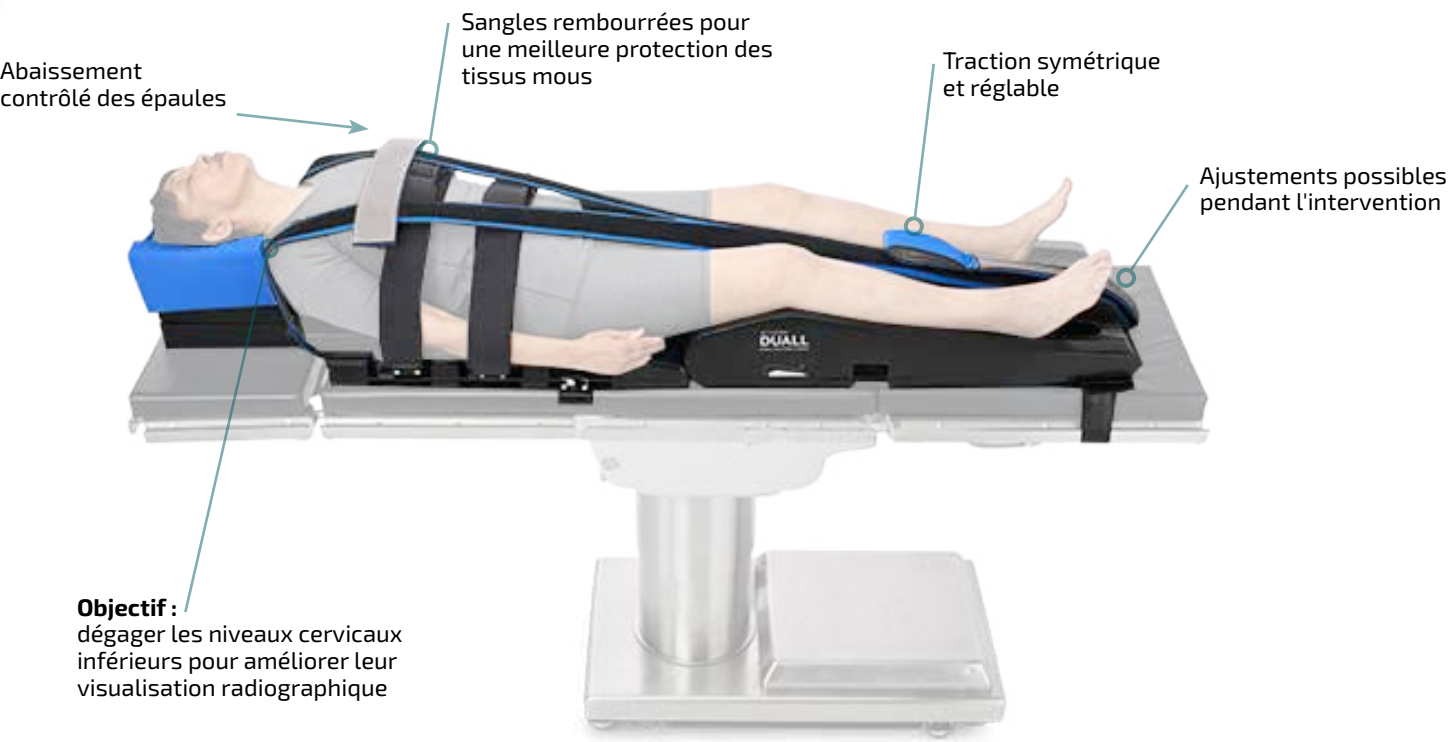

Mieux visualiser le rachis cervical inférieur

L'abaissement contrôlé des épaules permet de dégager les niveaux cervicaux inférieurs et d'en faciliter la visualisation radiographique.



Imagerie par méthode traditionnelle



Imagerie avec système NEXTEND

Les bénéfices cliniques



pour le chirurgien

mieux visualiser les niveaux cervicaux inférieurs



pour l'équipe soignante

standardiser l'installation et accélérer la préparation du patient, ajuster la traction et préserver le matériel



pour le patient

limiter les contraintes cutanées grâce aux sangles rembourrées et réduire le temps sous anesthésie

Le système de positionnement NEXTEND est réutilisable et s'associe à un kit patient à usage unique pour chaque intervention.

Références	Dimensions
104.NPS Pack complet positionnement + usage unique	Long. 1860 - Larg. 428 - Haut. 158 mm
104.NPS-SUK-BX5 Consommables uniquement, livré par pack de 5 unités	Long. 1860 - Larg. 428 - Haut. 158 mm




Base torse, coussin omoplate, positionneur jambe et base de traction



Kit patient à usage unique

Systèmes de positionnement SIDELINE et SHARK LE POSITIONNEMENT LATÉRAL, STANDARDISÉ

En chirurgie lombaire par voie latérale, la stabilité du thorax, du bassin et du rachis est essentielle. SIDELINE réunit ces fonctions au sein d'une plateforme unique, stable et ajustable. Une plateforme unique pour remplacer l'association de multiples cales, coussins et supports lors du positionnement latéral.

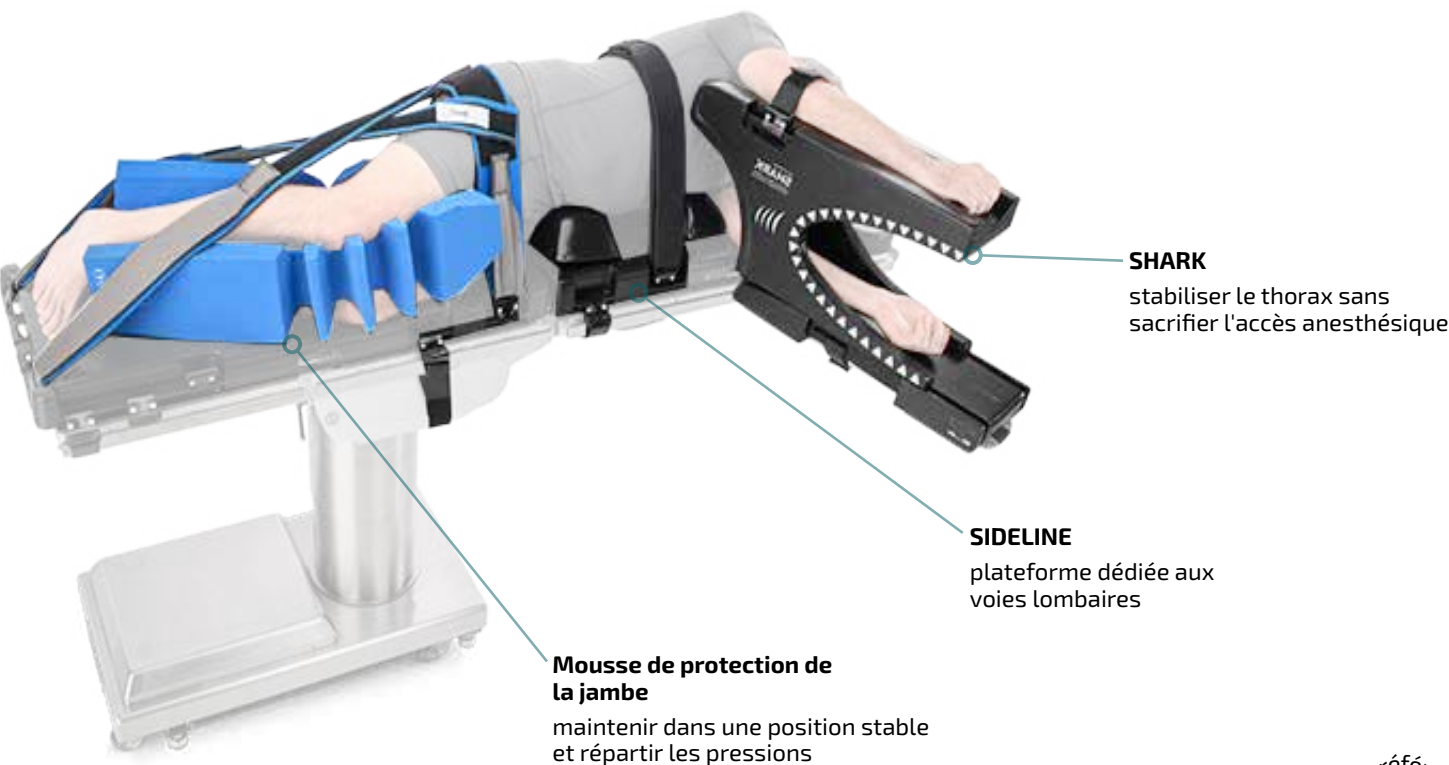

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT LATÉRAL SIDELINE

UNE INSTALLATION REPRODUCTIBLE POUR LA CHIRURGIE LOMBAIRE LATÉRALE

Conçu pour les procédures LLIF, OLIF, DLIF, XLIF et le tethering, SIDELINE stabilise le patient en décubitus latéral et permet d'ajuster précisément la position du bassin sans modifier l'installation générale. Sa sangle pelvienne à technologie Micro Grip permet d'exercer une traction contrôlée afin d'éloigner la crête iliaque des côtes et d'améliorer l'accès à l'espace rétropéritonéal.

- + Positionnement reproductible
- + Stabilité du patient
- + Ajustements possibles pendant l'intervention
- + Optimisation de l'accès chirurgical

Références	Dimensions
104.SLPS Pack complet positionnement + usage unique	Long. 1860 - Larg. 428 - Haut. 310 mm
104.SLPS-SUK-BX5 Consommables uniquement, livré par pack de 5 unités	Long. 1860 - Larg. 428 - Haut. 158 mm

Pack complet :



Kit consommables : sangles, support de tête, protection de la jambe



Base torse, coussin omoplate, positionneur jambe et base de traction



Stabilisateur de bras et de torse "shark"



STABILISATEUR DE BRAS ET TORSSE SHARK

Se fixe sur l'appui-bras (*non fourni*) pour stabiliser simultanément le thorax et le membre supérieur en décubitus latéral. Sa butée antérieure limite la rotation du patient tandis que son support maintient le bras supérieur dans une position neutre.

- + Limite la rotation antérieure du patient
- + Maintient l'alignement des épaules
- + Protège et soutient le membre supérieur
- + Préserve l'accès aux lignes d'anesthésie

Références	Dimensions
925.SHARK-WS <i>Grand</i>	Long. 685 - Larg. 241 - Haut. 393 mm
925.SHARK-S-WS <i>Petit</i>	Long. 685 - Larg. 241 - Haut. 330 mm



La conception en deux parties facilite la mise en place après l'intubation



Revêtement sans joint étanche aux liquides

POSITIONNEURS COMPLÉMENTAIRES



Mousse haute densité

- + Revêtement sans couture
- + Imperméable et non absorbant
- + Nettoyage et désinfection rapides
- + Réutilisable et durable



POSITIONNEUR DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Soutient et stabilise le bras en décubitus latéral, tout en permettant au chirurgien de mobiliser le coude de 0 à 90° pendant l'intervention. Idéal pour la chirurgie du coude.

Références	Dimensions
925.UEBL <i>Grande taille</i>	160 x 280 x 200 mm
925.UEBS <i>Petite taille</i>	160 x 255 x 150 mm



CALE POUR MEMBRES SUPÉRIEURS

Maintient le bras ou l'avant-bras en flexion ou en extension afin de créer une plateforme opératoire stable.

Références	Dimensions
925.RUEWL <i>Côté droit - Grand</i>	600 x 410 x 295 mm
925.RUEWS <i>Côté droit - Standard</i>	495 x 310 x 255 mm
925.LUEWL <i>Côté gauche - Grand</i>	600 x 410 x 295 mm
925.LUEWS <i>Côté gauche - Standard</i>	495 x 310 x 255 mm
925.UUEWL <i>Cale universelle</i>	540 x 410 x 270 mm



CALE LATÉRALE

Stabilise le patient en décubitus latéral au niveau du tronc, du bassin ou des membres inférieurs, seule ou en complément d'un système de positionnement.



POSITIONNEUR POUR BASSIN

Surélève et stabilise le bassin afin d'améliorer l'exposition chirurgicale tout en maintenant l'alignement du rachis. Sa forme anatomique permet une installation stable et reproductible.

- + Amélioration de l'exposition du champ opératoire
- + Elévation stable et contrôlée du bassin
- + Standardise l'installation d'un patient à l'autre
- + Répartit les pressions sur les zones d'appui

Références	Dimensions
925.PROPC-L <i>Grand cadre</i>	635 x 450 x 110 mm
925.PROPC-R <i>Cadre standard</i>	558 x 370 x 110 mm
925.PROP-L-BX5 <i>Grand cadre à usage unique Pack de 5 unités</i>	635 x 450 x 110 mm
925.PROP-R-BX5 <i>Cadre standard à usage unique Pack de 5 unités</i>	558 x 370 x 110 mm



Cadre à usage unique

PROTECTIONS A USAGE UNIQUE



PROTECTION DU BRAS

Protection anatomique destinée à maintenir le bras dans un alignement optimal tout en limitant les risques de compression nerveuse et de lésions cutanées.

Livré par pack de 10 unités

Référence	Dimensions
925.SAS-WS-BX10	370 x 180 x 150 mm



PROTECTION DE LA JAMBE

Maintient la jambe dans une position stable tout en répartissant les pressions afin de réduire les risques de lésions cutanées et nerveuses.

Livré par pack de 5 unités

Référence	Dimensions
925.LLB-BX5	370 x 180 x 150 mm



SYSTÈMES ARTICULÉS HAUTS DE GAMME

Le système articulé FISSO offre une grande liberté de mouvement pour adapter précisément la position du bras aux besoins de l'intervention.
Ses trois articulations permettent un positionnement dans l'espace, puis le système est immobilisé une fois la position souhaitée obtenue.



Réglage simple
et rapide



Positionnement précis
et multidirectionnel




Maintien stable
et sécurisé



Confort et répartition
des pressions

SUPPORTS DE BRAS LATÉRAUX

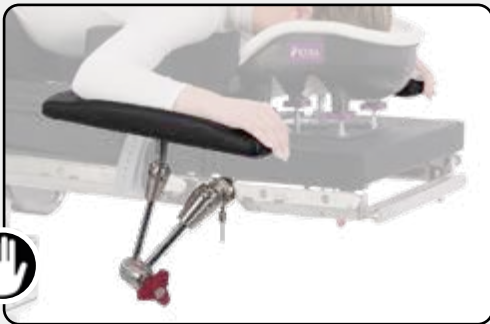

POSITIONNEUR LATÉRAL POUR BRAS

Permet de positionner précisément le bras du patient selon les besoins de l'intervention. Son coussin anatomique viscoélastique accompagne la morphologie du bras et contribue à répartir les pressions.

Références	Dimensions
6646.01	Long. bras articulé : 460 mm Capacité de charge : 10 kg
6646.03 <i>Avec sangle de fixation</i>	Long. bras articulé : 460 mm Capacité de charge : 10 kg
4646.05	Long. bras articulé : 460 mm Capacité de charge : 6 kg




6646.01 - 4646.05



6646.03

SUPPORTS DE BRAS VERTICAUX

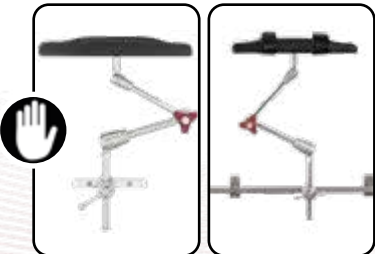

SUPPORT DE BRAS VERTICAL

Permet de positionner le membre supérieur dans une configuration verticale ou surélevée, tout en conservant une grande liberté de réglage.
Bras renforcé de 560 mm et coussin viscoélastique pour adapter précisément la position à la procédure et à la morphologie du patient.

Références	Dimensions
6656.02	Long. bras articulé : 560 mm Capacité de charge : 6 kg
6656.04 <i>Avec sangle</i>	Long. bras articulé : 560 mm Capacité de charge : 6 kg



UNE GAMME COMPLÈTE DE GELS DE POSITIONNEMENT POUR VOS PATIENTS

La gamme complète de gels de positionnement KliniGel™ s'adapte parfaitement à une utilisation en bloc opératoire, en néonatalogie ou encore en réanimation. Ils **améliorent le confort des patients** durant les interventions chirurgicales, tout en **réduisant le risque d'escarres**. Ils se distinguent par leur **grande qualité** et **respectent les normes CE**. Ils sont constitués d'un gel en polyuréthane d'une densité de 0,99 gr/cm³.



Gel amorphe spécialement
conçu pour la chirurgie



Répartit uniformément les
charges pour réduire les
risques de lésions nerveuses



Compatibles avec
différentes morphologies
et positions



Entretien et
nettoyage simples

POURQUOI UTILISER UN POSITIONNEUR EN GEL ?



Redistribution des pressions

Le gel se déforme sous la charge pour augmenter la surface de contact et mieux répartir les pressions.

Epouser les contours anatomiques

Le gel s'adapte aux reliefs anatomiques pour soutenir la zone sans concentrer la pression.

Stabiliser le patient et protéger une zone ciblée

Le gel contribue au maintien du patient, à l'alignement et à la protection des zones d'appui.

Accompagner les interventions prolongées ou les patients à risque

Une protection renforcée lorsque la durée ou le profil du patient l'exige.

Offrir une solution réutilisable

Réutilisable, sous réserve du respect des protocoles de nettoyage, désinfection et traçabilité.

Etre compatible avec l'imagerie péroopératoire

Radiotransparent, le gel permet l'imagerie sans retirer le positionneur.

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS DE LA TÊTE



Les 3 points de contrôle en décubitus dorsal :

- + Alignement : tête, nuque et rachis cervical dans une position neutre
- + Protection : l'occiput et les oreilles sont correctement protégés, sans point de pression excessif
- + Stabilité : la tête est stable durant toute la durée de l'intervention, sans compromettre l'accès au champ opératoire

Voies aériennes

Objectif : maintenir une position compatible avec les dispositifs d'anesthésie et garantir leur stabilité

Occiput

Objectif : répartir les pressions sur la région occipitale

Oreilles


Objectif : préserver le pavillon auriculaire de toute compression

Rachis cervical

Objectif : maintenir un alignement neutre entre la tête, la nuque et la colonne cervicale

Epaules et ceinture scapulaire

Objectif : favoriser un alignement harmonieux entre la tête, le cou et les épaules

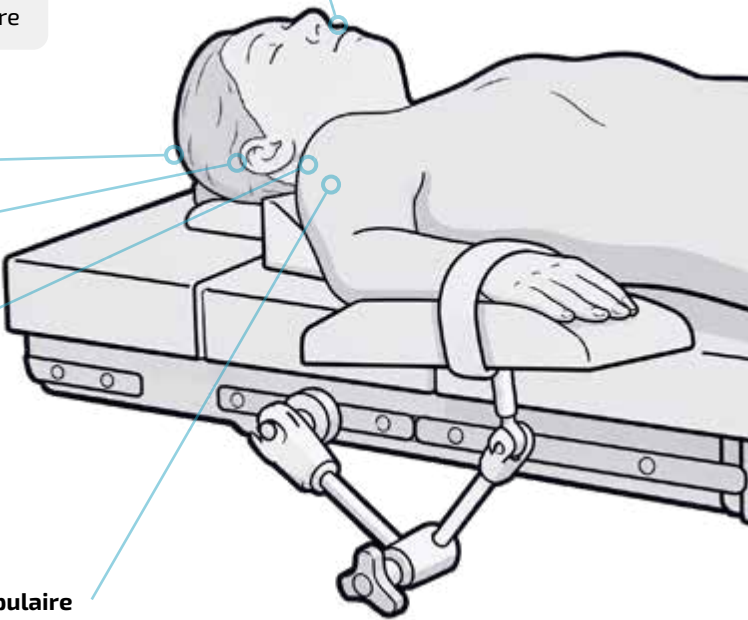

Supports de tête standards - usage polyvalent

Constituent la base du positionnement de la tête en bloc opératoire. Assurent un maintien stable et neutre de la tête, sans réglage complexe.

- + Faciles à comprendre et à utiliser
- + Rapides à installer
- + Compatibles avec un grand nombre de patients et d'actes

Indications cliniques :

- Chirurgie générale courte à modérée
- ORL courante
- Orthopédie (hors rachis complexe)
- Chirurgie ambulatoire
- Chirurgie plastique non reconstructrice lourde



CALE-TÊTE ROND

Protège la tête, la nuque et les oreilles.

Références	Dimensions
05.00.AP001	ø ext. : 90 - ø int. : 40 - haut. : 20 mm
05.00.AP002	ø ext. : 140 - ø int. : 60 - haut. : 35 mm
05.00.AP003	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 45 mm
05.00.AP004	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 75 mm



CALE-TÊTE FER À CHEVAL

Protège et soutient la tête, le cou et le visage avec un accès facile pour l'intubation.

Le dessus aplani augmente la surface de contact avec la tête et réduit les compressions.

Références	Dimensions
05.00.AP011-C	ø ext. : 90 - ø int. : 40 haut. : 20 mm
05.00.AP012-C	ø ext. : 140 - ø int. : 60 haut. : 35 mm
05.00.AP013-C	ø ext. : 200 - ø int. : 75 haut. : 45 mm
05.00.AP014-C	ø ext. : 200 - ø int. : 75 haut. : 75 mm



CALE-TÊTE FER À CHEVAL FERMÉ

Protège et soutient la tête, le cou et le visage. La forme simple permet un maintien stable, tout en réduisant les pressions sur les zones sensibles. La base fermée évite l'écartement.

Référence	Dimensions
05.00.AP011	ø ext. : 90 - ø int. : 40 - haut. : 20 mm
05.00.AP012	ø ext. : 140 - ø int. : 60 - haut. : 35 mm
05.00.AP013	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 45 mm
05.00.AP014	ø ext. : 200 - ø int. : 75 - haut. : 75 mm



CALE-TÊTE AVEC RENFORCEMENT CENTRAL

Le creux central réduit la pression à l'arrière de la tête en décubitus dorsal ou protège l'oreille en position latérale.

Références	Dimensions
05.00.FC625P	250 x 250 x 60 mm
05.00.FC625G	300 x 300 x 60 mm

Supports ophtalmiques - précision et protection

Conçus pour les situations où le positionnement de la tête ne peut être approximatif.

- + Offrent une surface de contact plus large et mieux répartie
- + Epousent davantage la morphologie du crâne
- + Réduisent les risques de pressions localisées sur l'occiput
- + Assurent un maintien stable

Indications cliniques :

- Chirurgie modérée à longue
- Ophtalmologie
- ORL spécialisée
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie plastique ou reconstructrice du visage



CALE-TÊTE OPHTALMIQUE

Conçu pour maintenir une position neutre et stable.

Référence	Dimensions
05.00.AP112	270 x 230 x 90 mm



SUPPORT DE TÊTE ERGONOMIQUE

Epouse les contours de la tête et de la nuque afin de répartir les pressions et de stabiliser le patient.

Référence	Dimensions
05.00.AP081	190 x 190 x 60 mm



SUPPORT DE TÊTE TYPE THORNTON

Protège et soutient la tête, le cou et la nuque.

Référence	Dimensions
05.00.AP110	270 x 230 x 70 mm



CALE-TÊTE OPHTALMIQUE


Sa forme ergonomique augmente la surface de contact autour du crâne tout en dégageant le cou, pour une meilleure stabilité et répartition des pressions.

Référence	Dimensions
05.00.AP113	300 x 315 x 70/33 mm

Supports de tête pour décubitus ventral

Les 3 points de contrôle en décubitus ventral :

- + Alignement : tête, nuque et rachis cervical dans une position neutre
- + Décompression : absence d'appui sur les yeux, le nez et les oreilles
- + Stabilité : maintien sécurisé de la tête sans point de pression excessif

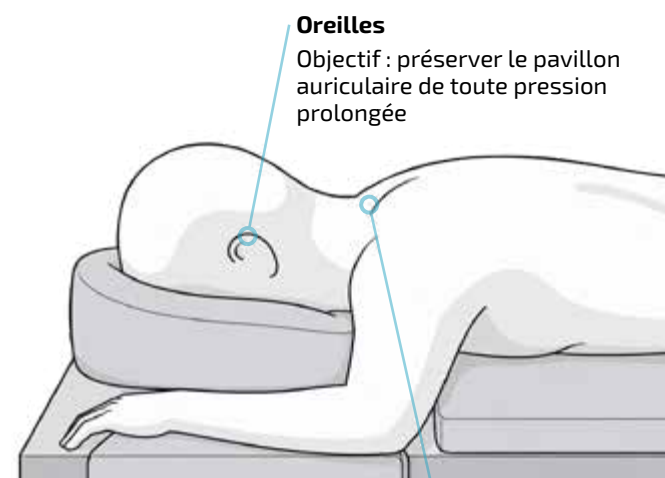

Oreilles

Objectif : préserver le pavillon auriculaire de toute pression prolongée

Nuque et rachis cervical

Objectif : maintenir un alignement neutre entre la tête, la nuque et le rachis cervical

Front et pommettes

Objectif : répartir les pressions sur les reliefs osseux du visage

Yeux


Objectif : préserver les globes oculaires de toute pression

Nez

Objectif : maintenir les voies aériennes libres et éviter toute contrainte sur les structures nasales

Menton

Objectif : soutenir la mâchoire inférieure

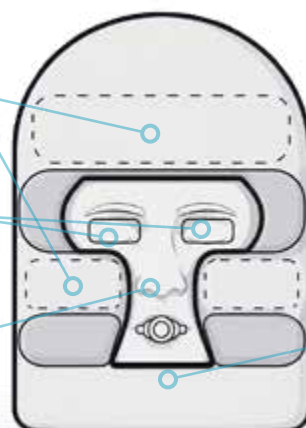

CALE-TÊTE POSITION DÉCUBITUS VENTRAL

Support stable protégeant les zones sensibles du visage tout en maintenant un accès facile aux voies aériennes.

Références	Dimensions
05.00.AP022	280 x 230 x 145 mm
05.00.AP023	230 x 190 x 130 mm



CALE-TÊTE RÉGLABLE - 2 PIÈCES

Composé de deux pièces ajustables permettant d'adapter précisément la forme et la hauteur du support au profil morphologique du patient.

- + Réglage précis et personnalisé
- + Accès facilité aux voies aériennes

Référence	Dimensions
05.00.AP810	2 pièces : 180 x 220 x 50 mm 1 pièce : 80 x 230 x 50 mm



CALE-TÊTE BIDIRECTIONNEL

Grâce à son design ergonomique, il soutient et stabilise la tête et le cou en protégeant le visage, avec un accès facile pour l'intubation.

- + Positionnement standard en décubitus ventral
- + Maintien stable de la tête et du rachis cervical
- + Accès facilité aux voies aériennes

Références	Dimensions
05.00.AP025	250 x 230 x 70 mm
05.00.AP024	240 x 220 x 90 mm



CALE-TÊTE 4 DIRECTIONS

Grâce à son design ergonomique, il soutient et stabilise la tête et le cou en protégeant le visage, avec un accès facile pour l'intubation.

- + Soutien renforcé du visage
- + Répartition optimisée des pressions
- + Positionnement précis pour les interventions prolongées

Référence	Dimensions
05.00.AP025-D	250 x 230 x 140 mm



CALE-TÊTE AVEC MIROIR RÉGLABLE

Permet à l'équipe anesthésique de voir le visage et les yeux du patient, ainsi que la position des tubulures. Le gel épouse la forme du visage tout en maintenant une bonne répartition des pressions.

- + Surveillance visuelle facilitée
- + Accès facile aux tubulures
- + Surface de contact confortable

Référence	Dimensions
05.00.AP025-S	250 x 230 x 85/110 mm

Protection frontale



PROTECTION FRONTALE À BULLES

Protège le front contre la pression exercée par la tubulure de ventilation.

- Indications cliniques :
- Chirurgie longue
 - Réanimation peropératoire

Référence	Dimensions
05.00.AP021	160 x 60 x 16 mm

Supports cervicaux - thyroïdiens

Conçus pour les chirurgies nécessitant une exposition antérieure du cou, avec une extension cervicale volontaire et contrôlée.

- + Positionnent activement le cou sans perte de stabilité
- + Exposition chirurgicale optimale
- + Préservent le confort et la sécurité du patient pendant toute la durée de l'intervention

- Indications cliniques :
- Thyroïdectomie
 - Parathyroïdectomie
 - Chirurgie cervicale antérieure
 - Chirurgies ORL basses nécessitant une exposition du cou



POSITIONNEUR ANTÉRAL

Sa forme ergonomique, marquée au niveau de l'occiput et de la nuque, permet un alignement précis et stable de l'axe tête-cou.

- + Limite les micro-mouvements
- + Stabilise la posture
- + Répartit efficacement les pressions

Référence	Dimensions
05.00.AP104-2	510 x 400 x 140 mm



POSITIONNEUR ANTÉRAL

Soutient le cou et l'occiput et permet une extension simple et modérée de la région cervicale antérieure.

Cale-tête non inclus

Référence	Dimensions
05.00.AP104-1	440 x 300 x 120 mm

Quel support de tête choisir ?

Références	Famille	Position	À privilégier pour	Atout
AP001 à AP004	Rond	Dorsal, lithotomie	Positionnement courant	Simple et polyvalent
AP011 à AP014	Fer à cheval fermé	Dorsal, latéral	Maintien plus contenu	Base fermée limitant l'écartement
AP011-C à AP014-C	Fer à cheval	Dorsal, latéral	Soutien avec accès facilité	Forme ouverte
AP021	Protection frontale	Dorsal, lithotomie, latéral	Protection ponctuelle du front	Complément ciblé
AP022 / AP023	Ventral	Ventral	Installation ventrale	Protection du visage, accès voies aériennes
AP024 / AP025	Bidirectionnel	Ventral	Positionnement ventral courant	Stabilité, accès voies aériennes
AP025-D	4 directions	Ventral	Positionnement ventral renforcé	Soutien plus précis
AP025-S	Avec miroir réglable	Ventral	Surveillance anesthésique du visage	Contrôle visuel
AP081	Ergonomique	Dorsal, lithotomie	Adaptation anatomique tête/nuque	Forme ergonomique
AP104-1	Cervical antéral	Dorsal	Extension cervicale simple/modérée	Exposition antérieure du cou
AP104-2	Cervical antéral	Dorsal	Stabilisation cervicale plus structurée	Maintien axe tête-cou
AP110	Thornton	Dorsal, lithotomie	Soutien tête, cou et nuque	Maintien enveloppant
AP112	Ophtalmique	Dorsal, lithotomie	Positionnement précis	Maintien neutre et stable
AP113	Ophtalmique	Dorsal, lithotomie	Précision, dégagement du cou	Surface de contact étendue
AP810	Réglable 2 pièces	Dorsal, ventral	Morphologies nécessitant un ajustement	Réglable
FC625P / FC625G	Renforcement central	Dorsal, latéral, lithotomie	Décharge occipitale / oreille	Creux central

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS POUR BRAS ET COUDES

Appuis-bras standards - usage polyvalent

Conçus pour poser et stabiliser le bras ou l'avant-bras sans complexifier l'installation.

- + Evitent le glissement du bras
- + Répartissent les points d'appui
- + Préservent l'accès aux perfusions, monitorings et autres dispositifs anesthésiques

- Indications cliniques :
- Actes courts à modérés
 - Patients sans risques particuliers
 - Chirurgies où les bras sont en abduction modérée sur tablettes
 - Chirurgies sans posture complexe



PROTECTION DE LA MAIN ET DU POIGNET

Soutient et permet le positionnement de l'articulation du poignet et de la main lors d'interventions chirurgicales, notamment du canal carpien.

Référence	Dimensions
05.00.AP005	280 x 83 x 60 mm



POSITIONNEUR DE BRAS

Protège et stabilise les membres supérieurs durant les interventions chirurgicales.

Références	Dimensions
05.00.AP071	400 x 125 x 20 mm
05.00.AP072	600 x 125 x 20 mm

Appuis anatomiques / protection ulnaire

Réduisent le risque de compression du nerf ulnaire et des structures péri-articulaires du coude, en particulier lors des chirurgies prolongées.

- + Intègrent une surélévation qui isole le coude des surfaces dures
- + Assurent une meilleure continuité d'appui sur l'avant-bras



Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Chirurgie abdominale
- ORL
- Neurochirurgie



PROTECTION COURBÉE AVEC BASE

Composée d'une base en mousse incurvée recouverte d'une couche de gel pour une meilleure stabilisation des membres supérieurs.

Références	Dimensions
05.00.AP073	400 x 125 x 60 mm
05.00.AP075	500 x 125 x 60 mm
05.00.AP074	600 x 125 x 60 mm
05.00.AP076	630 x 125 x 60 mm



APPUI-BRAS MOULÉ

Spécialement conçu pour la protection du nerf cubital, il peut être utilisé comme support de bras lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Référence	Dimensions
05.00.AP077	520 x 150 x 55 mm



APPUI-BRAS AVEC BASE

Protège et stabilise les membres supérieurs durant les interventions chirurgicales. Composé d'une base en mousse recouverte d'une couche de gel.

Références	Dimensions
05.00.AP419	700 x 200 x 80 mm
05.00.AP420	300 x 150 x 100 mm
05.00.AP421	500 x 150 x 100 mm
05.00.AP422	600 x 150 x 100 mm

Sangle de stabilisation du membre supérieur



SANGLE DE MAINTIEN

Protège la partie du corps sur laquelle elle est placée et empêche les déplacements involontaires.

Vendue par lot de 2

Références	Dimensions
05.00.FB01	330 x 70 x 15 mm
05.00.FB02	360 x 70 x 15 mm

Protections ulnaires complémentaires


Dispositifs de protection localisée, conçus pour sécuriser une zone précise du membre supérieur, sans remettre en cause tout le montage du bras.

- + Complètent une installation existante
- + Permettent une correction fine et ciblée d'un appui à risque



Indications cliniques :

- Tout acte modéré à long
- Patient présentant un risque accru de compression nerveuse
- Patient à peau fragile

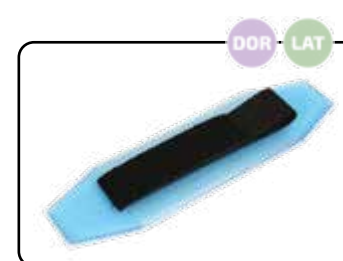

BANDE DE PROTECTION DU NERF CUBITAL

Protège les membres supérieurs pendant tous types de chirurgies.

Référence	Dimensions
05.00.AP310	380 x 120 x 8 mm



PLAQUE DE PROTECTION DU NERF CUBITAL

Protège les membres supérieurs lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Référence	Dimensions
05.00.AP311	460 x 201 x 8 mm

Guide de choix

Références	Type	Zones, besoin	À privilégier pour	Atout
AP005	Protection main et poignet	Main, poignet	Soutien et positionnement de l'articulation, notamment canal carpien	Support ciblé main-poignet
AP071 / AP072	Positionneur de bras	Bras, avant bras	Positionnement courant du membre supérieur	Simple et polyvalent
AP073 à AP076	Protection courbée avec base	Avant-bras, coude	Soutien anatomique avec protection renforcée de la zone ulnaire	Base incurvée, gel pour une meilleure stabilisation
AP077	Appui-bras moulé	Bras, coude	Protection de la zone ulnaire et maintien du bras	Forme anatomique moulée
AP310	Bande de protection ulnaire	Coude / zone ulnaire	Ajouter une protection ciblée à une installation existante	Protection localisée et fine
AP311	Plaque de protection ulnaire	Coude / avant-bras	Protéger une zone d'appui plus étendue	Surface de protection élargie
AP419 à AP422	Appui-bras avec base	Bras, avant-bras	Stabilisation renforcée du membre supérieur	Base en mousse, couche de gel
FB01 / FB02	Sangle de maintien	Membre supérieur	Maintenir le bras et limiter les déplacements involontaires	Maintien complémentaire

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS ET PROTECTIONS POUR ÉPAULES ET CORPS

Protections d'épaules et ceinture scapulaire

Destinées à prévenir les contraintes excessives sur la ceinture scapulaire.
L'objectif est de répartir les pressions et limiter les contraintes mécaniques sur les structures nerveuses.

- + Structurent la posture
- + Répartissent les pressions
- + Sécurisent les chirurgies longues ou complexes

Indications cliniques :

- Chirurgie thoracique
- Chirurgie abdominale haute
- Neurochirurgie (selon position)
- ORL



POSITIONNEUR LATÉRAL

Stabilise le patient en décubitus latéral. Le renforcement central décharge la pression sur l'épaule et le bras.

Référence	Dimensions
05.00.AP101	790 x 500 x 100 mm

produit préféré du bloc

POSITIONNEUR DE POITRINE

Soutient et stabilise le thorax et la poitrine lors de tous types d'interventions chirurgicales.

La version X-Gel associe une âme en mousse à une couche de gel de polyuréthane amorphe, pour offrir un positionneur plus léger et facile à manipuler, tout en conservant les bénéfices du gel sur les zones d'appui.

Références	Dimensions
05.00.AP049-1 version X-Gel : 05.00.XG049-1	300 x 160 x 130/90 mm
05.00.AP049-2 version X-Gel : 05.00.XG049-2	400 x 160 x 130/90 mm
05.00.AP049-3 version X-Gel : 05.00.XG049-3	500 x 160 x 130/90 mm



POSITIONNEUR UNIVERSEL OVALE

Conçu pour décharger une zone anatomique précise au niveau de l'épaule ou du haut du thorax, sans modifier l'installation globale du patient.

- + Réduit les pressions localisées
- + Améliore la tolérance peropératoire sur des zones sensibles
- + Complète un positionnement déjà correct

Références	Dimensions
05.00.AP091	160 x 80 x 45 mm
05.00.AP092	330 x 70 x 50 mm
05.00.AP095	250 x 125 x 50 mm
05.00.AP093	330 x 120 x 60 mm
05.00.AP096	380 x 125 x 63 mm
05.00.AP094	360 x 125 x 70 mm
05.00.AP097	500 x 125 x 70 mm

Positionnements du tronc, thorax et bassin

Positionnent et stabilisent le corps dans son ensemble.
Ils sont essentiels pour :

- + Maintenir l'axe tête-tronc-bassin
- + Eviter les rotations ou affaissements peropératoires
- + Sécuriser les positions prolongées

Indications cliniques :

- Positionnements complexes ou prolongés
- Patients obèses ou très maigres
- Patients sous anesthésie longue
- Patients nécessitant une stabilité corporelle stricte



POSITIONNEUR DE POITRINE

Protège et soutient la poitrine, l'abdomen et les articulations des épaules. Sa forme spéciale suit les lignes du corps, stabilisant le patient en décubitus ventral.

Parties droite et gauche vendues séparément.

Références	Dimensions
05.00.AP050-1	710/580 x 200 x 76 mm (côté gauche)
05.00.AP050-2	710/580 x 200 x 76 mm (côté droit)



POSITIONNEUR THORACIQUE PLAT

Utilisé dans les procédures où une extension thoracique est nécessaire.

Référence	Dimensions
05.00.AP052	230 x 360 x 38 mm



DÔME DE POSITIONNEMENT

Conçu pour soutenir le thorax, l'abdomen ou les membres selon l'installation du patient, il répartit les pressions et contribue à maintenir un alignement anatomique stable tout au long de l'intervention.

Référence	Dimensions
05.00.AP051	350 x 150 x 75 mm



POSITIONNEUR POUR ABDOMINAUX

Soutient et stabilise l'abdomen du patient pendant tous types de chirurgies. Positionneur léger car composé d'une base en mousse recouverte d'une couche de gel.

Références	Dimensions
05.00.XG041	300 x 150 x 100 mm
05.00.XG042	400 x 150 x 100 mm
05.00.XG043	500 x 150 x 100 mm

POSITIONNEUR À FOND PLAT

Peut être utilisé comme support de l'abdomen lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Positionneurs adultes

Références	Dimensions
05.00.AP041	300 x 150 x 100 mm
05.00.AP042	400 x 150 x 100 mm
05.00.AP043	500 x 150 x 100 mm
05.00.AP044	300 x 100 x 85 mm
05.00.AP045	400 x 100 x 85 mm
05.00.AP046	500 x 100 x 85 mm
05.00.AP047	500 x 180 x 150 mm

Positionneurs pédiatriques

Références	Dimensions
05.00.AP047-1	150 x 50 x 50 mm
05.00.AP047-2	200 x 50 x 50 mm
05.00.AP047-3	250 x 50 x 50 mm
05.00.AP047-4	300 x 50 x 50 mm
05.00.AP048-1	150 x 75 x 75 mm
05.00.AP048-2	200 x 75 x 75 mm
05.00.AP048-3	250 x 75 x 75 mm
05.00.AP048-4	300 x 75 x 75 mm

Positionnement latéral et maintien du corps

Stabilisent le patient et maintiennent l'alignement anatomique pendant l'intervention

- + Maintiennent le bassin
- + Conservent une position reproductible

Indications cliniques :

- Chirurgies urologiques, digestives, rachidiennes et orthopédiques
- Interventions longues
- Patients à risques d'escarres

POSITIONNEUR DE HANCHE

Assure un maintien stable, soutient l'articulation et aide à réduire les pressions exercées sur les zones d'appui.

Référence	Dimensions
05.00.AP054	140 x 200 x 13 mm

POSITIONNEUR PROSTATIQUE

Spécialement conçu pour le soutien du tronc et du bassin, il favorise une répartition homogène des pressions tout en assurant la stabilité du patient pendant l'intervention.

Référence	Dimensions
05.00.AP8114J	675 x 500 x 110 mm

Protections articulaires et points d'appuis

Protègent les articulations ou saillies soumises à de fortes pressions.

- + Répartissent les charges
- + Préservent l'intégrité cutanée

Indications cliniques :

- Actes modérés à longs (>1h30)
- Patients présentant un risque élevé d'escarres



COUSSINET D'ÉPAULE

Protège l'épaule du patient, notamment en position de Trendelenburg. Il peut également être utilisé pour recouvrir un appui latéral.

Référence	Dimensions
05.00.AP556	150 x 130 x 25 mm



POSITIONNEUR POUR ÉPAULE

Peut être utilisé comme support et protection lors de tous types d'interventions chirurgicales.

Références	Dimensions
05.00.AP102-3	300 x 220 x 50/10 mm
05.00.AP102-6	500 x 120 x 100/40 mm



PROTECTION SACRALE

Soulage la pression dans la zone sacrée en se concentrant sur le soutien périphérique.

Référence	Dimensions
05.00.AP103-1	400 x 380 x 25 mm

Accessoires pour chirurgie spécialisée



SET 4 PCS EN GEL POUR CADRE DE WILSON

Conçu pour recouvrir intégralement le cadre de Wilson et offrir aux patients une protection supplémentaire contre le cisaillement et la pression.

Références	Dimensions
05.00.AP212 - Pack complet :	
Plaques latérales (*2)	725 x 175 x 20 mm
Plaques centrales (*2)	185 x 120 x 20 mm



SET 2 PCS EN GEL POUR CADRE DE WILSON

Conçu pour couvrir le cadre de Wilson et offrir aux patients une protection supplémentaire contre le cisaillement et la pression.

Références	Dimensions
05.00.AP210	750 x 255 x 25 mm
05.00.AP211	750 x 255 x 10 mm



SANGLE

N'exerce pas de pression excessive ni de cisaillement sur le patient grâce à la présence de gel.

Références	Dimensions
05.00.AP601	2 920 x 50 mm Rembourrage 510 mm
05.00.FC713	1 430 x 50 mm Rembourrage 980 mm



PROTECTION POUR BUTÉE PÉRINÉALE

Permet de protéger le périnée et le sacrum lors des tractions en orthopédie.

Références	Dimensions
05.00.AP055	180 x 180 x 13 mm
05.00.AP056	330 x 300 x 8 mm

Guide de choix

Références	Type	Zone	À privilégier pour	Atout
AP041 à AP047	Positionneur à fond plat	Abdomen / tronc	Soutien abdominal et positionnement du corps	Large choix de formats
AP047-1 à AP047-4 et AP048-1 / à AP048-4	Positionneur à fond plat, pédiatrique	Abdomen / tronc	Positionnement des petits gabarits	Gamme pédiatrique dédiée
AP049-1 à AP049-3 et XG049-1 à XG049-3	Positionneur de poitrine	Thorax	Soutenir et stabiliser le thorax et la poitrine	Disponible en gel ou X-Gel allégé
AP050-1 AP050-2	Positionneur de poitrine	Thorax, abdomen, épaules	Stabiliser le tronc en décubitus ventral	Forme anatomique droite et gauche
AP051	Dôme de positionnement	Thorax, abdomen, membres	Soutien polyvalent et maintien de l'alignement	Forme polyvalente
AP052	Positionneur thoracique plat	Thorax	Installations nécessitant une extension thoracique	Support thoracique plat
AP054	Positionneur de hanche	Hanche	Soutenir l'articulation et protéger la zone d'appui	Protection ciblée de la hanche
AP055 / AP056	Protection pour butée périnéale	Périnée, sacrum	Tractions orthopédiques avec butée périnéale	Protection de l'interface avec la butée
AP091 à AP097	Positionneur universel oval	Multizone	Corriger ou protéger localement une zone d'appui	Polyvalent et complémentaire
AP101	Positionneur latéral	Tronc, épaule	Stabiliser le patient en décubitus latéral	Stabiliser le patient en décubitus latéral
AP102-3 / AP102-6	Positionneur pour épaule	Epaule	Soutenir et protéger l'épaule	Protection articulaire ciblée
AP103-1	Protection sacrale	Sacrum	Décharger la région sacrée	Soutien périphérique du sacrum
AP210 / AP211 / AP212	Set pour cadre de Wilson	Thorax, bassin	Recouvrir le cadre de Wilson	AP210 / AP211 : protection dédiée - AP212 : protection complète
AP556	Coussin d'épaule	Epaule	Protéger localement l'épaule, notamment en Trendelenburg	Protection ponctuelle
AP601 / FC713	Sangle en gel	Multizone	Stabiliser le patient tout en protégeant la zone de contact	Maintien, interface en gel
AP8114J	Positionneur prostatique	Périnée	Soutien du périnée et stabilisation	Forme dédiée au soutien périnéal
XG041 à XG043	Positionneur abdominal	Abdomen	Soutenir et stabiliser l'abdomen	Léger à manipuler


Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

POSITIONNEURS POUR MEMBRES INFÉRIEURS



Les 3 points de contrôle :

- + Décharge : les talons et reliefs osseux sont correctement protégés
- + Alignement : les pieds et les chevilles sont maintenus dans une position physiologique, sans rotation excessive
- + Protection : aucune compression des structures vasculaires ou nerveuses par les porte-jambes, bottes ou autres dispositifs de maintien de pression excessif

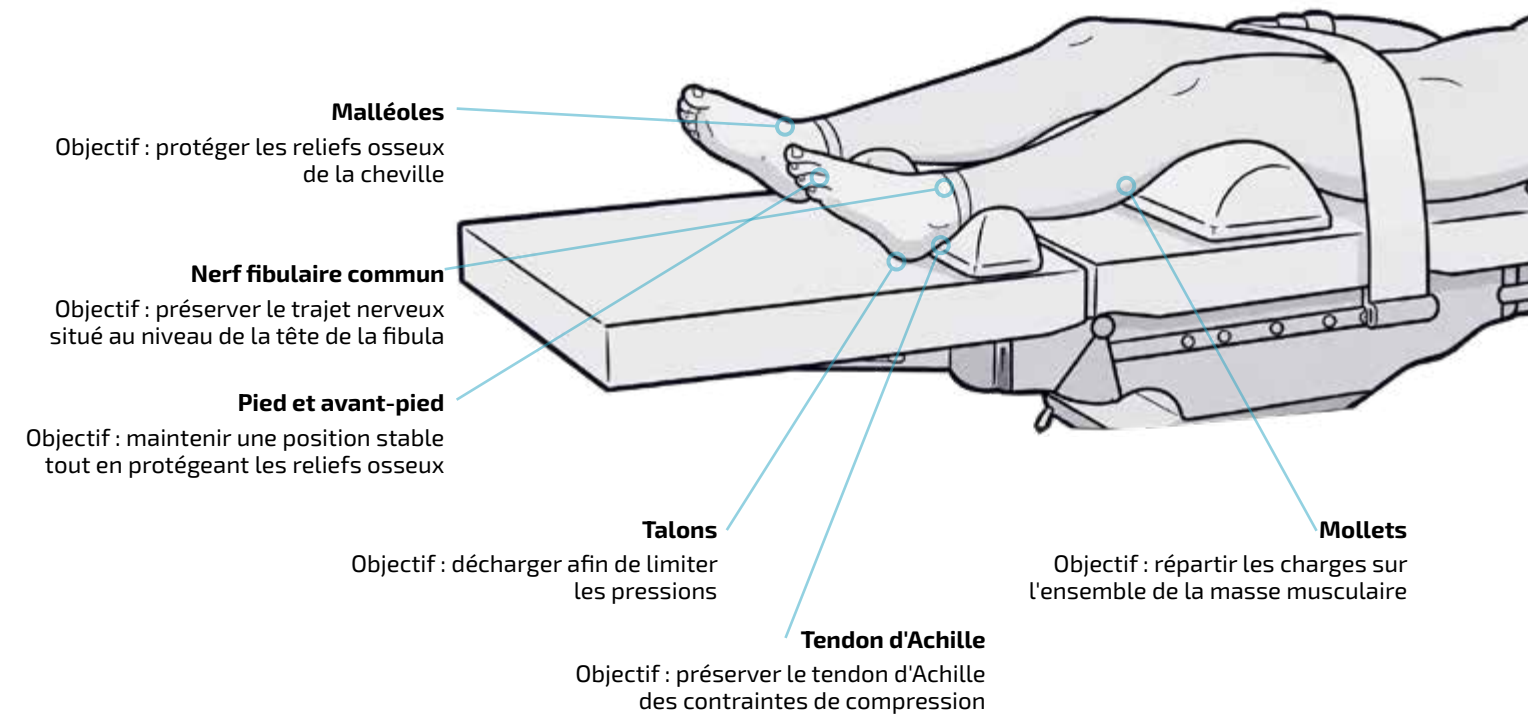

Décharge et protection des talons

Prévenir les pressions prolongées sur les talons et les reliefs osseux

- + Evite le contact avec la table
- + Répartit les pressions
- + Préviend les lésions de pression



Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Patients présentant un risque élevé de lésions



PROTECTION DE TALONS INCURVÉE

Sa forme anatomique épouse les contours du talon afin d'assurer un maintien stable et une répartition homogène des pressions.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP8125B	120 x 95 x 45 mm




PAIRE DE TALONNETTES

Conçues pour surélever les tendons d'Achille, elles permettent de décharger les talons et d'éviter leur contact direct avec la table d'opération. Elles contribuent à limiter les pressions sur cette zone particulièrement exposée.

Références	Dimensions
05.00.AP031	200 x 110 x 70 mm
05.00.AP8125D	Pédiatrique - 97 x 53 x 35mm
05.00.AP8125E	Néonatal - 78 x 43 x 28 mm

Vendues par paire

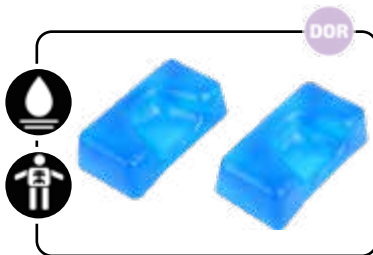

SUPPORTS DE TALONS

Maintient le talon en position tout en limitant les pressions exercées sur les reliefs osseux. Leur conception assure une protection efficace sans système de fixation supplémentaire.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP032	170 x 110 x 50 mm



PROTECTION DE TALONS

Répartit les pressions et contribue à préserver l'intégrité cutanée lors des interventions prolongées.

Référence	Dimensions
05.00.AP8125A	140 x 110 x 60 mm

Vendues par paire

Maintien du pied et de la cheville

Stabilisent le membre inférieur tout en protégeant les points d'appui.

- + Maintiennent le pied et stabilisent la cheville
- + Conservent les talons dans une position protégée



Indications cliniques :

- Actes modérés à longs
- Patients présentant un risque élevé de lésions



PAIRE DE TALONNIÈRES À LACETS

Assurent le maintien du talon tout en répartissant les pressions sur les zones d'appui. Elles peuvent également être utilisées en complément des bas de contention, en radiologie ou en rééducation.

Vendues par paire avec lacets de fixation

Référence	Dimensions
05.00.AP033	17 x 18 x 13 mm



PAIRE DE TALONNIÈRES À VELCRO

Équipée d'un système de fixation par Velcro®, elle maintient le talon de manière sécurisée tout en limitant les pressions exercées sur les tissus. Convient également aux applications en radiologie et en rééducation.

Référence	Dimensions
05.00.AP034	170 x 230 x 13 mm

Vendues par paire avec bandes Velcro®

Protection des porte-jambes et bottes de lithotomie

Protègent le patient du dispositif de maintien.

- + Limitent les pressions
- + Améliorent le confort



Indications cliniques :

- Lithotomie
- Urologie
- Gynécologie
- Chirurgie robotique




PAIRE DE PROTECTIONS DE PIEDS

Conçue pour protéger le pied, le talon et le bas de la jambe lors de l'utilisation de porte-jambes, elle répartit les pressions et améliore le confort du patient pendant l'intervention.

Vendues par paire

Référence	Dimensions
05.00.AP901	230 x 280 x 13 mm

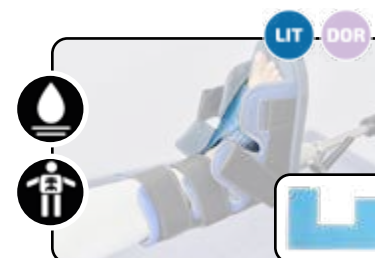

COUSSIN DE PROTECTION POUR BOTTES

Destiné aux bottes de lithotomie et porte-jambes, il réduit les pressions exercées sur les zones de contact et améliore le confort du patient tout au long de l'intervention.

Référence	Dimensions
05.00.AP902	370 x 240 x 5 mm



PAIRE DE PROTECTION PORTE-JAMBES GOEPEL

Répartit les pressions sur les membres inférieurs et limite les risques de compression lors des interventions en lithotomie.

Références	Dimensions
05.00.AP801	310 x 230 x 10 mm
05.00.AP802	400 x 250 x 10 mm
05.00.AP803	520 x 300 x 10 mm
05.00.AP804	550 x 520x 10 mm

Vendues par paire

Positionnement polyvalent

Utilisable sur différentes zones anatomiques selon l'installation

- + Maintient le pied et stabilise la cheville
- + Conserve les talons dans une position protégée

Indications cliniques :

- Actes modérés à longs

TUNNEL DE PROTECTION

Conçu pour protéger les membres inférieurs, il limite les points de pression et les contacts involontaires pendant l'intervention. Sa structure en mousse assure un espace de dégagement autour de la jambe inférieure et une surface stable pour celle du dessus. Stabilise le bassin.

Référence	Dimensions
05.00.AP103	650 x 410 x 235 mm

produit préféré du bloc

Références	Famille	Zone	À privilégier pour	Atout
AP031	Talonnettes	Talon, tendon d'Achille	Décharge complète du talon	Surélève le tendon d'Achille et décharge le talon
AP032	Supports de talons	Talon	Maintien et protection du talon	Maintien sans fixation supplémentaire
AP033	Talonnières à lacets	Talon, cheville	Maintien du talon avec fixation	Fixation par lacets
AP034	Talonnières à Velcro®	Talon, cheville	Maintien sécurisé et ajustable du talon	Fixation par Velcro®
AP103	Tunnel de protection	Jambe, membre inférieur	Créer un espace de dégagement et éviter les contacts involontaires	Protection globale du membre
AP801 à AP804	Protection porte-jambes Goepel	Jambe, mollet	Protéger l'interface avec les porte-jambes	Plusieurs formats disponibles
AP8125A	Protection de talons	Talon	Répartir les pressions sur la zone d'appui	Protection simple du talon
AP8125B	Protection de talons incurvée	Talon	Maintenir le talon dans une position stable	Forme anatomique incurvée
AP8125D / AP8125E	Talonnettes pédiatriques	Talon, tendon d'Achille	Décharge du talon des petits patients	Pédiatrique / néonatal
AP901	Protections de pieds	Pied, talon, bas de jambe	Protéger le membre dans les porte-jambes	Protection étendue pied-talon-jambe
AP902	Coussin pour bottes	Pied, cheville, jambe	Protéger l'interface avec les bottes de lithotomie	Protection dédiée aux bottes

Repères indicatifs d'aide au choix. Le choix du support dépend de la morphologie du patient, de la durée de l'intervention et du protocole de l'établissement.

GELS DE TABLE

GELS POUR CHAISES

Leur conception particulière permet une excellente répartition des pressions et une bonne oxygénation, afin d'éviter le risque de rougeur de la peau. Sa structure favorise la ventilation des zones d'appui et contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité.

- + Idéal pour la position Beach Chair
- + Répartition optimale des pressions

Références	Dimensions
05.00.NP1616-1	400 x 400 x 16 mm
05.00.NP1816-1	460 x 400 x 16 mm
05.00.NP1818-1	460 x 460 x 16 mm
05.00.NP2018-1	500 x 460 x 16 mm

Matelas de table

MATELAS GAUFRÉS POUR TABLE D'OPÉRATION

Conçu pour recouvrir la table d'opération, il répartit uniformément les pressions sur l'ensemble du corps afin de limiter les contraintes exercées sur les zones d'appui.

- + Répartition homogène des pressions
- + Ventilation des zones d'appui
- + Limitation des phénomènes de macération cutanée

Références	Dimensions
05.00.AP063	400 x 230 x 16 mm
05.00.AP064	910 x 450 x 16 mm
05.00.AP061	500 x 500 x 16 mm
05.00.AP062	1 150 x 500 x 16 mm

MATELAS EN GEL POUR TABLE D'OPÉRATION

Assurent une protection continue du patient en répartissant les pressions sur toute la surface de la table d'opération. Disponibles en différentes dimensions et épaisseurs, ils s'adaptent aux besoins de chaque spécialité chirurgicale.

- + Confort renforcé grâce à une surface continue en gel
- + Répartition homogène des pressions sur les zones d'appui
- + Adaptation aux différentes tables et spécialités chirurgicales

Tri réalisé par épaisseur du produit - Epaisseur 20 mm disponible sur demande

Références	Dimensions	Références	Dimensions	Références	Dimensions
05.00.AP412	460 x 330 x 5 mm	05.00.AP304	500 x 250 x 10 mm	05.00.AP555	660 x 150 x 13 mm
05.00.AP418	160 x 80 x 6 mm	05.00.AP412-1	460 x 330 x 10 mm	05.00.AP405-1.5	150 x 350 x 15 mm
05.00.AP306	420 x 150 x 10 mm	05.00.AP308	450 x 500 x 10 mm	05.00.AP407-1.5	700 x 450 x 15 mm
05.00.AP413	220 x 170 x 10 mm	05.00.AP303	500 x 500 x 10 mm	05.00.AP408-1.5	150 x 500 x 15 mm
05.00.AP405	150 x 350 x 10 mm	05.00.AP406	700 x 500 x 10 mm	05.00.AP304-1.5	500 x 250 x 15 mm
05.00.AP305	100 x 380 x 10 mm	05.00.AP302	990 x 500 x 10 mm	05.00.AP308-1.5	450 x 500 x 15 mm
05.00.AP404	1 600 x 430 x 10 mm	05.00.AP403	1 170 x 500 x 10 mm	05.00.AP303-1.5	500 x 500 x 15 mm
05.00.AP407	700 x 450 x 10 mm	05.00.AP402	1 830 x 500 x 10 mm	05.00.AP406-1.5	700 x 500 x 15 mm
05.00.AP408	150 x 500 x 10 mm	05.00.AP307	100 x 610 x 10 mm	05.00.AP424	1 000 x 500 x 15 mm
05.00.AP301	230 x 500 x 10 mm	05.00.AP401	1 930 x 860 x 10 mm	05.00.AP403-1.5	1 170 x 500 x 15 mm
				05.00.AP402-1.5	1 830 x 500 x 15 mm

Matelas spécialisés

PLAQUE EN GEL AVEC OUVERTURE PÉRINÉALE

Conçue pour les interventions nécessitant une décharge de la région périnéale ou sacrée, elle assure une répartition homogène des pressions tout en libérant la zone opératoire. Elle contribue au confort du patient lors des interventions prolongées.

Références	Dimensions
05.00.AP411W/C	500 x 500 x 10 mm
05.00.AP409W/C	1 170 x 500 x 10 mm
05.00.AP410W/C	1 000 x 500 x 10 mm
05.00.AP411W/C-1.5	500 x 500 x 15 mm
05.00.AP409W/C-1.5	1 170 x 500 x 15 mm
05.00.AP410W/C-1.5	1 000 x 500 x 15 mm

GEL POUR BERCEAU

Spécialement conçu pour les nouveau-nés et nourrissons, il répartit uniformément les pressions au sein du berceau afin de protéger les zones d'appui les plus sensibles.

Référence	Dimensions
05.00.AP053	305 x 660 x 12,7 mm

MOUSSES VISCOÉLASTIQUES À MÉMOIRE DE FORME MOOBA

Epousent la morphologie du patient afin d'assurer un soutien stable tout en répartissant les pressions sur les zones d'appui.

- + Maintiennent une position anatomique stable
- + Répartissent les points de pression sur les zones d'appui
- + Facilitent l'installation du patient
- + Solutions polyvalentes

Indications cliniques :

- Interventions de durées courtes à intermédiaires
- Installations courantes du bloc opératoire
- Patients présentant un risque faible à modéré de lésions de pressions
- Services à fortes rotations

Positionnements de la tête

SUPPORT DE TÊTE

Assure un maintien stable de la tête tout en répartissant les pressions au niveau occipital.

Référence	Dimensions
03.05.OBA15	270 x 270 x 90 mm

ANNEAU DE PROTECTION

Protège la tête ou le cou en répartissant les pressions autour des zones sensibles.

Références	Dimensions
03.05.OBA2	Ø 160 mm
03.05.OBA1	Ø 200 mm

Positionnement du membre supérieur

SUPPORT POUR AVANT-BRAS

Maintient le poignet et l'avant-bras dans une position ergonomique tout en limitant les pressions localisées.

Référence	Dimensions
03.05.OBA10	480 x 140 x 130 mm

Positionnements latéraux

PROTECTION TRIANGULAIRE

Soutient le dos, le bassin ou les membres afin de maintenir un alignement anatomique stable pendant l'intervention.

Références	Dimensions
03.05.OBA4	400 x 250 x 180 mm
03.05.OBA7	400 x 250 x 120 mm

PROTECTION TRIANGULAIRE 30°

Stabilise le patient et limite les rotations du tronc.

Références	Dimensions
03.05.OBA14	550 x 250 x 180 mm
03.05.OBA16	700 x 250 x 180 mm

CALE DE SOUTIEN TRAPÉZOÏDALE

Stabilise une zone anatomique tout en améliorant la répartition des pressions lors des interventions prolongées.

Références	Dimensions
03.05.OBA3	300 x 250 x 100/50 mm
03.05.OBA5	400 x 250 x 100/50 mm
03.05.OBA6	400 x 250 x 60/25 mm

Positionnements des membres inférieurs

SÉPARATEUR DE JAMBES

Garantit une ouverture confortable des membres inférieurs tout en protégeant les articulations des genoux et hanches.

Références	Dimensions
03.05.OBA11P	130 x 90 x 170/75 mm
03.05.OBA11G	200 x 160 x 150/140 mm

SUPPORT DE TALONS

Décharge le talon et soutient le mollet afin de préserver l'alignement du membre inférieur et de limiter les pressions sur les reliefs osseux.

Référence	Dimensions
03.05.OBA12	460 x 230 x 200 mm

POSITIONNEUR CYLINDRIQUE

Support polyvalent utilisable sous les membres ou le tronc afin de faciliter le positionnement et de répartir les pressions.

Références	Dimensions
03.05.OBA8	Long. 400 - Ø 150 mm
03.05.OBA9	Long. 600 - Ø 150 mm

COUSSINS DE POSITIONNEMENT LOJER

COUSSIN DE SOUTIEN SEMI-CIRCULAIRE

Conçu pour soutenir les membres inférieurs ou d'autres zones anatomiques, il favorise un positionnement ergonomique du patient tout en répartissant les pressions sur les points d'appui.

Référence	Dimensions
SS6010	550 x 200 x 100 mm

COUSSIN CYLINDRIQUE POLYVALENT

Polyvalent, il peut être utilisé pour soutenir les membres ou le tronc lors du positionnement peropératoire. Il contribue à maintenir un alignement anatomique stable tout en améliorant le confort du patient.

Références	Dimensions
SS6020	Long. 500 - Ø 100 mm
SS6030	Long. 500 - Ø 150 mm

CALE DE POSITIONNEMENT TRIANGULAIRE

Contribue à stabiliser le positionnement tout en limitant les contraintes exercées sur les zones d'appui.

Références	Dimensions
SS6040	300 x 250 x 140 mm
SS6050	400 x 250 x 230 mm



PATCHS DE RÉPARATION DE SURFACES MÉDICALES

Une déchirure, une perforation ou une coupure peuvent compromettre l'intégrité d'une surface médicale et compliquer son nettoyage. CleanPatch® permet de réparer rapidement les surfaces endommagées afin de restaurer une surface imperméable, nettoyable et adaptée à l'environnement de soins.



Hygiène

restaure une surface imperméable et nettoyable



Réparation rapide

technologie adhésive Peel & Stick, appliquée en quelques secondes



Economique

prolonge la durée d'utilisation des équipements et limite les remplacements



Polyvalent

des solutions adaptées aux surfaces PU, vinyle et positionneurs en gel



CLEANPATCH® - Pour matelas et surfaces en polyuréthane

Solution de réparation destinée aux matelas en mousse, brancards et autres surfaces en polyuréthane ou revêtues.

Son application adhésive simple permet de recouvrir rapidement les coupures, perforations et déchirures afin de restaurer une surface imperméable et nettoyable.

Coloris : bleu

Références	Dimensions
11003 - Cercle, pack de 10 unités 11001 - Cercle, pack de 30 unités	ø 50 mm
10003 - Carré, pack de 5 unités 10001 - Carré, pack de 20 unités	89 x 89 mm
12003 - Rectangle, pack de 5 unités 12001 - Rectangle, pack de 10 unités	89 x 152 mm
18003 - Pack de 5 Cleanpatch cercles, 2 carrés, 3 rectangles	




CLEANPATCH® - CORNER - Pour les angles de matelas et coussins

Sa forme permet d'épouser l'angle de l'équipement afin de restaurer l'intégrité de la surface sur une zone particulièrement exposée aux déchirures et à l'usure.

Coloris : bleu

Référence	Dimensions
341001 - Pack de 10 unités	50 x 100 mm

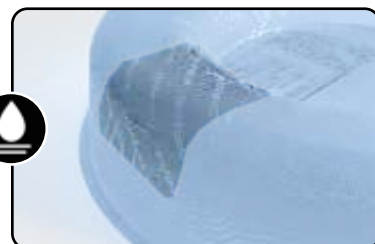

CLEANPATCH® - P - Pour les coussins et positionneurs gels

Permet d'intervenir localement sur une surface endommagée sans remplacer immédiatement l'ensemble du dispositif.

Coloris : transparent

Référence	Dimensions
31001 - Pack de 10 unités	35 x 89 mm



CLEANPATCH®-V - Pour surfaces en vinyle

Permet de traiter rapidement les petites déchirures et perforations présentes sur les tables d'examen, fauteuils, équipements de rééducation ou mobilier clinique.

Coloris : noir

Références	Dimensions
21001 - Petit, pack de 10 unités	45 x 101 mm
22001 - Grand, pack de 5 unités	146 x 203 mm
24001 - 2 petits + 1 grand	
23001 - 7 petits + 3 grands	



AIDE AU TRANSFERT DES PATIENTS

Pourquoi utiliser une aide au transfert des patients ?

Les aides au transfert améliorent la sécurité des manipulations de patients tout en réduisant la pénibilité pour les équipes.

- + Réduisent les efforts des soignants
- + Sécurisent le transfert
- + Préservent le confort du patient
- + Limitent les phénomènes de friction et de cisaillement

Indications cliniques :


- Admissions au bloc opératoire
- Transfert brancard - table
- Patients à mobilité réduite
- Salles de réveil
- Radiologie
- Réanimation
- Patients traumatisés



Planches de transfert



Poignée

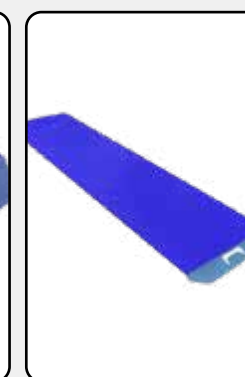

Scangliss 2 lite rigide



Scangliss 2 lite pliable



Scangliss 2 lite mini

PLANCHE DE TRANSFERT SCANGLISS LITE

Légère et radiotransparente, elle facilite les transferts latéraux entre deux surfaces. Sa faible épaisseur réduit l'effort nécessaire au déplacement tout en assurant un transfert fluide et sécurisé.

Capacité de poids de patient : **250 kg**

Scangliss 2 lite **rigide**

Références	Dimensions	Poids
03.04.9131	1800 x 500 mm	2,30 kg
03.04.9151	1500 x 500 mm	2,00 kg
03.04.9141	1 250 x 500 mm	1,60 kg

Scangliss 2 lite **pliable**

Références	Dimensions	Poids
03.04.9130	1800 x 500 mm	2,30 kg
03.04.9150	1 500 x 500 mm	2,00 kg
03.04.9140	1 250 x 500 mm	1,60 kg

Scangliss 2 lite **mini**

Référence	Dimensions	Poids
03.04.9160	900 x 500 mm	1,15 kg

PLANCHE DE TRANSFERT SCANGLISS PLUS



Conçue pour les transferts les plus exigeants, cette planche de glisse offre une rigidité supérieure et une capacité de charge élevée. Ses poignées intégrées facilitent la manipulation du patient tout en améliorant la sécurité des équipes.



Scangliss 2 plus **rigide**

Références	Dimensions	Poids
03.04.9001	1 800 x 500 mm	3,90 kg
03.04.9005	1 500 x 500 mm	3,00 kg
03.04.9003	1 250 x 500 mm	2,70 kg



Scangliss 2 plus **pliable**

Référence	Dimensions	Poids
03.04.9000	1 800 x 500 mm	3,90 kg
03.04.9004	1 500 x 500 mm	3,00 kg
03.04.9002	1 250 x 500 mm	2,70 kg



Scangliss 2 plus **mini**

Référence	Dimensions	Poids
03.04.9010	900 x 500 mm	1,50 kg

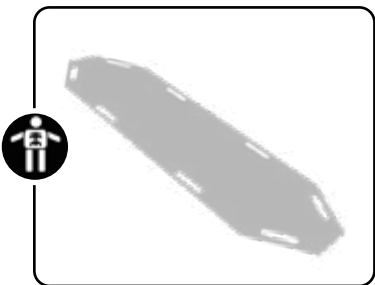


PLANCHE DE TRANSFERT
RADIOTRASPARENTE

Facilite les transferts latéraux tout en restant compatible avec les examens d'imagerie. Ses nombreuses poignées permettent une manipulation ergonomique à plusieurs opérateurs.

Références	Dimensions
03.04.PSN	1 830 x 460 mm Cap. de poids de patient : 180 kg
03.04.PSS	1 830 x 560 mm Cap. de poids de patient : 180 kg
03.04.PSL	1 830 x 650mm Cap. de poids de patient : 250 kg

Draps de transfert



DRAPS DE TRANSFERT MAXISLIDE

Facilite les rotations et repositionnements du patient dans le lit en réduisant les efforts de mobilisation. Sa conception favorise un glissement fluide et confortable.

- + Facilite les rotations et repositionnements au lit
- + Réduit les efforts nécessaires à la mobilisation du patient

Référence	Dimensions
03.04.1031	1 900 x 600 mm Cap. de poids de patient : 300 kg

Matelas de transfert



MATELAS DE TRANSFERT GURNEY

Conçu pour transférer les patients dont la mobilité est réduite, il associe souplesse et résistance afin d'assurer un déplacement confortable et sécurisé. Les multiples poignées facilitent la manipulation par plusieurs opérateurs.

Références	Nbr poignées	Dimensions	Poids max. patient
03.04.4001	4	1 000 x 410 mm	180 kg
03.04.4016	6	1 500 x 430 mm	250 kg
03.04.4020	10	1 520 x 870 mm	400 kg
03.04.2021	14	2 050 x 1 050 mm	400 kg



MATELAS DE TRANSFERT RADIOTRASPARENTE

Particulièrement adapté au bloc opératoire et à la radiologie, ce matelas peut rester sous le patient pendant l'intervention grâce à sa radiotransparence. Son rembourrage améliore le confort lors des transferts et des installations prolongées.

Référence	Nbr poignées	Dimensions	Poids max. patient
03.04.3100	8	1 750 x 710 mm	180 kg

ACCESSOIRES



PROTECTION À USAGE UNIQUE

Préserve les aides au transfert des contaminations. Prédécoupé et facile à installer, elle contribue à maintenir un haut niveau d'hygiène entre deux patients.

Références	Dimensions
03.04.1055	2 000 x 600 mm <i>100 unités</i>
03.04.1155	1 000 x 600 mm <i>200 unités</i>
03.04.1255	1 350 x 600 mm <i>150 unités</i>
03.04.2055	500 x 600 mm <i>400 unités</i>



SUPPORT MURAL

Fabriquée en acier inoxydable antirouille. Conçu pour stocker les rouleaux de protection.
Version avec rangements : possibilité de stocker les systèmes de transfert Scangliss

Références	Dimensions
03.04.1085	690 x 210 x 130 mm <i>Version simple</i>
03.04.1087	690 x 210 x 130 smm <i>Version avec rangements</i>



SUPPORT MURAL POUR SCANGLISS

Conçu pour ranger les planches de transfert pliables Scangliss 2 Lite et 2 Plus, il permet de conserver les dispositifs à portée de main tout en optimisant leur rangement.

Référence	Dimensions
03.04.1086	830 x 420 x 90 mm

Remeda

TABLE À INSTRUMENTS À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Spécialiste suédois des équipements pour le bloc opératoire, REMEDA développe des tables à instruments robustes, ergonomiques et fonctionnelles, pensées pour faciliter l'organisation du matériel et accompagner efficacement les équipes chirurgicales au quotidien.



Réglage électrique de la hauteur



Construction robuste en acier inoxydable



Large choix de configurations



Mobilité et ergonomie optimisées



TABLE DE MAYO

Compacte et mobile, elle permet de positionner les instruments au plus près du champ opératoire. Son réglage électrique en hauteur s'effectue directement sous le plateau, sans avoir à éloigner la table du patient.

- + Hauteur réglable de 900 à 1 400 mm
- + Plateau en inox avec rebord
- + 3 roulettes antistatiques
- + Commandes sous le plateau

Table de Mayo - plateau **statique**

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 21-31	500 x 400	900 - 1 400	30
100 21-32	600 x 400	900 - 1 400	30
100 21-33	700 x 500	900 - 1 400	50

Table de Mayo - plateau **pivotant à 180°**

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 21-42	600 x 400	900 - 1 400	20
100 21-43	700 x 800	900 - 1 400	30



TABLE À INSTRUMENTS À DOUBLE PLATEAUX

Dispose d'un double plateau pour optimiser l'espace et l'organisation du matériel, particulièrement utile lors d'interventions nécessitant une instrumentation importante.

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 27-01	1 200 x 750	720 - 970	160
100 27-02	1 500 x 750	720 - 970	160
100 27-03	1 800 x 750	720 - 970	160



TABLE À INSTRUMENTS DÉPORTÉE

Sa colonne positionnée à l'arrière du plateau permet d'avancer le plateau au-dessus de la table d'opération et facilite ainsi l'accès aux instruments depuis le côté opposé.

- + Plateau déporté permettant de chevaucher la table d'opération
- + Tables imbriquables pour faciliter le stockage
- + Pour les blocs cherchant une table polyvalente et peu encombrante

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 23-31	800 x 520	800 - 1 200	50
100 23-32	900 x 550	800 - 1 200	50
100 23-33	1 070 x 570	800 - 1 200	50
100 23-34	1 200 x 570	800 - 1 200	50
100 23-41	800 x 520	900 - 1 400	50
100 23-42	900 x 550	900 - 1 400	50
100 23-43	1 070 x 570	900 - 1 400	50
100 23-44	1 200 x 570	900 - 1 400	50



TABLE PONT RENFORCÉE

Spécifiquement conçue pour recevoir des charges plus importantes ; convient particulièrement aux interventions nécessitant de nombreux instruments ou des équipements plus lourds, notamment en chirurgie orthopédique

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 24-33	1 070 x 570	800 - 1 200	80
100 24-36	1 200 x 570	800 - 1 200	80
100 24-36	1 200 x 900	800 - 1 200	80
100 24-38	1 400 x 600	800 - 1 200	80
100 24-43	1 070 x 570	900 - 1 400	80
100 24-44	1 200 x 570	900 - 1 400	80
100 24-46	1 200 x 900	900 - 1 400	80
100 24-48	1 400 x 600	900 - 1 400	80



TABLE À INSTRUMENTS À PLATEAUX RABATTABLES

Combine robustesse et modularité grâce à ses deux extensions latérales rabattables de 400 mm, permettant d'adapter rapidement la surface de travail à la quantité d'instruments nécessaire tout en limitant l'encombrement.

Références	Dim. plateau (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg)
100 24-33-FT	400/1 070/400 x 570	800 - 1 200	15/80/15
100 24-34-FT	400/1 200/400 x 570	800 - 1 200	15/80/15
100 24-38-FT	400/1 400/400 x 600	800 - 1 200	15/80/15
100 24-43-FT	400/1 070/400 x 570	900 - 1 400	15/80/15
100 24-44-FT	400/1 200/400 x 570	900 - 1 400	15/80/15
100 24-48-FT	400/1 400/400 x 600	900 - 1 400	15/80/15



L'EXPERTISE ALLEMANDE AU SERVICE DU POSITIONNEMENT CHIRURGICAL

Fondée en 1946, AKRUS est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de positionnement pour la chirurgie ambulatoire.

Fabriqués en Allemagne, les équipements se distinguent par leur conception robuste, leurs réglages ergonomiques et leur adaptabilité aux exigences des différentes spécialités chirurgicales.



Ergonomie et précision,
pour le patient et le
chirurgien




Equipements mobiles,
fonctionnent sur
batterie



Conception
et production
allemande



Solutions
polyvalentes et
modulaires

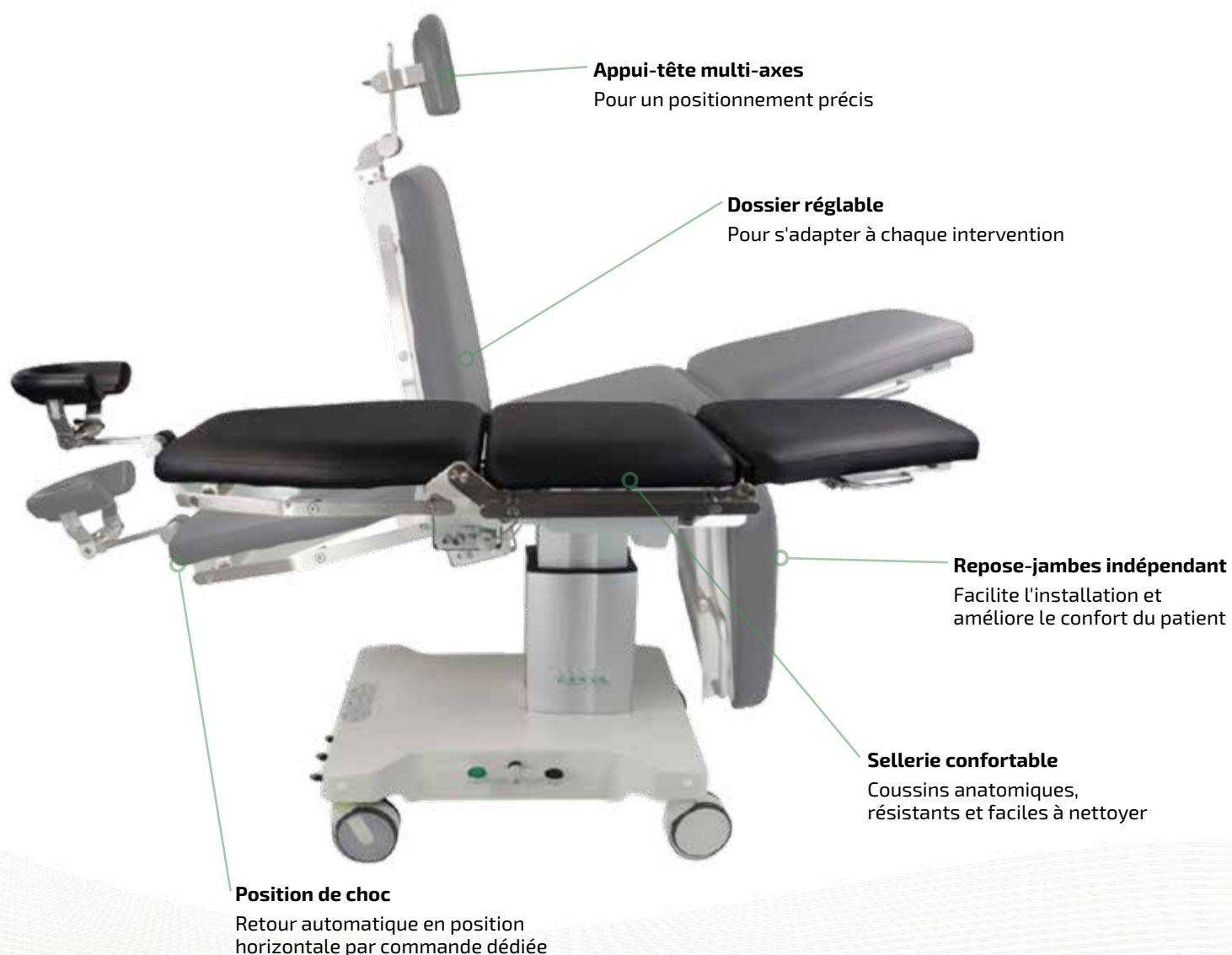

SIÈGE OPÉRATOIRE ÉLECTRIQUE

La gamme SC5010 associe mobilité, confort du patient et précision de positionnement pour les interventions chirurgicales ambulatoires. Grâce aux réglages électriques indépendants de la tête, du dossier, de l'assise et des jambes, ces fauteuils s'adaptent aux exigences de différentes spécialités. Leur conception facilite l'installation du patient tout en préservant l'accessibilité du champ opératoire et l'ergonomie des équipes médicales.

SC 5010 ES, le fauteuil idéal pour l'ophtalmologie

- + Accès très bas (520 mm) pour plus de confort et de sécurité pour les patients
- + Ergonomie facilitée pour l'équipe opératoire grâce à l'espace sous le dossier

SC 5010 HS, conçu pour le chirurgie ORL, maxillo-faciale ou plastique

- + Table plus haute (jusqu'à 1 m) favorable au positionnement debout du chirurgien
- + Maniable, réglable en hauteur et ergonomique

Références	Dimensions
SC 5010 ES	Larg. 600 - Long. 760 - Haut. 1 700 mm Assise à hauteur variable : 520 - 780 mm
SC 5010 HS	Larg. 580 - Long. 760 - Haut. 1 700 mm Hauteur variable : 640 - 1 000 mm



Cinq actionneurs électriques pilotent différents segments du fauteuil



Appui-tête à commande électrique, avec une course verticale de 50 mm



Réglage vertical du support de jambe pour faciliter l'entrée



Support de jambe prolongé grâce à une plaque de pied télescopique



Panneau de commande à 6 fonctions au pied

Fauteuil de chirurgien



FAUTEUIL DE CHIRURGIEN

Conçu pour les interventions réalisées en position assise, il associe ergonomie, mobilité et précision de positionnement. Ses multiples réglages permettent d'adapter la posture du chirurgien aux exigences de l'intervention, tout en offrant un soutien confortable et stable.



Indications cliniques :

- Ophtalmologie
- Neurochirurgie
- ORL
- Interventions de précision

Référence	Dimensions
AK 480	Larg. 620 - Long. 680 mm Hauteur d'assise : 550 - 710 mm



Réglage électrique de la hauteur contrôlé par deux interrupteurs au pied



Dossier réglable verticalement



Inclinaison jusqu'à 12°



Pivotement des accoudoirs jusqu'à 140°



VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE RADIOPROTECTION

Depuis 1990, *Promega* est le seul fabricant français de vêtements et accessoires de radioprotection. La société équipe de nombreux établissements publics ou privés des secteurs du **médical**, **nucléaire**, **militaire** ou encore industriel. L'ensemble des produits est confectionné dans un atelier à La Farlède, en France, et est soumis au marquage CE par l'IRSN.



Gamme complète :
de la radioprotection des humains et des matériaux aux rangements, en passant par un système de traçabilité *Biotrace*.



Savoir-faire :
bureau d'études et atelier de fabrication internes, situés en France.




Ensembles de protection
Modèles K et H



Bavolet



Support mobile

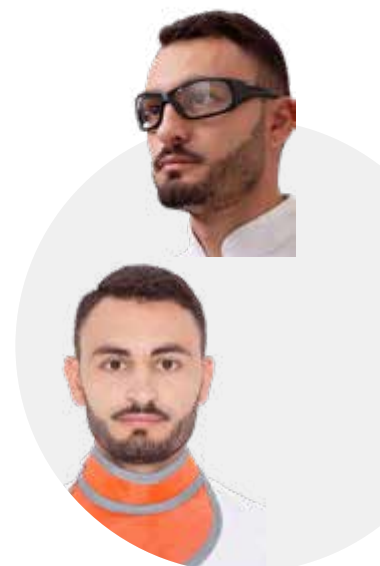

Accessoires



Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de radioprotection Promega ?
Contactez-nous !



117 rue Robert Bunsen
57460 BEHREN LES FORBACH

Tél : +33 (0)3 87 85 71 04
commercial@medical-system.com
www.medical-system.com